


Trykvogteren hybridmadras

Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Trykvogteren hybridmadras er en fleksibel madras, der kan bruges som selvjusterende madras, uden pumpe, hvor den tilpasser sig efter brugerens position. Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk

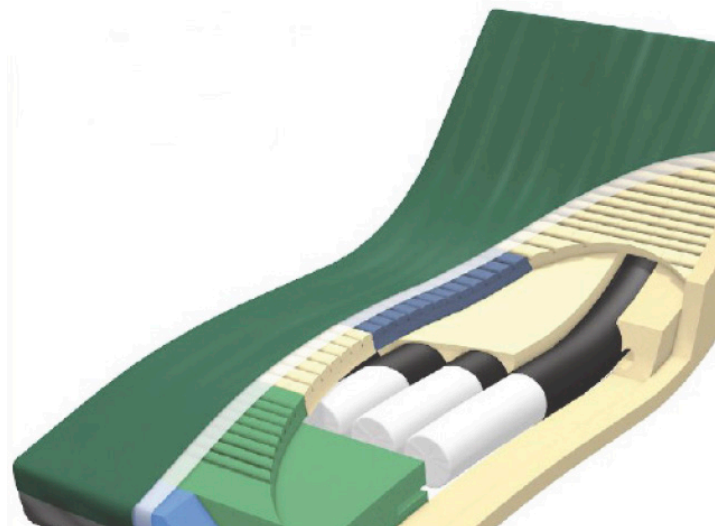

Fleksibilitet i behandlingen

- Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling.
- Med pumpe – vekseltryk eller "flydende" luftskifte.

Fordele

- Fleksible behandlingsmuligheder
- Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske niveau for den enkelte bruger
- Minimerer shear
- Maksimal komfort ved Geomatt skumdesign med dokumenteret trykfordelende effekt
- Specialdesignet fast sikkerhedskant der minimerer fastklemning og reducerer fald ved udstigning
- Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble

Unikke shear-nedsættende egenskaber

Madrassens top består af en unik klinisk testet, patenteret Geomatt skum. Geomatt skummet har mere end 800 opskæringer, som er udviklet til bl.a.

at nedsætte shear.

Det specialdesignede multistrækbetræk har 3 shearnedsættende zoner under hæle, sacrum og skulderblade. Det beskytter mod de skader, der kan opstå med forskydning og rotation/forflytning.

Kliniske egenskaber


- Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg
- Reducerer varme og fugt
- Indbygget hælfunktion – specialdesignet til ekstra trykreduktion på hæle
- Længdegående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af vores produkter.

Trykvogteren hybridmadras

Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Madrassens top består af en unik klinisk testet, patenteret Geomatt skum. Geomatt skummet har mere end 800 opskæringer, som er udviklet til bl.a. at nedsætte shear.

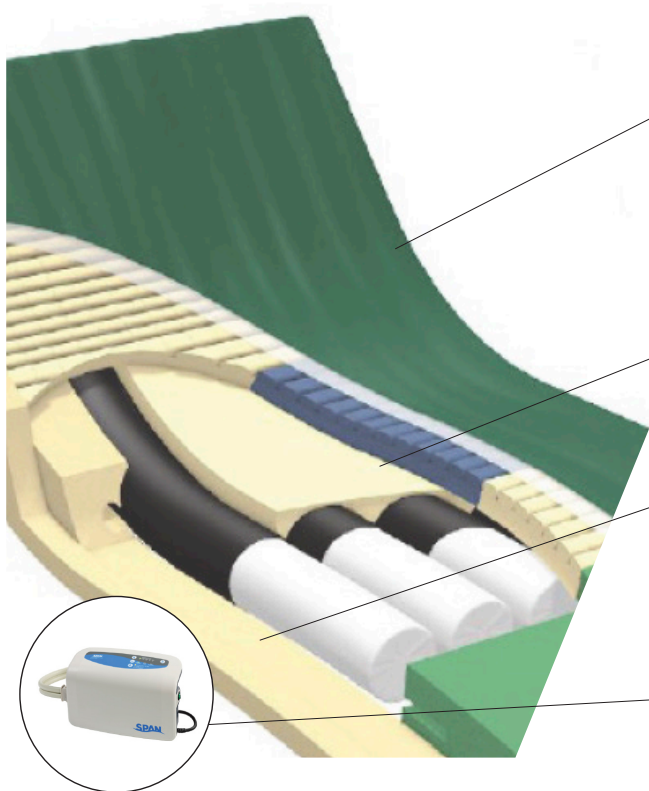

Fleksible brug

Madrassen kan bruges som selvjusterende madras, uden pumpe, hvor den tilpasser sig efter brugerens position. Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk.

Hælaflastning

Indbygget hælfunktion – specialdesignet til ekstra trykreducing på hæle

Trykvogteren hybridmadras er ideel til bl.a.

- Behandling af grad 1-4 trykskader
- Forebyggelse til højrisiko brugere
- Brugere der ikke kan/vil repositionere sig selv
- Smerteplagede brugere
- Mennesker med demens
- Brugere med knoglemetastaser
- Sensitive brugere

Lydsvag pumpe med nem betjening

Pumpen har et lavt støjniveau, som giver mere ro på stuen. Det intuitive betjeningspanel gør pumpen nem at bruge. Pumpen har desuden topbetjening, så det er let tilgængeligt for personalet.

Tekniske data

83x200x18 cm

HMI nr.: 107045

Varenr.: 12000027

85x200x18 cm

HMI nr.: 111396

Varenr.: 12000034

105x200x18 cm

HMI nr.: 111402

Varenr.: 12000038

83x210x18 cm

HMI nr.: 111390

Varenr.: 12000036

88x200x18 cm

HMI nr.: 107044

Varenr.: 12000026

120x200x18 cm

HMI nr.: 111405

Varenr.: 12000039

83x220x18 cm

HMI nr.: 111393

Varenr.: 12000037

88x220x18 cm

HMI nr.: 111399

Varenr.: 12000040

Pumpe

HMI nr.: 107046

Varenr.: 12000028

Brugervægt: Uden pumpe: 0-180 kg Med pumpe: 0-225 kg

Madrasvægt: 11,5 kg

Sammensætning: 4 luftceller + patenteret geomatt skum på toppen

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 2,85 kg

Pumpemål: 29x20x11 cm

Indstillinger: 1-2 cyklus på 10 min

Rengøring: Madrassen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler.

Betrækket er vaskbart ved max 95 grader. Pumpen desinficeres med gængse rengørings og desinfektionsmidler på en opvreden klud.