



# Zibo Athene

...gør en forskel



Unikke shear-nedsættende egenskaber

## Tekniske data

**83x200x18 cm**

HMI nr.: 107045

Varenr.: 12000027

**88x200x18 cm**


HMI nr.: 107044

Varenr.: 12000026

### Pumpe

HMI nr.: 107046

Varenr.: 12000028

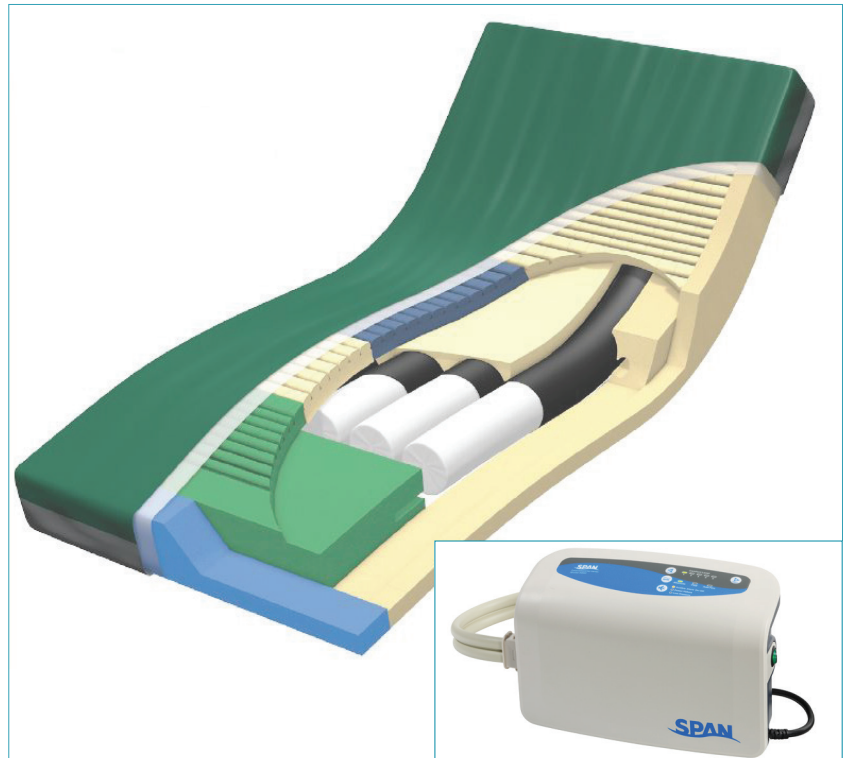

# Trykvogteren hybridmadras

## Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Trykvogteren hybridmadras er en fleksibel madras, der kan bruges som selvjusterende madras, uden pumpe, hvor den tilpasser sig efter brugerens position. Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk.

### Fleksibilitet i behandlingen

- Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling.
- Med pumpe – vekseltryk eller "flydende" luftskifte.

### Fordele

- Fleksible behandlingsmuligheder
- Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske niveau for den enkelte bruger
- Minimerer shear
- Maksimal komfort ved Geomatt skumdesign med dokumenteret trykfordelende effekt
- Specialdesignet fast sikkerhedskant der minimerer fastklemning og reducerer fald ved udstigning
- Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble

### Unikke shear-nedsættende egenskaber

Madrassens top består af en unik klinisk testet, patenteret Geomatt skum. Geomatt skummet har mere end 800 opskæringer, som er udviklet til bl.a. at nedsætte shear.

Det specialdesignede multistrækbetræk har 3 shearnedsættende zoner under hæle, sacrum og skulderblade. Det beskytter mod de skader, der kan opstå med forskydning og rotation/forflytning.

### Kliniske egenskaber

- Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg
- Reducerer varme og fugt
- Indbygget hælfunktion – specialdesignet til ekstra tryk-reducering på hæle
- Længdegående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort

### Trykvogteren hybridmadras er ideel til bl.a.

- Behandling af grad 1-4 trykskader
- Forebyggelse til højrisiko brugere
- Brugere der ikke kan/vil repositionere sig selv
- Smerteplagede brugere
- Mennesker med demens
- Brugere med knoglemetastaser
- Sensitive brugere

# Trykvogteren hybridmadras

## Tekniske specifikationer

### Madras

<b>Brugervægt</b>	Uden pumpe: 0-225 kg Med pumpe: 0-180 kg
<b>Madrasvægt</b>	11,5 kg
<b>Sammensætning</b>	4 luftceller + patenteret geomatt skum på toppen
<b>Materiale</b>	Betræk: PU inkontinensbetræk
<b>Rengøring</b>	Madrasen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

### Pumpe

<b>Pumpevægt</b>	2,85 kg
<b>Dimensioner</b>	H: 29 cm, B: 20 cm, D: 11 cm
<b>Indstillinger</b>	1-2 cyklus
<b>Cyklostid</b>	10 minutter
<b>Rengøring</b>	Desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en opvred-en klud.