

ROLLATORER & GANGVOGNE



WOLTURNUS

Nurmi Neo

- ✓ Placeres bag barnet og er åben i gangretningen
- ✓ Høj sikkerhed med tilbageløbsbremse og mulighed for anti-tip
- ✓ Højdejusterbare skubbehåndtag, når barnet vokser
- ✓ Let at køre og manøvrere
- ✓ Max brugervægt 55 kg



1 TILBAGELØBSBREMSE

Bruges til at justere hastighed, så barnet ikke går for hurtigt - kan deaktiveres.

2 HVILESÆDE

Fås med opklappeligt hvilesæde i plast i en naturlig siddehøjde for barnet.

3 UNIVERSALHÅNDTAG

Fås med universalhåndtag, som kan drejes, så gribehøjde og gribeafstand indstilles.

4 OPBEVARINGSKURV

Fås med opbevaringskurv, der monteres på gribebjælgen og er let at på- og afmontere med simpelt klikssystem. Kan placeres på midten eller forskudt til siden.



Nurmi Neo børnerollator - for en mere naturlig gang

Nurmi Neo rollator for børn og unge placeres bag kroppen og er åben i gangretningen. Den effektive støtte fremmer en oprejt kropsholdning og en naturlig gang - og dermed barnets mobilitet og uafhængighed.

Den lave vægt og de letkørende hjul gør det nemt for barnet at deltage ubesværet i hverdagen, og aluminiumsrammen er let at folde sammen for transport og opbevaring.

Nurmi Neo er ekstremt stabil og let at manøvrere. Forhjulene kan låses for retningsstabilitet, og tilbageløbsbremse er standard. De højde- og dybdejusterbare håndtag kan indstilles efter barnets størrelse, og det brede udvalg af ekstraudstyr giver mulighed for løbende tilpasning til barnets skiftende behov.



▲ **Rygstøtte** Rollatoren fås med en let buet rygstøtte eller justerbar hofte- og bækkenstøtte, der monteres på gribebøjlen bag barnet. Denne løsning sørger for, at barnet placerer sig rigtigt i gribebøjles område. Her vises den justerbare hofte- og bækkenstøtte, hvor den midterste sektion kan fjernes til smalle brugere.



SPECIFIKATIONER	STR. 1	STR. 2	STR. 3
MAX BRUGERVÆGT	25 KG	40 KG	55 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 5,5 KG	FRA 6,0 KG	FRA 6,5 KG
BREDE MELLEM ARMLÆN	25 - 41 CM	30 - 46 CM	35 - 51 CM
SÆDEHØJDE	30 CM	45 CM	48 CM
TOTALBREDE	63 CM	68 CM	72 CM
TRANSPORT (L X B X H)	65 X 63 X 24 CM	76 X 68 X 24 CM	85 X 72 X 24 CM
BØRN & UNGE	JA	JA	JA

Grillo

- ✓ Faciliterer fremad drift
- ✓ Let og stabil aluminiumramme
- ✓ Patenteret gasfjedersystem
- ✓ Mange muligheder for justering og tilbehør
- ✓ 4 str i både front- og bagudvendte versioner

1 VERSIONER

Fås i fire str og både frontvendte og bagudvendte versioner.

2 HÅNDTAG

Fås med håndtag med aftagelige greb, underarmsstøtter eller støttebøjle.

3 TRUNCUSSTØTTE

Ergonomisk og justerbar støtte til trunkus.

4 JUSTERING


Alle justeringer foregår let og uden værktøj, imens brugeren er i vognen

5 GASFJEDER


Patenteret gasfjedersystem muliggør tilpasning af rammen, imens brugeren er i vognen

6 HOFTESELE

Ergonomisk hofte sele for ekstra stabilitet. Fås også med foldbar sadel eller ergonomisk sadelsele.

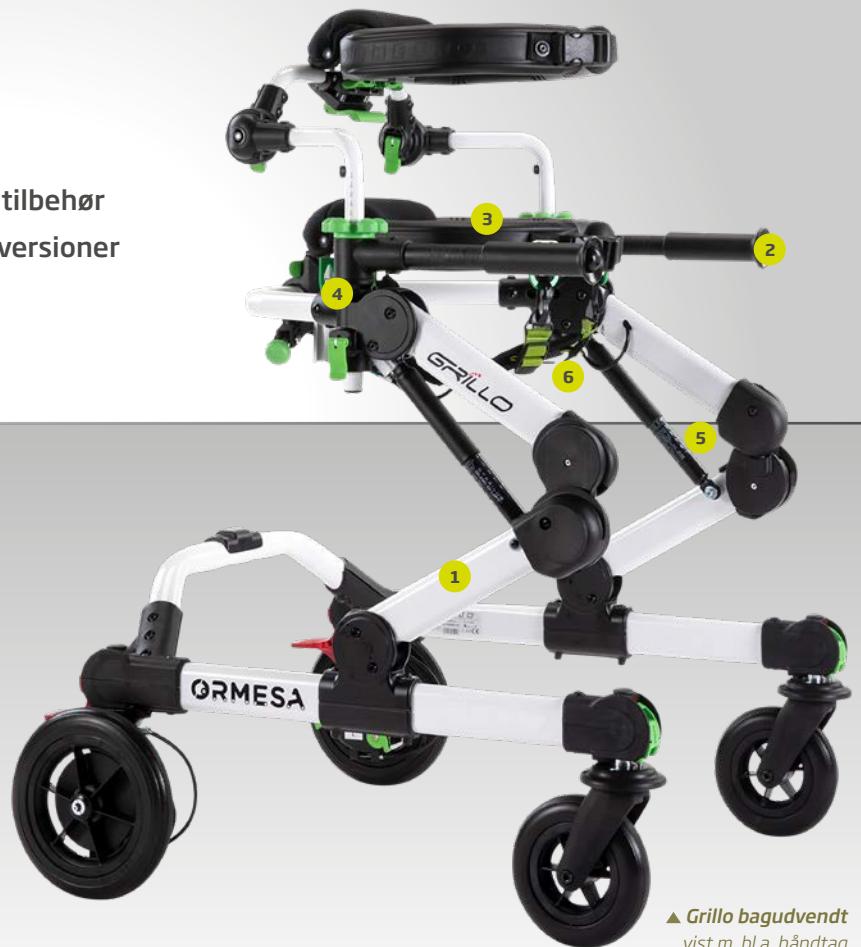

▲ Grillo bagudvendt vist m. bl.a. håndtag og truncusstøtte og bækkenstøtte

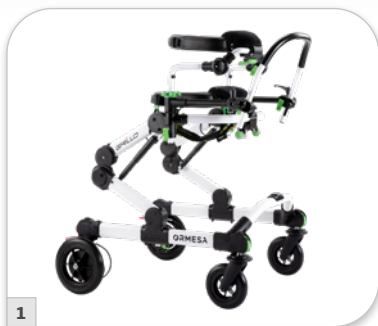

Grillo gangvogn

En alsidig gangvogn til børn, unge og voksne

Grillo er et ganghjælpemiddel for voksne og børn, designet til at facilitere fremdrift for bevægelsehæmmede og skabe følelsen af frihed og selvstændighed til at kunne udforske verden.

Med én enkelt gangvogn har du uendelige muligheder. Grillo fås i fire størrelser og i både front og bagudvendte versioner.

Grillo sætter meget høje standarder med hensyn til tilpasningsmuligheder, brugervenlighed og alsidighed, takket være en lang række nemt tilgængelige justeringsmuligheder og et stort sortiment af tilbehør.

Med sin ekstremt lette aluminiumsramme er Grillo let at skubbe og manøvrere. Den kan desuden foldes sammen, så den er let at transportere.

Det patenterede gasfjederensystem tillader en højdejustering af rammen imens brugeren er i gangvognen, såvel i den statiske som i den dynamiske fase. Højdejusteringen af rammen med et konstant tyngdepunkt betyder, at samme størrelse kan vokse med brugeren over en lang periode.



SPECIFIKATIONER	GRILLO MINI	GRILLO S	GRILLO M	GRILLO L
MAX BRUGERVÆGT	35 KG	45 KG	90 KG	110 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 15 KG	FRA 18,5 KG	FRA 21,7 KG	FRA 28,5 KG
CHASSIS BREDDE	62 CM	69 CM	76 CM	80 CM
CHASSIS LÆNGDE	74,5 CM	75 CM	91 CM	111 CM
HØJDE THORAX STØTTE	51-75 CM	66-100 CM	73-124 CM	84-147
HØJDE BÆKKENSTØTTE	42-61 CM	49-84 CM	54-100 CM	63-120 CM
BRUGERHØJDE	75-95 CM	90-135 CM	110-165 CM	150-190 CM

FÅS I TRE STØRRELSER

Carbon

- ✓ Fremstillet i kulfiber
- ✓ Let at folde sammen for transport og opbevaring
- ✓ Til indendørs og udendørs brug
- ✓ Max brugervægt 150 kg
- ✓ Totalvægt fra kun 5 kg



1 KULFIBERRAMME
Carbon Rollatoren er fremstillet i det ultralette materiale kulfiber, som gør rollatoren meget let og samtidig holdbar.

Ultra let og fleksibel rollator

Carbon rollatoren er takket være kulfiber-teknologien en ultralet rollator med en totalvægt fra 5 kg, som kan benyttes af brugere på op til 150 kg.

Den foldbare Carbon rollator er nem at have med på farten grundet det brugervenlige og effektive låsesystem, der sikrer, at rollatoren forbliver sammenfoldet under transport.

Carbon rollatoren garanterer en stabil og sikker køreoplevelse med vedligeholdelsesfrie og driftsikre hjul med godt vejgreb.


Rollatoren har stokkeholder, et praktisk og aftageligt indkøbsnet samt hvilesæde i kraftig nylon.

2 AFTAGELIGT INDKØBSNET

Rollatoren har aftageligt opbevaringsnet som standard. Det er let at på- og afmontere, har flere indbyggede lommer og kan vaskes. Nettet har en max belastningsvægt på 5 kg.

3 FOLDBAR

Carbon Rollatoren er let at folde sammen og kan stå på hjulene i sammenfoldet position. Den fylder endvidere ikke ret meget, når den er slået sammen og bliver på plads takket være det effektive låsesystem.

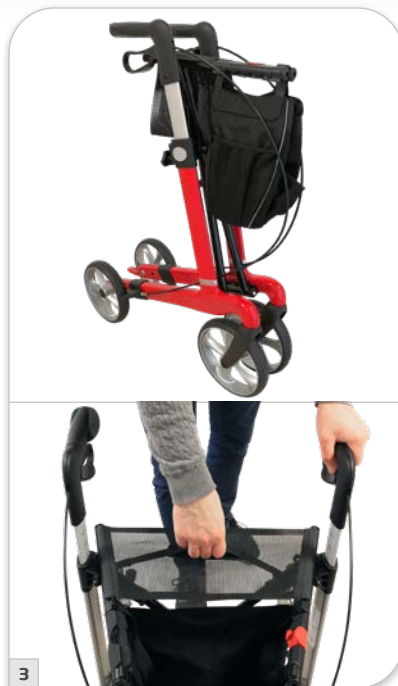

HMI-numre

STØRRELSE / SÆDEHØJDE	HMI-NUMMER
SMALL / 50 CM	112084
MEDIUM / 55 CM	112294
LARGE / 62 CM	112297

SPECIFIKATIONER	ATHLON SL
MAX. BRUGERVÆGT	150 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 5 KG
AFSTAND MELLE M HÅNDTAG	47 CM
HÅNDTAGSHØJDE	S = 63 - 79 CM M = 66 - 89 CM L = 74 - 102 CM
SÆDEHØJDE	50 / 55 / 62 CM
TOTALBREDD E	61 CM
BØRN & UNGE	NEJ

FÅS I TRE STØRRELSER

Server

- ✓ Fremstillet i aluminium
- ✓ Højdejusterbare skubbehåndtag
- ✓ Til indendørs og udendørs brug
- ✓ Let at folde sammen for transport og opbevaring
- ✓ Max brugervægt 150 kg



3 HØJDEJUSTERBARE HÅNDTAG

De ergonomiske håndtag kan let justeres til den ønskede højde. Afstanden mellem skubbehåndtagene er 47 cm.

Fleksibel letvægtsrollator

Aluminium Rollatoren er en foldbar letvægtsrollator i aluminium.

Aluminium Rollatoren har et simpelt og effektivt låsesystem, som fastholder rollatoren sammenfoldet under transport. Den er blandt de nemmeste rollatorer at betjene og dreje grundet dens unikke trekantede profil, som sikrer en stabil ramme.


Rollatoren fås i tre størrelser og to farver og er godkendt til en brugervægt på max 150 kg. Rollatoren er udstyret med lette og pålidelige bremses samt hjul med godt vejgreb. Aluminium Rollatoren har stokkeholder, et praktisk og aftageligt indkøbsnet samt hvilesæde i kraftig nylon.

1 AFTAGELIGT INDKØBSNET


Rollatoren har aftageligt opbevaringsnet som standard. Det er let at på- og afmontere, har flere indbyggede lommer og kan vaskes. Nettet har en max belastningsvægt på 5 kg.

2 FOLDBAR

Aluminium Rollatoren er let at folde sammen og kan stå på hjulene i sammenfoldet position. Den fylder endvidere ikke ret meget, når den er foldet sammen og bliver på plads takket være det effektive låsesystem.

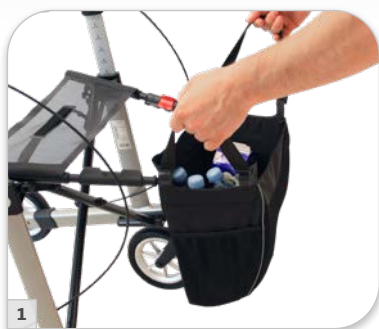

1

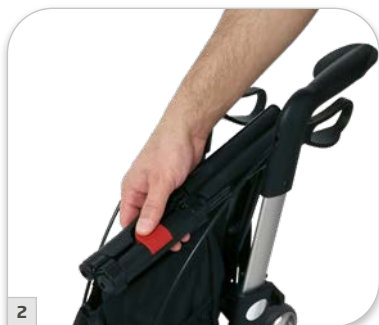

2



3

HMI-numre

STØRRELSE / SÆDEHØJDE	HMI-NUMMER
SMALL / 50 CM	112059
MEDIUM / 55 CM	112080
LARGE / 62 CM	112083

SPECIFIKATIONER	SERVER
MAX. BRUGERVÆGT	150 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 6,7 KG
AFSTAND MELLEML HÅNDTAG	47 CM
HÅNDTAGSHØJDE	S = 60 - 72 CM M = 66 - 86 CM L = 74 - 102 CM
SÆDEHØJDE	50 / 55 / 62 CM
TOTALBREDDER	61 CM
BØRN & UNGE	NEJ



WOLTURNUS

SALGSTEAM SJÆLLAND



Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 85



Christina Thornberg
Ergoterapeut
ctt@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 80



Mille Engly Honoré
Børneterapeut
mho@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 86



Marcel Schäd Jannerup
Hjælpemiddeltekniker
mja@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 84



Dorte Læsø
Salgschef
dla@wolturnus.dk
Tlf: 40 38 40 68

SALGSTEAM JYLLAND & FYN



Lars Abildtrup
Salgskonsulent
loa@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 36 30



Cathrine Strandby
Fysioterapeut
cst@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 56



Pernille Andersen
Fysioterapeut
pha@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 51



Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut
ank@wolturnus.dk
Tlf: 24 22 00 70



Niels-Christian Simonsen
Salgskonsulent
ncs@wolturnus.dk
Tlf: 31 34 82 44

WOLTURNUS A/S

+45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe
Samsøvej 30, 8382 Hinnerup
Borupvang 3, 2750 Ballerup