

PROSERIE



Mange personer med større funktionsnedsættelser har problemer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og bevægelser. Det ses f.eks. ved, at hovedet hænger forover, til siden eller er roteret. Resultatet bliver desværre ofte at personens synsfelt bliver gulvet, hvilket hverken er særlig opmuntrende eller fremmende for kommunikation.

På mange kørestole er der heldigvis tiltefunktion og ved at tilte den enkelte borger, kan man hjælpe til at variere trykket i siddestillingen og oftest få hovedet godt tilbage. Problemet kan være at synsfeltet ændres til loftet i stedet. På den måde kan kommunikation være svært og det kan også være svært at synke i den position.

Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter, som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes. Anatomic SITT har et meget omfattende hovedstøtteprogram og stor erfaring i disse problemstillinger.

Alt afhænging af kompleksiteten af problemet tilbydes forskellige hovedstøtter:

Hovedstøtteprogrammet, Pro Serien inkluderer hovedstøtter med 1, 2, 3 eller 4 støttepuder beroende på problemets kompleksitet.

Hovedstøtten med 1 støttepude er bl.a. Plushovedstøtterne. Disse er komfortnakkestøtter, som har en tyk blød polstring, er skålformet og som hindrer hovedet i at extendere. Ønsker man at kunne "styre" hovedet yderligere, kan man vælge den justerbare Plush nakkestøtte. De justerbare vinger er med til at "styre" hovedet ind mod midten.

En anden hovedstøtte med en støttepude er **Pro mini**. Denne serie er udformet så ørerne er frie og kan enkelt anvendes med et aktiv pandebånd.

Med **aktivt pandebånd** kan brugeren få hjælp til at holde hovedet i en vertikal position og samtidig beholde mulighed for rotation. Anvendelse af aktivt pandebånd giver brugeren mulighed for at holde hovedet og letter derved spisesituationer og andre aktiviteter, som kræver hovedkontrol. På denne måde trænes og styrkes halsmuskulaturen. Hovedstøtten kan i mange tilfælde også bidrage til at stabilisere hovedet ved ufrivillige bevægelser.

Hovedstøtten med 2 støttepuder kaldes Enkel nedre støttepude.

Hovedstøtten med 3 støttepuder tilbydes med lange nedre støttepuder, som er særligt gode for brugere, der "taber" hovedet. Her kan de nemlig bruge de nedre støttepuder, som guider til at få hovedet op på plads igen.

Hovedstøtte-serien med 4 støttepuder kaldes for T-bar. Disse hovedstøtter giver en total støtte til hele hovedet. Dette kan være til stor hjælp, når det er svært at stabilisere hovedet, eksempelvis ved transport.

Pro seriens seneste skud på stammen er hovedstøtten **Heads Up**. Denne hovedstøtte har "arme", som sidder foran brugerens skuldre. Disse arme forhindrer brugerens hoved i at komme bag hovedstøtten. Armene kan klappes op.



PROSERIE

Hovedstøtteserie


Billedet viser

Pro Voksen med voksen øvre støttepude, lange nedre støttepuder og et aktivt pandebånd.




Pro

Probasen består af en vandret stang ekskl. fæste og adapterstang (lodret stang)

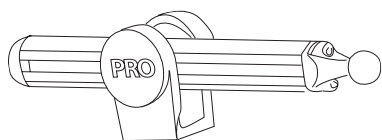

Linx

Linxbasen består af et komplet fæstesystem inkl. adapterstang og fæste. Findes til alle hovedstøttekombinationer.

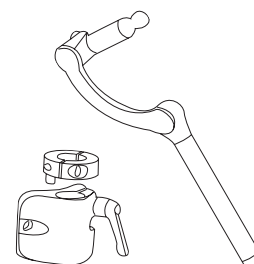

ProSerie

ProSerie er en modulopbygget hovedstøtte. Man kan få bare en enkel støttepude og op til fire støttepuder. Puderne fås i forskellige størrelser, udformninger og til udførelse af forskellige funktioner, netop for at man kan få så meget eller så lidt støtte, som der er brug for og som løbende kan tilpasses, og genbruges.


Med ProSerie hovedstøtterne er mulighederne uendelige og det er i bund og grund kun fantasien, der sætter grænser.

Her vises vores mest benyttede kombinationer af hovedstøtter

Voksen hovedstøtte - Lange nedre støttepuder, Voksen øvre støttepude **Vælg "Pro" eller "Linx"**
 Varenr. 76001 Pro Voksen Varenr. 78001 LINX Voksen

Nedenfor vises et udvalg af adapterstænger til forskellige kørestole.


Tilbydes også med korte nedre støttepuder

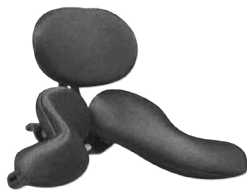

771181
Aktiv pandebøjle,
Voksen



77101
Aktivt pandebånd,
Voksen

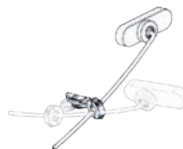

77145
Sidestøtte m. std.
støttepude, kpl.



Junior hovedstøtte - med junior øvre støttepude
 Varenr. 76005 Pro Junior Varenr. 78005 LINX Junior


Vælg "Pro" eller "Linx"



771182
Aktiv pandebøjle,
Barn



77102
Aktivt pandebånd,
Junior

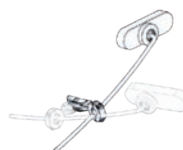

77145
Sidestøtte m. std.
støttepude, kpl.

Tilbydes bl a till:
 Boden Rehab, Pandastolen
 Netti, Bilanx, Cirrus, HD-stolen,
 Assist, Rea Comfort osv.


Enkel nedre hovedstøtte - Enkel nedre støttepude, junior øvre støttepude **Vælg "Pro" eller "Linx"**
 Varenr. 76018 Pro Enkel nedre støttepude Varenr. 78018 LINX Enkel nedre støttepude




771182
Aktiv pandebøjle,
Barn



77102
Aktivt pandebånd,
Junior

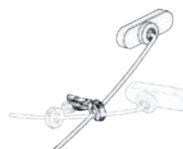

77145
Sidestøtte m. std.
støttepude, kpl.

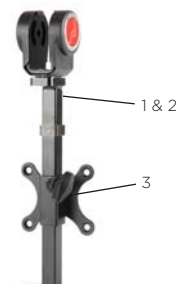

Plush hovedstøtte

Varenr. 77001 Pro Plush 10"
 Varenr. 77002 Pro Plush 14"
 Varenr. 77004 Pro Plush Justerbar 6-14" Lav
 Varenr. 770041 Pro Plush Justerbar 8-18" STD

Varenr. 77006 LINX Plush 10"
 Varenr. 77007 LINX Plush 14"
 Varenr. 77009 LINX Plush Justerbar 6-14" Lav
 Varenr. 770091 LINX Plush Justerbar 8-18" STD

Vælg "Pro" eller "Linx"



Pro Plush 14"



Plush Justerbar

- 1) Varenr. 77028
Lodret adapterstang 15x15
- 2) Varenr. 77036
Lodret adapterstang
15x15, 35 cm
- 3) Varenr. 70121
Aftageligt fæste 15x15

Pro Mini hovedstøtte

Varenr. 77011 Pro Mini, small (22 x 10 cm)
 Varenr. 77012 Pro Mini, medium (25,5 x 12 cm)
 Varenr. 77013 Pro Mini, large (32,5 x 16 cm)

Vælg "Pro"




Pro Mini, Medium



771181 Aktiv pandebøjle, Voksen
 771182 Aktiv pandebøjle, Barn



77101 Aktivt pandebånd, Voksen
 77102 Aktivt pandebånd, Junior
 77105 Fæstebeslag till pandebånd/
 pandebøjle, Plush/Mini

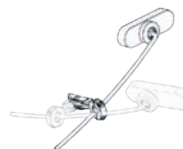

77145
Sidestøtte m. std. støttepude, kpl.

Fmk®
 Fæste mellem kørehåndtag



Anvendes ved hængekøjerlyg eller ved anden afprøvning.


Varenr. 790301 - FMK str. 1
 Varenr. 790302 - FMK str. 2
 Varenr. 790303 - FMK str. 3

Børnehovedstøtte


ProSerie Barn leveres komplet inkl. adapterstang/fæste (77041).



Varenr. 77015 - Pro Serie Barn

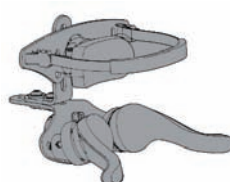


Varenr. 770151
Aktivt pandebånd,
Barn

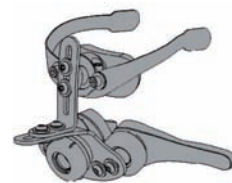

Varenr. 770152
Sidestøtte, Barn en side
Varenr. 770153
Sidestøtte, Barn, begge
sider

Gelpuder

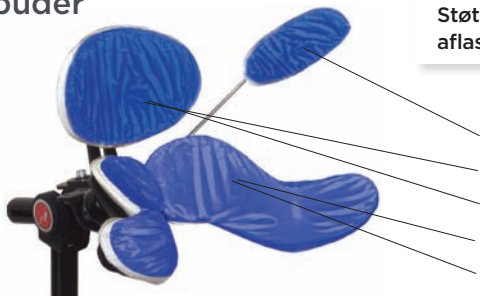

Støtdepudens materiale kan erstattes med gel. Gel indlægget har en større tryk-aflastende effekt for brugere, som trykker hovedet kraftigt mod hovedstøtten.


Valg ved bestilling:

- Gel - std. sidestøttespude
- Gel - Øvre støtdepude, voksen
- Gel - Øvre støtdepude, junior
- Gel - Voksen, lang nedre støtdepuder
- Gel - Junior, nedre støtdepuder

Adapterstang

Ved bestilling af hovedstøtten indgår adapterstang og fæste ikke.

Nedenfor vises et udvalg af adapterstænger til forskellige kørestole

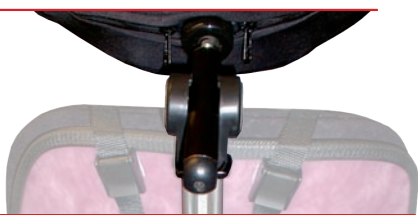


Tilbydes bl.a. til:

Boden Rehab, Pandastolen,
Netti, Bilanx, Cirrus, HD-stolen,
Assist og Rea Comfort.

Adapterstang & fæste

Et universalfæste kan monteres på alle typer ryglæn og anvendes bl.a. på Anatomic formstøbt sæde.

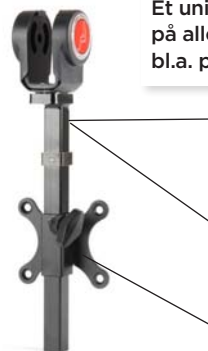

Varenr. 77028
Lodret adapterstang
15x15

Varenr. 77036
Lodret adapterstang
15x15, 35 cm

Varenr. 70121
Aftageligt fæste 15x15

Fæste mellem kørehåndtag

Fmk[®]



Varenr. 790301 - FMK str. 1
Varenr. 790302 - FMK str. 2
Varenr. 790303 - FMK str. 3

FMK bruges hvis man eksempelvis har en kørestol med en rygpolstring.

FMK (fæste mellem kørehåndtag) er et universal monteringskit til at gøre montering af positioneringssele og hovedstøtte lettere. Monteres omkring kørestolens skubbehåndtag/kørehåndtag eller rygrør. Bruges også til at få den rigtige trækretning til positioneringstøtten.

FMK tilbydes i 3 forskellige størrelser, som dækker en bredde på 40 cm.


- Størrelse 1 dækker et spænd på 22 til 42 cm
 - Størrelse 2 dækker en spændvidde på 32-52 cm
 - Størrelse 3 dækker en spændvidde på 42-62 cm
- Passer til rørtykkelserne: 20, 22 og 25 mm

Forhøjningsstængerne anvendes sammen med FMK, når der skal monteres hovedstøtte og/eller positioneringssele, som sternumstøtte og H-sele. Forhøjningsstængerne fås, så de passer til 25 mm eller 40 mm selebånd.

Flex-led

Monteres mellem den vandrette stang og støtdepude/ monteringsplade

Varenr. 77045 Flexled, ProSerie

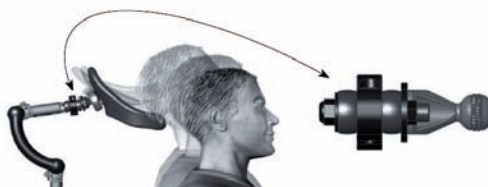

Aktivt pandebånd, kasket & pandebøjle




Med aktivt pandebånd får brugeren mulighed for at dreje hovedet. Dermed trænes og styrkes hals- og nakkemusklaturen. Bevægeligheden opnås gennem to hjul som remmen til båndet løber omkring.


Passer til junior- & voksenhovedstøtten.
Til Mini- & Plushhovedstøtten bruges endvidere varenr. 77105.




771181 Aktiv pandebøjle, Voksen
771182 Aktiv pandebøjle, Barn

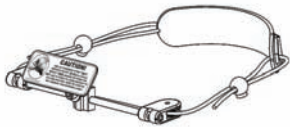


77101 Aktivt pandebånd, Voksen
77102 Aktivt pandebånd, Junior

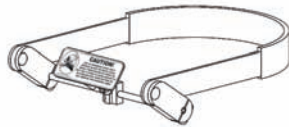

77118 Pandebøjle

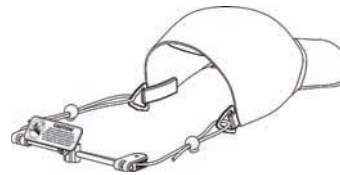

77113 Aktiv kasket Voksen kpl.
77114 Aktiv kasket junior kpl.

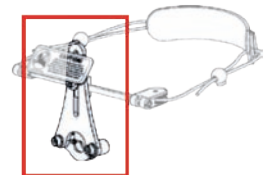

77105 Fæstebeslag til pandebånd/
pandebøjle, Plush og Mini

Sidestøtte

Sidestøtten er en støtte, når hovedet falder ud til siden. Monteringsarmene er monteret med kugleled. Dette giver store justeringsmuligheder for at opnå en optimal position. Passer til junior- & voksen hovedstøtten.

Til Mini- & Plushhovedstøtten skal vare nr. 77136 eller 77137 endvidere bruges.

Disse sidestøtter er komplette inkl. støttepude, arm, kugle og vipbartfæste.



Varenr. 77145
Sidestøtte med std. støttepude, kpl.



Varenr. 771451
Sidestøtte med lang støttepude, kpl.



Varenr. 77146
Sidestøtte, Spot støttepude, kpl.



Varenr. 77147
Sidestøtte, Voksen støttepude, kpl.



Varenr. 77148
Sidestøtte, Halvmåne støttepude str. 1, kpl.



Varenr. 77149
Sidestøtte, Halvmåne støttepude str. 2, kpl.



Varenr. 77150
Sidestøtte, Halvmåne støttepude str. 3, kpl.



Varenr. 77136
Monteringsbeslag til sidestøtte, Mini



Varenr. 77137
Monteringsbeslag til sidestøtte, Plush

Heads Up

Heads Up er udstyret med svingbare arme til nemt at imødekomme brugerens forflytninger og varierende behov. Heads Up giver støtte forfra, bagfra og lateralt. De svingbare hovedstøtte-arme, gør at brugeren ikke kan komme i klemme.

Heads Up inkl. vandret stang


770161 Pro Heads up str. S, lang
770162 Pro Heads up str. M, lang
770163 Pro Heads up str. L, lang

770166 Pro Heads up str. S, kort
770167 Pro Heads up str. M, kort
770168 Pro Heads up str. L, kort



Heads Up er en innovativ hovedstøtte designet til at maksimere brugerens interaktion med sine omgivelser ved at give optimal støtte til hoved og nakke.

Heads Up er en del af ProSerie hovedstøtteprogrammet.




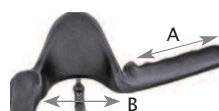


A	A	A
Small kort 14	Medium kort 17	Large kort 17
Small lang 18	Medium lang 22	Large lang 22
B	B	B
Small 9	Medium 10	Large 13

TEKNISKE DATA - Samtlige mål er angivet i cm.





VOKSEN, LANGE NEDRE STØTTEPUDE

- 77201 Støttepude, Voksen, lang, venstre, kpl.
- 77202 Støttepude, Voksen, lang, højre, kpl.
- 77203 Betræk, Voksen, lang, venstre - Lycra (std.)
- 77204 Betræk, Voksen, lang, højre - Lycra (std.)
- 77205 Udbytningskum, Voksen, lang, V/H

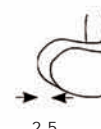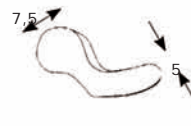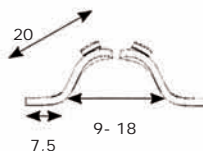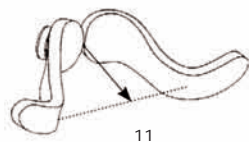




JUNIOR NEDRE STØTTEPUDE

- 77213 Støttepude, junior, venstre, kpl.
- 77214 Støttepude, junior, højre, kpl.
- 772131 Støttepude, junior kort, venstre, kpl.
- 772141 Støttepude, junior kort, højre, kpl.
- 77215 Betræk, junior, venstre - Lycra (std.)
- 77216 Betræk, junior, højre - Lycra (std.)
- 77217 Udbytningskum, junior, V/H

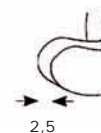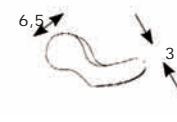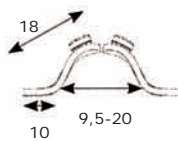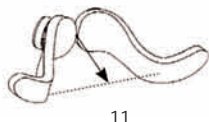




VOKSEN, KORTE NEDRE STØTTEPUDE

- 77207 Støttepude, Voksen, kort, venstre, kpl.
- 77208 Støttepude, Voksen, kort, højre, kpl.
- 77209 Betræk, Voksen, kort, venstre - Lycra (std.)
- 77210 Betræk, Voksen, kort, højre - Lycra (std.)
- 77211 Udbytningskum, Voksen, kort, V/H

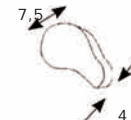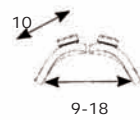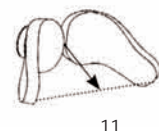




ENKEL NEDRE STØTTEPUDE

- 77249 Enkel nedre støttepude
- 772491 Enkel nedre støttepude small
- 77251 Betræk, enkel nedre - Lycra (std.)
- 772513 Udbytningskum, enkel nedre.

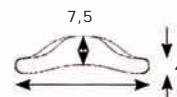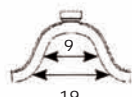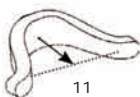





ØVRE STØTTEPUDE, VOKSEN

- 77219 Øvre støttepude, Voksen
- 77221 Betræk, øvre støttepude, Voksen - Lycra (std.)
- 77223 Udbytningskum, øvre støttepude, Voksen

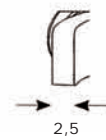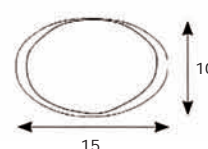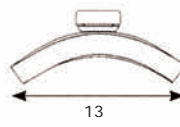







ØVRE STØTTEPUDE, JUNIOR

- 77220 Øvre støttepude, junior
- 77222 Betræk, øvre støttepude, junior - Lycra (std.)
- 77224 Udbytningskum, øvre støttepude, junior

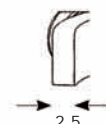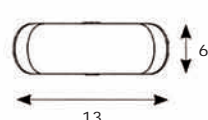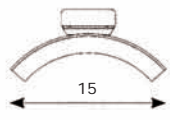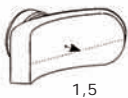

PLUSH:

- 77310 Støttepude, PLUSH 8"
- 77262 Støttepude, PLUSH 10"
- 77263 Støttepude, PLUSH 14"
- 77311 Støttepude, PLUSH 19"
- 77318 Støttepude, PLUSH Justerbar 6"-14"
- 77319 Støttepude, PLUSH Justerbar 8"-18"
- 77312 Betræk, PLUSH 8" - Lycra (std)
- 77264 Betræk, PLUSH 10" - Lycra (std)
- 77265 Betræk, PLUSH 14" - Lycra (std)
- 77313 Betræk, PLUSH 19" - Lycra (std)
- 773181 Betræk, PLUSH Justerbar 6"-14" - Lycra (std)
- 773191 Betræk, PLUSH Justerbar 8"-18" - Lycra (std)
- 77321 Udbytningskum, PLUSH 8"
- 77322 Udbytningskum, PLUSH 10"
- 77323 Udbytningskum, PLUSH 14"
- 77324 Udbytningskum, PLUSH 19"
- 773182 Udbytningskum, PLUSH 6-14"
- 773192 Udbytningskum, PLUSH 8-18"

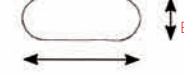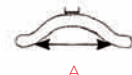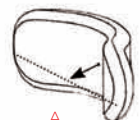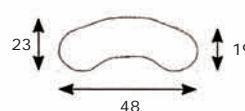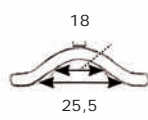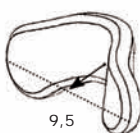



A
str. 8" - 2,5
str. 10" - 3
str. 14" - 6
str. 19" - 5
str. 6-14" - 11
str. 8-18" - 15

A
str. 8" - 14
str. 10" - 15,5
str. 14" - 19
str. 19" - 26
str. 6-14" - 8-27
str. 8-18" - 10-36

A / B
str. 8" - 19 / 12,5
str. 10" - 23,5 / 12,5
str. 14" - 33,5 / 19
str. 19" - 52 / 16
str. 6-14" - 40 / 8
str. 8-18" - 50 / 15

MINI:

- 77252 Støttepude, small
- 77253 Støttepude, medium
- 77254 Støttepude, large
- 77255 Betræk mini, small
- 77256 Betræk mini, medium
- 77257 Betræk mini, large
- 77258 Udbytningskum, small
- 77259 Udbytningskum, medium
- 77260 Udbytningskum, large

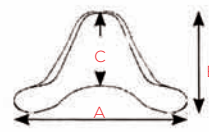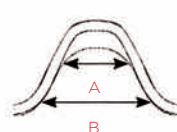

A
str. S - 6
str. M - 8,5
str. L - 11

A / B
str. S - 8 / 13
str. M - 8,5 / 15
str. L - 10 / 17

A / B / C
str. S - 22 / 14 / 10
str. M - 25,5 / 16 / 12
str. L - 33 / 19 / 16

Det er muligt at special-bestille betræk i andre materialer end Lycra.

Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4
8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74
Fax 86 17 01 75
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com
www.facebook.com/AnatomicSITT.dk
youtube.com/anatomicsitt