

Activa

- ideel rehabiliteringskørestol



Alum Bergen™

- **Alle greb kan placeres efter behov**
Dermed er stolen velegnet til hemiplegikere
- **Benstøtte der kan vippes op under stolen af bruger**
Ingen benstøtte der sidder i vejen og den bliver aldrig forlagt
- **Stropryg, hvis vinkel kan justeres trinløst af bruger**
Sikrer optimal tilpasning til brugers ryg
- **Mulighed for ekstra tilbehør**

Activa

- ideel rehabiliteringskørestol



Activa er den ideelle kørestol, når brugeren har behov for selv at kunne gå kørestolen frem. Den lave sæde-højde kombineret med den unikke benstøtte, gør kørslen nem for brugeren. Benstøtten er midterophængt og kan af brugeren trækkes op under sædet så den ikke generer ved gå-aktivitet. Benstøtten er endvidere fastmonteret og kan derfor aldrig blive væk.

Activa er konstrueret med vinkeljusterbar stroptryk. Brugeren kan selv justere ryggen fra aktiv til hvileposition. Alle betjeningshåndtag, d.v.s. for rygvinkel, bremse og benstøtte, kan være placeret enten i højre eller venstre side. Dette sikrer at brugeren altid får en optimal udnyttelse af kørestolens funktioner.

1



Benstøttehåndtag

Brugeren kan via håndtaget vippe benstøtten frem. Benstøttens vinkel kan trinløst justeres efter behov eller ønske.

2



Ryggen

har stropper som let kan indstilles til brugerens ryg. Højdejusteres nemt efter brugers behov.

3



Greb

betjenes af bruger til trinløst at ændre ryggens vinkel.

4



Fodplader

kan uafhængigt af hinanden vippes 90° op. Dermed skabes der plads til at bruger med den ene fod, kan gå stolen frem. Hælstop og polstrede lægstøtter kan fås som tilbehør.

5



Drivhjul

kan i stelsiden balanceres fremad eller bagud.

Activa - ideel rehabiliteringskørestol




Stel:	Stålrør, pulverlakeret, øvrige metaldele er korrosionsbeskyttet.
Sædeenhed:	Fastramme.
Plansæde:	Træ med gummigjorder. Betræk i skai. Justerbar i dybde og vinkel.
Sædepude:	Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg:	Enhånds brugerbetjent vinkeljustering, opbygget af gjorder.
Rygpolstring:	Koldskum, brandhæmmende.
Kørehåndtag:	2 stk., højdejusterbare.
Armlæn:	Kunststof, højde/vinkeljustering. Opklappelige.
Benstøtte:	Enhånds brugerbetjent vinkeljustering. Opklappelig, højdejusterbar.
Fodplader:	Stål med rillegummi, justerbare i vinkel og højde. Individuelt opklappelige.
Drivhjul:	22" højtryksdæk m/plastdrivringe.
Svinghjul:	7" punkterfrie.
Bremser:	Enhånds brugerbetjent, monteret i højre eller venstre side.
Antitip:	Justerbare i højde og opklappelige.
Stof:	Microfiber, flammehæmmende.
Autobespænding:	4. punkt
Værktøjspose	
Brugsvejledning.	

Målskema

- Målt i mm hvis ikke andet er angivet
- Tolerance på ±10 mm og ±1°

		Small	Medium	Large	X-Large
A	Sædebredde	400	450	500	550*
B	Sædehøjde excl. pude	22" hjul ~ 390			
C	Sædedybde	3 indst. på hhv. 415, 440 og 465 m. værktøj			
D	Ryghøjde ekskl. pude	450 ▶ 580 /trinløs m. værktøj			
E	Armlæns højde fra plansæde	245 ▶ 350 /indst. med 7,5 mm interval			
F	Bredde mellem armlæn	400	450	500	550
G	Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr.	300 ▶ 435 m. 7.5 mm interval			
H	Kørehåndtagshøjde	22" hjul ~ 870 ▶ 1180 /trinløs			
I	Total højde /klar til brug	22" hjul ~ 850			
J	Total bredde /klar til brug	600	650	700	750
K	Total længde ekskl./inkl. benstøtter	680/910			
L	Ryg vinkel	-4° ▶ +20° /trinløs			
M	Sædevinkel	3 indst. på hhv. -2°, 0° og +3° m. værktøj			
N	Benstøttevinkel	85° ▶ 143° /trinløs			
P	Fodpladevinkel	+81° ▶ +99°			
	Transportvægt/u. løse dele	26 kg	27 kg	28 kg	29 kg

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

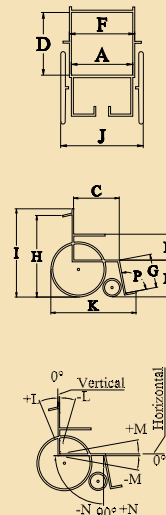

Producent & forhandler:

Comfort-Gruppen A/S
 Broholmvej 9
 DK-5463 Harndrup
 Tlf. +45 70 23 50 10
 Fax +45 70 23 50 12
 E-mail: info@comfort-gruppen.dk
 www.comfort-gruppen.dk

HMI NUMRE

Small 40cm	19597
Medium 45cm	19598
Large 50cm	19599
X-Large 55cm	41067



Illum Bergen™

We are not a wheelchair company - we are a mobility provider