

## ZiboKids

# Trykaflastende madras til de mindste

ZiboKids Foam er trykaflastende børnemadras til de helt små børn ned til 500 gr. og op til 10 kg. Sikrer god liggekomfort, barnet synker ned og føler sig omsvøbt samtidig giver madrassen optimal trykfordeling. Leveres i individuelle mål alt afhængig af størrelsen på vugge, kuvøse eller seng.



**Udfordring:** Barnets hoved er stort og tungt i forhold til kroppen. ZiboKids Foam Madrassen er designet netop til det lille barn. Dobbelt kerne med særlig blød og elastisk top sikrer optimal lejring og trykfordeling af hele kroppen.

- Madrassen hjælper til at hovedet kan synke ned i madrassen, og der skabes en neutralstilling af barnets hoved.
- Madrassen former sig efter barnet og trykaflaster ved at trykfordele barnets vægtfylde over et større areal.
- Madrassen sikrer at barnet får en god lejring og komfort, både i ryg og side leje.
- Høj hygiejne: Vandtæt og åndbart betræk med overdækket lynlås. Let at tage af og vaske v. 95°C

**TILBUD:** Leveres i individuelle mål, så de passer præcis til jeres vugger, kuvøser og senge. Giv os jeres madrasmål, så er vi klar med et godt tilbud.

# Trykaflastende madras til de mindste

Madrassen har en skumbase i højelastisk skum, som sikrer den nødvendige stabilitet ved mobilisering og lejring af barnet. Toppen er et 2 cm tykt viskoelastisk skumlag, som barnet kan synke ned i og føle sig omsvøbt, samtidig med det giver en super god trykfordeling.



**God ligge komfort**

Viskoelastisk toplag, der sikre aflastning af trykudsatte områder og nedsenkning hvor der er behov, hvilket giver optimal liggekomfort for barnet

**Blødt på toppen**

2 cm viskoelastisk skum på toppen, som barnet kan synke ned i og føle sig omsvøbt. Giver god trykfordeling.

**Stabilt skumlag i bunden**

ZiboFoam +45kg/m<sup>3</sup> giver den nødvendige stabilitet ved mobilisering og lejring

**Åndbart betræk yderst**

Vandtæt og åndbart inkontinensbetræk. Lynlås på 3 sider, let at tage ud ved vask.

**Rengøring**

Betræk kan overflade desinficeres. Vask: 95°C

**Dækket lynlås**


Overlap sikrer, at væske ikke trænger ind i madrassen.

## Trykmåling med neonatal afdeling

ZiboCare har i samarbejde med Ålborg Universitets Hospitals neonatal afdeling lavet trykmålinger på både deres transportkuvøse og vuggemadrasser og sammenlignet dem med vores nye ZiboKids foam madras.


Billeder er taget fra et barn på 3,9kg og 52 cm

Eksisterende madras

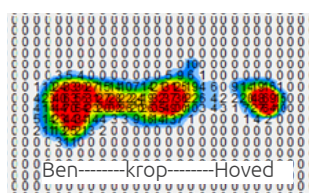

Fakta: Barnet ligger ovenpå madrassen og synker ikke nede, hvilket giver et stort tryk på baghoved, ryg, bagdel og hæle (røde felter = højt tryk). Barnet er i meget høj risiko for trykskader

ZiboKids foam madras

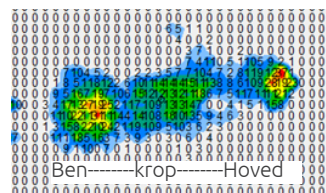

Fakta: Barnet synker let ned i madrassen. Trykket er fjernet fra de mest udsatte trykpunkter (hoved, ryg, bagdel og hæle). Trykket/det røde felt er svært reduceret og fordelt over et større areal, hvilket giver større aflastning af de udsatte trykpunkter.