

ALPHA madras

Tryksårsforebyggende skummadras op til sårstadie 2



Primær anvendelse

Kommuner
Institutioner
Hospitaller

Alpha skummadras fra Winncare Nordic anvendes primært til brugere med risiko for tryksår op til stadie 2.

Alpha skummadras vælges fordi den er:

- Udført med en blød profileret trykaflastende viskoelastisk skum, der sikrer optimal liggekomfort for brugeren.
- God til at transpirere fugtighed fra kroppen væk med udgangspunkt i den viskoelastiske profilerede skum kombineret med Dahlia betræk.
- Beregnet til senge med indstillelig sengebund
- Velegnet til brugere med risiko for udvikling af tryksår

Hertil kommer at Alpha skummadras er forsynet med:

- Åndbart inkontinensbetræk – Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger
- Betræk som er allergivenligt og brandhæmmende
- Mulighed for forlængerstykker på henholdsvis 10, 15 eller 20 cm

Alpha skummadras er opbygget af:

- 9 cm HR- eller RP-skum i bunden
- 5 cm viskoelastisk profileret skum på toppen.


Begge skumtyper i høj kvalitet.

Brugeren får ved anvendelse af Alpha skummadrassen en god følelse af, at kroppen bliver støttet, samtidig med at madrassen yder en forebyggende trykaflastende effekt. Takket være hybridskummen kan madrassen nemt rulles sammen.


Åndbart betræk:

Alpha skummadras er forsynet med åndbart inkontinens Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger. Dahlia betrækket er:

- Svejst og ikke syet sammen
- Tæt i forhold til indtrængning af urin, blod eller lignende væsker
- Forsynet med 2 håndtag på hver side til håndtering af madrassen
- Lynlås på 3 sider
- Nemt at af og påmontere på grund af en tricot, som madrassen er forsynet med

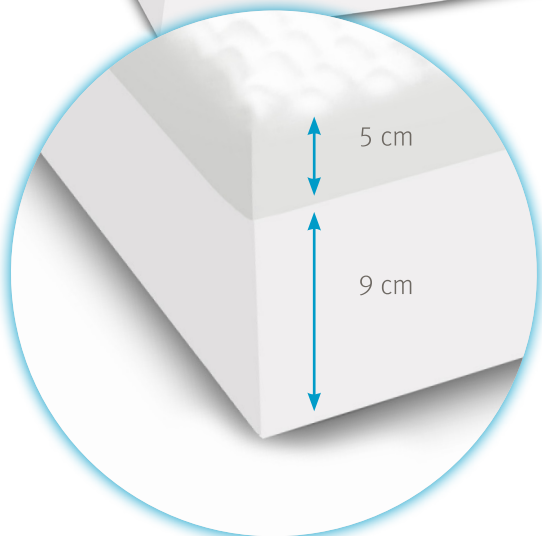

ergolet[®]

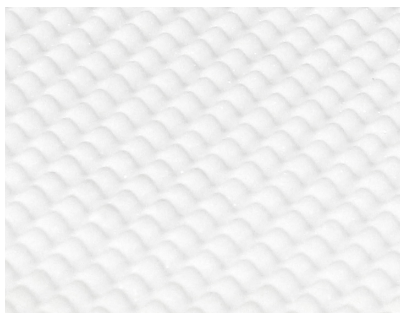

Profileringen af det viskoelastiskskum er vaflet som en æggebakke.



Inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f. eks. urin og blod ikke trænger igennem. Der er 4 håndtag - 2 på hver side. Betrækket er svejst ved lynlåsene. Det er vaskbart ved 90 grader og kan autoklaveres.



Rengøringsmetode:

Som udgangspunkt kræver madrassen ikke rengøring, idet den er monteret med et åndbart betræk med væskebarriere. Skulle der være behov for, at madrassen skal rengøres kan madrassen rengøres med alm. vand og sæbe.

Madrassen tåler desinficering med Ethanol 70 %. Man skal dog være opmærksom på, at den skal tørres efter med vand.

Madrassen må ikke gennemvædes, idet det øger risikoen for at beskadige skummet.

Når madrassen er fugtig, må den ikke udsættes for tryk (fra f.eks. betræk) eller andre belastninger under rens/vask/tørring, idet dette kan medvirke til at beskadige skummet og deformere madrassen.

Øvrige rengøringsmidler med alkohol og blegemidler kan være skadelig for madras og betræk.

Version	Mål	HMI-nr	Varenummer
Alpha skummadras (HR-VE)	83 cm x 200 cm x 14 cm	79885	023-00004
Alpha skummadras (HR-VE)	88 cm x 200 cm x 14 cm	79886	023-00005
Alpha skummadras (RP-VE)	83 cm x 200 cm x 14 cm	119723	023-00221
Alpha skummadras (RP-VE)	88 cm x 200 cm x 14 cm	119729	023-00222
Tilbehør	Mål	Varenummer	
Madrasforlænger	83 cm x 10 cm x 14 cm	023-00012	
Madrasforlænger	88 cm x 10 cm x 14 cm	023-00014	
Madrasforlænger	83 cm x 15 cm x 14 cm	023-00006	
Madrasforlænger	88 cm x 15 cm x 14 cm	023-00007	
Madrasforlænger	83 cm x 20 cm x 14 cm	023-00013	
Madrasforlænger	88 cm x 20 cm x 14 cm	023-00015	
Dahlia betræk til madras	83 cm x 200 cm x 14 cm	023-00008	
Dahlia betræk til madras	88 cm x 200 cm x 14 cm	023-00009	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 10 cm	023-00016	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 15 cm	023-00010	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 20 cm	023-00017	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 10 cm	023-00030	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 15 cm	023-00011	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 20 cm	023-00029	


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Min. brugervægt	30 kg
Max brugervægt	150 kg
Bredde Alpha 83 cm	830 mm
Bredde Alpha 85 cm	850 mm
Bredde Alpha 88 cm	880 mm
Længde	2000 mm
Højde	140 mm
Vægt Alpha 83 cm	10,3 kg
Vægt Alpha 85 cm	10,5 kg
Vægt Alpha 88 cm	10,8 kg
Rumvægt:	
RP-skum	38 kg/m ³ , indtrykshårdhed 150 Newton
HR-skum	36 kg/m ³ , indtrykshårdhed 150 Newton
VE-skum	48 kg/m ³ , indtrykshårdhed 100 Newton
Forventet levetid	5 år

Udformningen fra enden



Udformningen fra siden

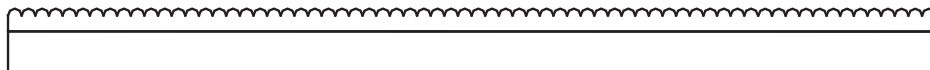

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende, og kan ændre sig i forskellige situationer. Winnicare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Kontakt Winnicare Nordic, hvis du har spørgsmål til dette materiale.



date 07.09.2020 - ver. 2

Winnicare Nordic ApS
Tårnbergvej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnicare.dk

www.winnicare.dk

WINNCARE
N o r d i c