

 **TOPRO**

Premium Gåbord

Taurus, Troja Walker², Troja Neuro



NO

made in Norway



TAURUS

SIKKERT OG STØDIG GÅBORD

TOPRO Taurus gir optimal støtte til brukere med redusert bevegelighet. Stødig og trygt gåbord til bruk i hjemmemiljø eller på institusjon. Det finnes fire ulike modeller av TOPRO Taurus, Basic og Premium versjoner med hydraulisk høydejustering og Basic og Premium versjoner med elektrisk høydejustering. Premium-modellene har kjøre- og parkeringsbrems tilgjengelig på begge håndtakene og en retningslås på bakhjulene.

- **Justeres enkelt** etter brukerens ergonomiske behov – særlig med tanke på høyde, men også kroppsstørrelse og plassering av armer.
- Kan brukes som støtte til å komme seg opp fra sengen eller en stol.
- På Premiummodellene **kan håndtakene justeres** til ønsket posisjon.
- **Sklisikre hjul** for enkel og trygg manøvrering. Alle fire hjul er utstyrt med fotbrems.
- På Premiummodellene kan **svingen på bakhjulene låses**. Farten tilpasses enkelt med **kjørebremsen på håndtaket**.

- TOPRO Taurus er et allsidig ganghjelpemiddel som enkelt kan tilpasses brukeren ved hjelp av hydraulisk eller elektrisk høydejustering. **Justerbare underarmsstøtter** og et stort utvalg av tilbehør forbedrer funksjonaliteten ytterligere og gjør den til det ideelle ganghjelpemiddelet.
- **Høyt nok også for brukere** opptil 210 cm og tåler en brukervekt på opptil 150 kg.

Nye funksjoner, forskjeller mellom de ulike modellene, produktinformasjon og mål finner du på de neste sidene og side 13.



Lær mer på våre nettsider



H Basic H Premium E Basic E Premium



made in Norway



Detaljer of funksjoner



Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel på begge håndtak på Premium-modellene.



Enkel justering av håndtak på Premium-modellene.



Trinnløs justering av underarmsstøttene.



Premiummodellene har innebygd retningssperre for låsing av sving (aktiveres enkelt med foten). Fotbrems på alle hjul og modeller.



Bryter for elektrisk høydejustering er lett tilgjengelig fra håndtaket på Taurus E.

Trinnløs høydejustering. Du finner raskt riktig posisjon ved hjelp av høydeskalaen.

Forskjeller mellom modellene

	TOPRO Taurus H Basic	TOPRO Taurus H Premium	TOPRO Taurus E Basic	TOPRO Taurus E Premium
Kjøre- og parkeringsbrems på begge håndtak	✗	✓	✗	✓
Bremsene kan brukes separat fra hvert håndtak	✗	✓	✗	✓
Justerbare håndtak (vinkel og lengde)	✗	✓	✗	✓
Parkeringsbrems på alle hjul (fotbrems)	✓	✓	✓	✓
Justerbare underarmsstøtter	✓	✓	✓	✓
Innebygd retningssperre på bakhjulene (aktiveres og deaktiveres med fotpedal)	✗	✓	✗	✓
Posisjonssymboler på høydejusteringsbryteren på håndtaket				
- NED	✗	✗	✓	✓
○ INAKTIV				
= OPP				
Elektrisk høydejustering	✗	✗	✓	✓
Hydraulisk høydejustering	✓	✓	✗	✗
Kan brukes i dusjen	✓	✓	✗	✗
Kan brukes som støtte ved oppreising grunnet enkel betjening fra håndtaket (Viktig: Er ikke en pasientløfter)	✗	✗	✗	✓



H Basic



H Premium



E Basic



E Premium

Tilbehør til Taurus




Sidestøtte for arm (par)

Art. nr. 814647



Liten kurv
ekstra plass for oppbevaring av små ting (opptil 2 kg)

Art. nr. 814821

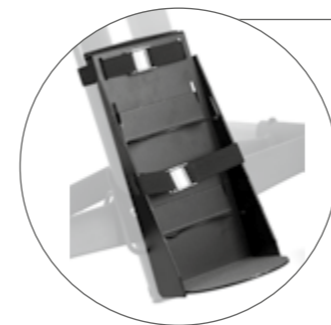

Holder for oksygenflaske

Art. nr. 814820



Veggfeste for batterilader

Art. nr. 814085



Enhåndsbremse
kan monteres på valgfri side for bremsing med kun én hånd, for eksempel etter et slag.

Art. nr. 814026



Infusjonsstativ

Art. nr. 814793



Ståplate
for hjelp til å transportere brukeren hvis han/hun blir sliten

Art. nr. 814645



Brett
for praktisk og trygg transport av mat og drikke

Art. nr. 814810



Oppheng for kroppsvæskebeholdere

Art. nr. 814034



Høydejusteringspanel
for TOPRO Taurus E

Art. nr. 814646

Tilbehør til Taurus



Ved hjelp av TOPRO Taurus kan brukere enkelt komme seg opp av sengen, en stol osv. – med eller uten assistanse.



TROJA WALKER²

MODERNE GÅBORD MED RULLATORKOMFORT



TOPRO Troja Walker² er et praktisk, lett og stabil gåbord med komforten til en rollator. Underarmsstøttene er designet for å gi god støtte for overkroppen mens du går.

- Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel for enkel bruk.
- Innovativ teknologi for **sideveis sammenfolding** gjør det enkelt å slå sammen gåbordet med kun én hånd, ved å dra i snoren på setet. Dermed er det **enkelt å transportere** samtidig som det står **stødig på hjulene** og tar liten plass ved oppbevaring.
- Håndtakene kan skyves ned i siderørene for praktisk oppbevaring.
- Unik **minnefunksjon** der innstillingen på underarmsstøttene blir satt for senere bruk.
- **Kulelagre i gaffler og hjul** gjør gåbordet komfortabelt og enkelt å manøvrere.
- **Kantavviser og vippefunksjon** for trygg og enkel manøvrering over terskler.
- **Praktisk kurv** for enkel tilgang til eiendeler. Tåler opptil 5 kg.
- Nummerert skala for enkel høydejustering av håndtakene. Nå med forbedret låsehendel.
- Tilgjengelig i tre ulike størrelser.

Mål, farger og annen produktinformasjon finner du på side 14.

Modell M, S og fås i:



Lær mer her
TOPRO Troja Walker²



made in Norway



TROJA NEURO

RULLEKONTROLL-SPECIALISTEN



TOPRO Troja Neuro har et omvendt bremsesystem spesielt utviklet for å gi brukeren ekstra trygghet med rullekontroll. Bremsene er automatisk aktivert inntil bremsehåndtakene klemmes inn.

- Er basert på den velrennomerte rullatoren TOPRO Troja Classic og utstyrt med et omvendt bremsesystem.
- Bremsesystemet gjør at rullatoren stopper automatisk uten at du må bruke bremsehåndtakene.
- Kan ikke begynne å rulle ved et uhell, men må aktivt «startes» for å kunne beveges. Bremsehåndtakene må holdes inne for å bruke rullatoren.
- Omvendt bremsesystem kan forenkle koordineringen for personer med nevrologiske sykdommer eller aldersrelaterede endringer i gange. Funksjonen øker sikkerheten og gir dem større stabilitet når de sitter på rullatoren.
- Intuitiv bruk av bremsene for personer med hukommelsesproblemer kan bidra dermed til å redusere fallrisikoen.

- Det er tryggere å sette seg og reise seg når bremsene er automatisk aktivert.
- Bremsene kan deaktiveres fullstendig ved å skyve bremsehendlene helt ned til de låses. Rullatoren kan da beveges fritt.
- Ergonomiske håndtak for fleksibelt grep, riktig gangstilling og komfortable armstøtter sittende (TOPRO Ergo Grip). Endring av grep reduserer belastningen på hendene.
- Unik minnefunksjon der innstillingen på håndtakene blir satt for senere bruk.
- Liten svingradius gjør rullatoren enkel å bruke i små rom (for eksempel bad og kjøkken).
- Kantavviser og vippefunksjon for trygg og enkel manøvrering over terskler og fortauskanter.
- Avtakbar romslig kurv.
- Enkel å slå sammen ved å dra i snoren på setet. Står stødig på hjulene og tar liten plass ved oppbevaring og transport.

Mål, farger og annen produktinformasjon finner du på side 15.

Lær mer her



TOPRO Troja Neuro

Rullemotstandssystem (RMS)

TOPRO Troja Neuro kan utstyres med vårt spesielle TOPRO rullemotstandssystem (RMS) som tilleggsutstyr.

Det monteres over eller under kantavviseren ved hjulet og stilles inn trinnløst med det lille justeringshjulet. Med RMS kan rullatorens motstand tilpasses brukerens behov – slik at brukeren alltid har optimal motstand for å kunne gå trygt og behagelig.



Rullemotstandssystem (RMS) her vist installert under kantavviseren.



Kantavviseren og det omvendte bremsesystemet gjør hverdagen enklere. Permanent aktivert brems – hold inne for å gå, slipp for å stoppe.



Rullemotstandssystem (RMS) for Troja Neuro. For justering av rullemotstanden ved gange. Art. nr. 814038

Tilbehør til Troja Walker² og Troja Neuro



Krykkeholder
monteres på valgfri side

Troja Neuro Art. nr. 814025
Troja Walker² Art. nr. 815358

Troja Walker², Troja Neuro



Antisklimatte
for trygg transport av kopper, tallerkener osv. på serveringsbrettet

Art. nr. 814059

Troja Walker², Troja Neuro



Enhåndsbrems
monteres på valgfri side for bremsing med kun én hånd.

Art. nr. 814026


Troja Walker², Troja Neuro



Styrehåndtak
for ledsager

Art. nr. 814014


Troja Walker², Troja Neuro

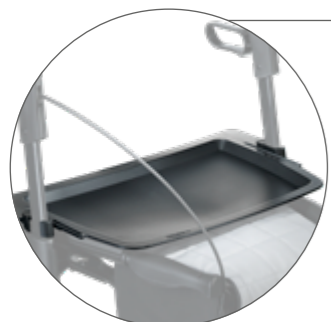

Serveringsbrett
sitter godt, enkelt å fjerne og rengjøre, tåler opptil 5 kg

Art. nr. 814728

Troja Walker², Troja Neuro

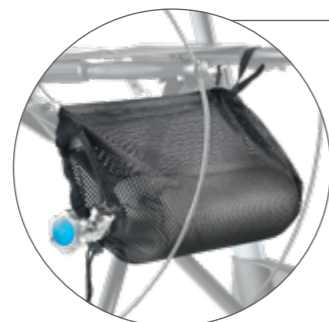

Nettkurv for oxygenflaske
for 2 liters flasker med oxygen (kun komprimert, ikke flytende). Kapasitet på 5 kg.

Art. nr. 814009

Troja Walker², Troja Neuro



Lær mer her
Rullatortilbehør

Se våre nettsider for mer tilbehør.

Tekniske data for Taurus

Type	H (hydraulisk)	E (elektrisk)
Anbefalt brukerhøyde	140–210 cm	140–210 cm
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg
Høyde underarmsstøtter	86,5–132 cm	86,5–136 cm
Avstand mellom støttepunktene	34–47 cm	34–47 cm
Lengde underarmsstøtter	34 cm	34 cm
Håndtak	Runde, Ø 3,5 cm	Runde, Ø 3,5 cm
Svingradius	91 cm	91 cm
Hjuldiameter	12,5 cm	12,5 cm
Hjulbredde	3,1 cm	3,1 cm
Bredde foran, innvendig mål	48 cm	48 cm
Bredde foran, utvendig mål	57 cm	57 cm
Bredde bak, innvendig mål	57 cm	57 cm
Bredde bak, utvendig mål	66 cm	66 cm
Produktvekt	18 kg	22 kg
Bruksområde	Innendørs	Innendørs

Modell	Art. nr.
TOPRO Taurus H Basic (130 N hydraulisk gassfjær)	814785
TOPRO Taurus H Premium (130 N hydraulisk gassfjær) Inkl. justerbare håndtak, kjøre- og parkeringsbrems på håndtakene, mulighet for retningssperre.	814787
TOPRO Taurus E Basic (elektrisk)	814790
TOPRO Taurus E Premium (elektrisk) Inkl. justerbare håndtak, kjøre- og parkeringsbrems på håndtakene, lås for svinghjul, mulighet for retningssperre.	814789

2 års garanti, unntatt montering og slitasjedeler.

Tekniske data for Troja Walker²



Størrelse	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Anbefalt brukerhøyde	150–185 cm	130–170 cm	130–160 cm
Maksimal brukervekt	135 kg	125 kg	80 kg
Maksimal kapasitet kurv	5 kg / 20 l	5 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Høyde underarmsstøtter	98–115 cm	84–100 cm	84–96 cm
Håndtak	Runde, Ø 3,5 cm	Runde, Ø 3,5 cm	Runde, Ø 3,5 cm
Største lengde	65 cm	65 cm	65 cm
Største bredde	63 cm	63 cm	53 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Setehøyde	63 cm	55 cm	52 cm
Svingradius	84 cm	84 cm	79 cm
Hjuldiameter	20 cm	20 cm	20 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Gripedistanse kjørebremser	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm
Høyde sammenslått	102 cm	88 cm	88 cm
Bredde sammenslått	33 cm	33 cm	33 cm
Lengde sammenslått	65 cm	65 cm	65 cm
Transportmål (l x b x h)	65 x 33 x 102 cm	65 x 33 x 88 cm	65 x 33 x 88 cm
Produktvekt	8,9 kg	8,6 kg	8,3 kg
Bruksområde	Innendørs	Innendørs	Innendørs
Art. nr.	815430	815440	815450

Modell M, S og X fås i:



Tekniske data for Troja Neuro



Størrelse	M (medium)	S (small)
Anbefalt brukerhøyde	150–200 cm	135–170 cm
Maksimal brukervekt	150 kg	125 kg
Maksimal kapasitet kurv	10 kg / 16 l	10 kg / 16 l
Håndtakshøyde	78–100 cm	71–86 cm
Håndtak	Ergonomiske, flere gripeposisjoner (TOPRO Ergo Grip)	
Største lengde	65 cm	65 cm
Største bredde	60 cm	60 cm
Avstand mellom håndtakene	47 cm	47 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm
Setehøyde	62 cm	54 cm
Svingradius	84 cm	84 cm
Hjuldiameter	20 cm	20 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm
Gripedistanse kjørebremser	7 cm	7 cm
Høyde sammenslått	80 cm	74 cm
Bredde sammenslått	24 cm	24 cm
Lengde sammenslått	65 cm	65 cm
Transportmål (l x b x h)	65 x 24 x 80 cm	65 x 24 x 74 cm
Produktvekt	7,8 kg	7,4 kg
Bruksområde	Innendørs og utendørs	Innendørs og utendørs
Art. nr.	814746	814747

Modell M fås i:



Modell S fås i:



Premiumprodukter fra Norge

Produsent:

TOPRO

TOPRO Industri AS
Rambekkevegen 5
2816 Gjøvik

Tlf.: 61 13 46 00

info@topromobility.com

www.topromobility.com



Lær mer her



topromobility.com

Designet og produsert i Norge.

TOPRO garanterer for topp kvalitet og gir 7 års garanti på TOPRO Troja-modeller og 2 års garanti på TOPRO Taurus-modeller (unntatt montering og slitasjedeler).

Kvalitetssikringsstandarder

NS ISO 9001 – kvalitet

NS ISO 14001 – miljø

NS ISO 11199-2 – rullator

NS ISO 11199-3 – gåbord

NS ISO 10993-5 – biokompatibilitet

made in Norway



Forhandler