

DK

LEVABO[®]

medical



Levabo[®] skaber større livsglæde for **Patienter og Plejere**


Trykaflastning af hæle

Forebyggelse og behandling, kategori 1-4



Navn		Str. i cm.	Vare nr.	Anvendelse	Om puden	Tryk mønster
Heel Up - Short		18 x 32 x 25	70001		Hælaflaster til mobile og siddende brugere, typisk kørestol. Kan anvendes til både forebyggelse samt afhjælpning af tryksår.	
Heel Up - Medium		18 x 39 x 25	70007		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere med korte ben. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.	
Heel up - Long		18 x 48 x 25	70002		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.	
Heel up - Max		18 x 50 x 30	70018		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Anvendes til brugere med en lang fod. Har et ekstra luftkammer under foden, der yder optimal støtte af forfod.	
Heel up - FIX Medium		18 x 39 x 25	70073		NYHED Hælaflaster til både profylakse og dekubitusbehandling. Til sengeliggende patienter der ligger uroligt i sengen. Den stabiliserende luftcelle og det faste bånd holder hælen fast.	
Heel up - FIX Long		18 x 48 x 25	70079		NYHED Hælaflaster til både profylakse og dekubitusbehandling. Til sengeliggende patienter der ligger uroligt i sengen. Den stabiliserende luftcelle og det faste bånd holder hælen fast.	

heel up^{care} kids

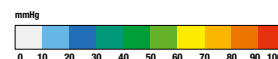

Kids - Medium 15 cm fod	15 cm	70038		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere med korte ben. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.
Kids - Long 15 cm fod	15 cm	70045		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.
Kids - Medium 20 cm fod	20 cm	70039		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Typisk for brugere med korte ben. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.
Kids - Long 20 cm fod	20 cm	70046		Hælaflaster til både forebyggelse og afhjælpning af tryksår. Mest anvendelig til sengeliggende. Yder god støtte af forfoden minimerer risikoen for dropfod.

Heel Up® størrelsesguide

Produkt	Nr.	Størrelse (længde af underben)	Typisk anvendelse:
Heel Up® Short	70001	32 cm	Stor teenager/lille voksen
Heel Up® Medium	70007	39 cm	Alm. voksen
Heel Up® Long	70003	48 cm	Stor voksen
Heel Up® FIX Medium*	70073	39 cm	Alm. voksen
Heel Up® FIX Long*	70079	48 cm	Stor voksen
Heel Up® Max	70018	50 cm	Større/bariatisk voksen (større fod)


* De almindelige Heel up, Short, Medium, Long og Max er ofte til patienter som er immobile.

De nye Heel up, Medium FIX og FIX Long er ofte til patienter som er mobile/aktive/ urolige i sengen.

Heel Up® har nogle vigtige egenskaber som giver en række fordele



- Overlegen aflastning
- Nem og hurtig at bruge
- En-patient brug i op til 6 til 8 uger
- En-patient brug sikrer optimal hygiejne
- Stop Up bånd sikrer korrekt oppumpning
- Findes i flere størrelser
- Testet og godkendt i henhold til ISO 10993-10 hudirritation og overfølsomhed.

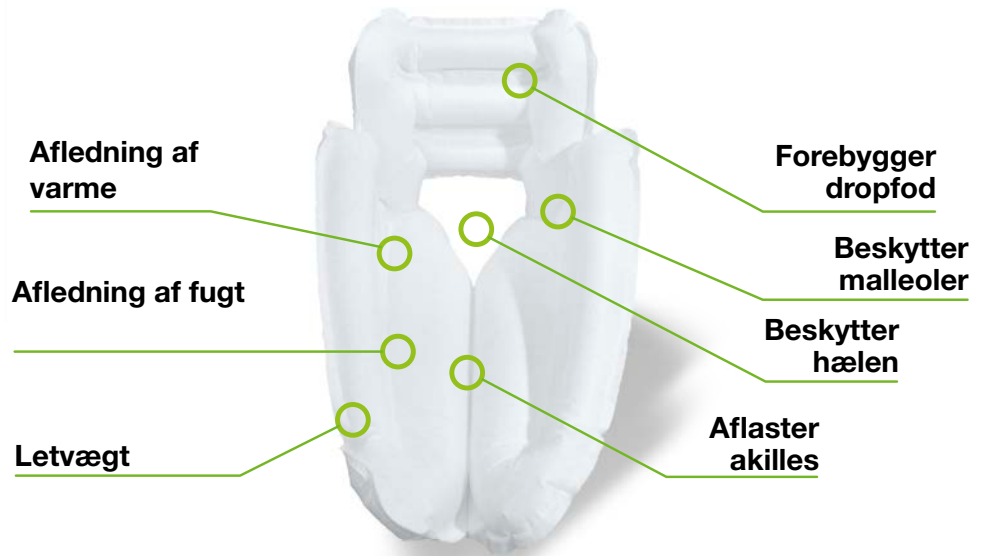

Det ydre lag af nonwoven filt afleder meget effektivt fugt og varme væk fra huden og sikrer, at huden ikke klæber til pudsen. Den kan aftørres med en fugtig klud, alkohol eller andet egnet desinfektionsmiddel.



Der er gjort plads til akillesenen imellem de to bærende celler. Cellerne er affasede så læg og knæ ikke belastes unødigt.



Der er åbent til hælen og gjort plads til malleolerne for at sikre fuld aflastning.



Sålen på hælaflasteren og luften under foden understøtter forfoden og forebygger dropfod.

Trykaflastning på mindre end 60 sekunder..



Fold Heel Up® ud og indsæt pumpen i den selvlukkende ventil.



Pump op...



Pump op indtil det omsluttende papirbånd Stop Up® brister - og fjern pumpen. Heel Up® er nu klar til brug.



Placer foden i Heel Up® og luk båndet over åbningen.



Kontroller at hælen er løftet ca. 1½ fingerbredder over underlaget.





Færdig...



Trykaflastning til siddende

seat all®

Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Anvendelse	Anvendelse
Seat All - Seat	42 x 42 x 5	70008	Siddepude, ekstra forstærket. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Standard størrelse til kørestol. Max 150 kg.	
Seat All - Seat Small	32 x 32 x 5	70054	Siddepude, ekstra forstærket. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Max 150 kg	
Seat All - Seat Large	52 x 52 x 5	70019	Siddepude, ekstra forstærket. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Ekstra længde samt bredde. Max 150 kg.	
Seat All - Seat Max (bariatric)	52 x 62 x 5	70020	Siddepude, ekstra forstærket. Bariatrisk pude til brugervægt op til 250 kg. Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Ekstra længde samt bredde.	
Seat All - Seat Twin	48 x 52 x 5	70021	Siddepude, ekstra forstærket. Anvendelig til halvsidig paretiske brugere med ustabil siddestilling. Pude er delt i to, til individuel lufttryk. Forebyggelse eller aflastning af tryksår. Max 150 kg.	
Seat All - Seat Tailbone	42 x 42 x 5	70022	Special siddepude, ekstra forstærket. Til anvendelse for total aflastning af rectum, typisk ved stråleskader, følsomt haleben eller store gener ved hæmoroïder. Max 150 kg.	
Seat All - Back & Seat	27 x 45 x 5	70009	Siddepude og ryg pude. Kan anvendes med fordel til begge områder. God rygstøtte, let siddepude for korrekt siddestilling. Max 150 kg.	
Seat All - Donut	45 x 45 x 8	70017	Siddepude, ekstra forstærket. Ringformet uden hul i midten, men med optimalt fordelt tryk til forebyggelse eller aflastning af tryksår. Max 150 kg.	
Seat All - Donut Small	35 x 35 x 5	70055	Siddepude, ekstra forstærket. Ringformet uden hul i midten, men med optimalt fordelt tryk til forebyggelse eller aflastning af tryksår. Max 150 kg	
Seat All - Bath	50 x 50 x 8	70013	Til bade/bækken stole for en bedre trykfordeling ved længere tids brug. Fastgøres til stolen med tape. Ved bad kan puden tørres og genbruges. Max 150 kg.	
Seat All - Flexi	52 x 42 x 5	70070	Sæde All Flexi-sædehynde er designet til patienter, der bruger fækal katetersystem eller fækalopsamlingspose. Seat All Flexi giver patienten mulighed for at sidde op uden tryk på anus og samtidig sikre, at røret fra katetersystemet ikke klemmes, eller at fækalopsamlingsposen lækker.	

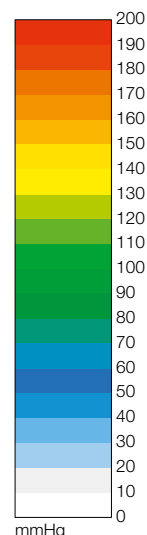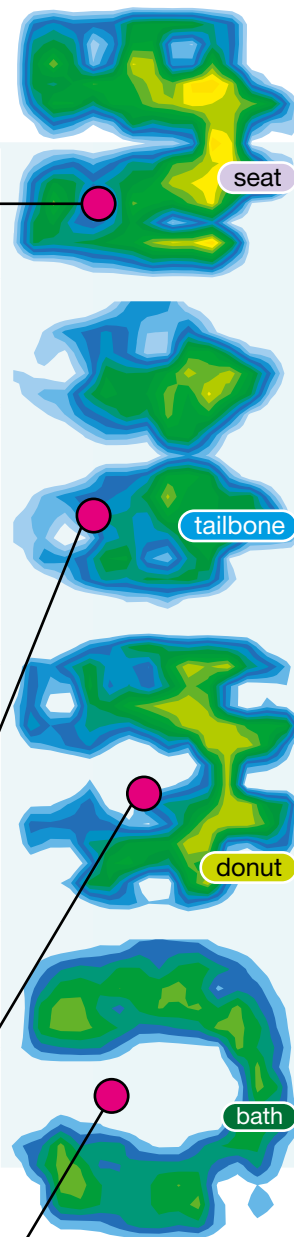


Se videoer på: www.levabo.dk





Seat All® har nogle vigtige egenskaber som giver en række fordele

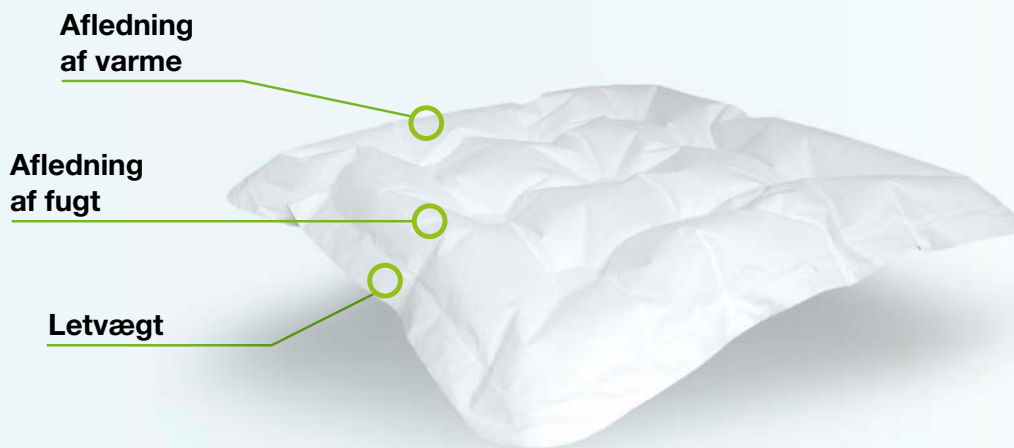

Det ydre lag af nonwoven filt afleder meget effektivt fugt og varme væk fra huden og sikrer, at huden ikke klæber til puden. Den kan aftørres med en fugtig klud, alkohol eller andet egnet desinfektionsmiddel.

Trykaflastning på mindre end 60 sekunder..



Fold Seat All® ud og indsæt pumpen i den selvslukkende ventil.



Pump op...



Pump op indtil det omsluttende papirbånd Stop Up® brister - og fjern pumpen. Seat All® er nu klar til brug.



Placer puden under patienten.



Kontroller at Patienten er løftet ca. 1½ fingerbredde over underlaget.




Færdig...




Trykaflastning til krop & arm



Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Om puden	Anvendelse
All up - Multi Small	50 x 25 x 8	70003	Lejringspude 2 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ).	
All up - Multi Small Silent & Soft	50 x 25 x 8	70105	Lejringspude 2 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ). Ekstra blød og lydlos pude.	
All up - Multi Medium	50 x 37 x 8	70004	Lejringspude 3 kamre. Multifunktion. Kan med fordel anvendes til lejrning i liggende positioner (Ml. ben, ryg), og eventuelt som støtte under fødder.	
All up - Multi Large	50 x 50 x 8	70005	Lejringspude 4 kamre. Multifunktion. Kan bl.a. foldes/rules sammen. (Under ben og arm, kommer med ekstra velcro bånd).	
All up - Multi Max	50 x 50 x 20	70012	Lejringspude, særlig anvendelig til hoftefraktur patienter samt hvor underkønstremitet skal eleveres over hjertehøjde.	
All up - Universal	50 x 50 x 8	70010	Lejringspude, typisk til ryggen, korsben og haleben i knækseng og ved sideleje mellem benene. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.	
All up - Universal Long	55 x 70 x 8	70015	Lejringspude, typisk til sideleje mellem benene, længere model som beskytter knæ og malleoler. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.	
All up - Universal Slim	45 x 75 x 8	70016	Lejringspude typisk til sideleje mellem benene, længere og smallere model som sikrer afstand mellem knæ i sideleje. Kan foldes på midten hvis puden ønskes højere.	
All up - Head	28 x 30 x 5	70011	Hovedpude. Særlig anvendelig til forebyggelse og behandling af tryksår på ører og nakke, er også anvendelig til koma patienter.	
All up - Head Silent & Soft	28 x 30 x 5	70074	Hovedpude. Særlig anvendelig til forebyggelse og behandling af tryksår på ører og nakke, er også anvendelig til koma patienter. Ekstra blød og lydlos pude.	
All up - Wing	50 x 85 x 8	70006	Aflastningspude til underkønstremiteter, sengeliggende. Kan nemt fastgøres under madras, så puden ligger fast.	
All up - Arm Rest	55 x 25 x 8	70027	Lejringspude til aflastning af armen.	
All up - Elbow	30 x 20 x 10	70028	Lejringspude til aflastning af albuen.	
All Up - Elbow Medium	23 x 20 x 10	70048	Lejringspude til aflastning af albuen.	


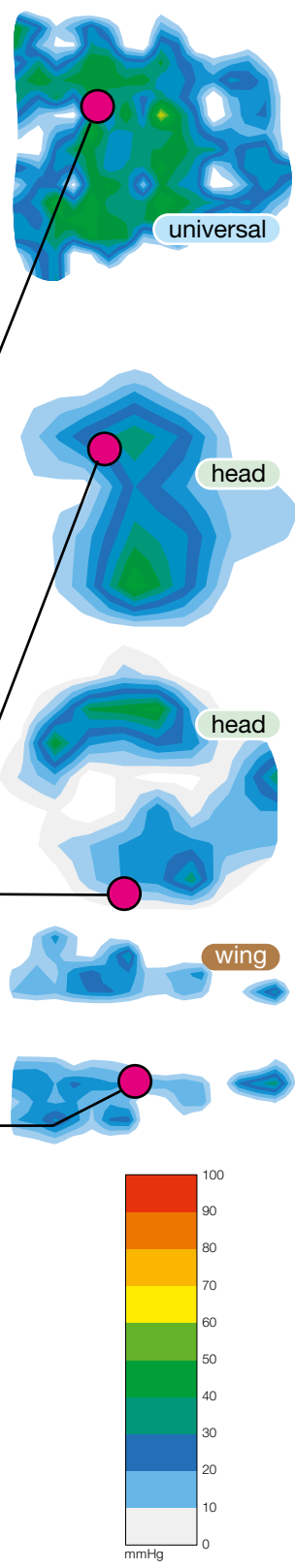


Navn	Størrelse cm.	Vare nr.	Om puden	Anvendelse
All up - Lap	● 80 x 60 x 10	70025	Lejringspude, halvmåne. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.	
All up - Lap Max	● 80 x 60 x 20	70026	Lejringspude, halvmåne. Ekstra højde. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.	
All Up - Elbow & Heel	● 16 x 19 x 10	70049	Pude til aflastning af hæl eller albue.	 NYHED

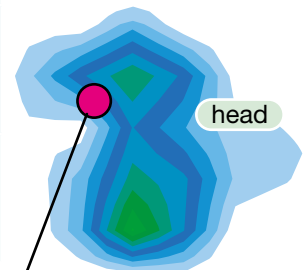

all up^{care} kids

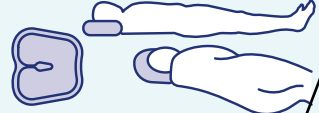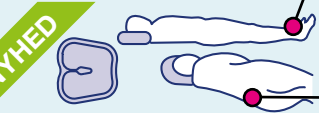All Up- Kids Care Head	● 16 x 18 x 5	70040	Lille hovedpude. Særlig anvendelig til børn under 1 år ved intubering.	
Kids Care Head Silent & Soft	● 16 x 18 x 5	70075	Lille hovedpude. Særlig anvendelig til børn under 1 år ved intubering.	 NYHED

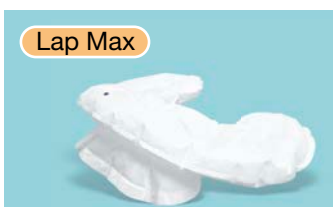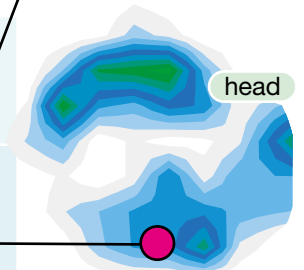

Puder til special lejring



Navn		Størrelse cm.	Vare nr.	Om puden	Anvendelse
All up - Belly		65 x 75 x 15	70023	Skråpude til bugleje for at løfte brystkassen.	
All up - Kidney		50 x 20 x 20	70014	Special lejningspude til særlig anvendelse til lejring af nyre / bækken område (Nyrenækk).	
All up - Wedge 30°		50 x 40 x 15	70024	Lejningspude til sideleje. Sikrer stabilt leje ved 30°, kileformen ligger stabilt ved hjælp af en flap der skubbes ind under patienten.	
All up - Multi Wedge		50 x 23 x 23	70053	Skråpude der eleverer patientens arm der ligger stabilt i puden. Kan anvendes til lymfødeme-patienter (venekateter i hånden)	
All up - Head Intubate DUO White		32 x 30 x 18	70103	Hovedpude med åbninger til slanger ved intubering i bugleje.	 NYHED
All Up - Foot sole		86 x 37 x 5	70080	Pude til aftastning af fodsålerne. Monteres på sængegærdet i fodenden af sengen. Passer til alle senge.	 NYHED

PRONE kit

Prone Kit inkl. håndpumpe	 	Indhold i sættet, vare nr.: 70023 70103	70115	Sæt bestående af to puder: All Up Head Intubate DUO White og All Up Belly er designet til at blive anvendt til patienter som intuberes i bugleje. All Up Belly kan placeres på patienten inden patienten vendes og pumpes op, når patienten er vendt om i bugleje. Sættet indeholder 3 stk. af hver pude. Puderne kan anvendes individuelt.	
---------------------------	------	---	-------	---	--

COVID19 relief kit

Covid 19 Relief Kit inkl. håndpumpe	 	Indhold i sættet, vare nr.: 70023 70103 70011 70010 70003 70007 70002	70104	Sæt bestående af 7 puder: All Up Head Intubate DUO White, All Up Belly, All Up Head, All Up Universal, All Up Multi Small, Heel Up Medium og Heel Up Long. Sættet dækker de fleste lejnings situationer der måtte opstå. En-patient brug sikrer optimal hygiejne.	
-------------------------------------	--------------------------	--	-------	---	--



wedge 30°



foot sole



kidney



multi wedge



PRONE kit

Sæt bestående af to puder: All Up Head Intubate DUO White og All Up Belly er designet til at blive anvendt til patienter som intuberes i bugleje.

All Up Belly kan placeres på patienten inden patienten vendes og pumpes op, når patienten er vendt om i bugleje.

Sættet indeholder 3 stk. af hver pude.

Puderne kan anvendes individuelt.

head Intubate DUO White

NYHED



belly




All Up® har nogle vigtige egenskaber som giver en række fordele

Afledning af varme

Afledning af fugt

Letvægt

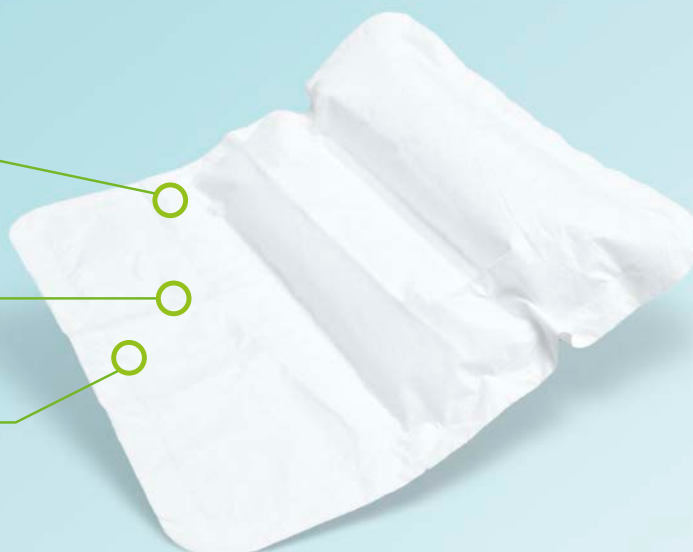

Den ydre beklædning af nonwoven filt afleder meget effektivt fugt og varme væk fra huden og sikrer, at huden ikke klæber til puden. Den kan aftørres med en fugtig klud, alkohol eller andet egnet desinfektionsmiddel.

turn all[®] system

your solution
for repositioning

Det nye Levabo Turn All[®] positioneringssystem er udviklet til både akutte og hjemmeplejepatienter.

Systemet er til støtte for klinikere og plejere ved regelmæssig sidepositionering af primært immobile patienter, som har høj risiko for at udvikle tryksskader.



Klinisk effektivt

Flere retningslinjer for klinisk praksis anbefaler repositionering mindst hver anden time for patienter med reduceret mobilitet.

(NICE GUIDELINE 2015).

2019 Internationale tryksårs retningslinjer (EPUAP, NPIAP, PPPIA) anbefaler brugen af 30° side leje.

Let at anvende

Hurtigt og nemt at installere og betjene. Systemet er baseret på et luftkammersystem, der løfter den patient, der ligger på det, skiftevis i højre og venstre side.

Systemet lægger derved patienten i 30° sideleje, på skiftevis højre og venstre side.

Til alle senge

Passer til enhver standard seng, hvor den placeres under den eksisterende madras, kan også anvendes i elevationssenge.

Kontrolleret positionering

Positionering udføres let og med lav støj. Systemet tager ca. 10 minutter for en positionsændring. På grund af denne meget langsomme og jævne positionsændring opfattes systemet som meget behageligt af patienten.

Sidestøtte funktion


Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykthed samt mindsker risikoen for shear.

Pumpe med **enkel** betjening

- 1 Tænd pumpen
- 2 Indstil tiden for behandlingen
- 3 Vælg vende cyclus
30/60 minutter ved kritiske patienter
90 minutter ved forebyggende pleje.



Sidestøtte system

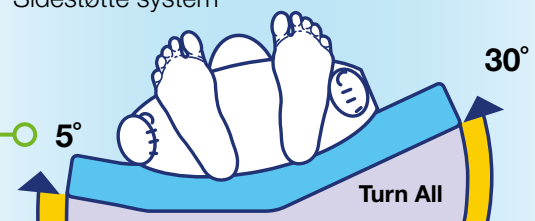


Fordele ved Turn All® systemet

- Automatisk 30° sidepositioneringssystem til tryksårsforebyggelse eller behandling
- Omfattende trykaflastning
- Forebyggelse af trykskader/sår
- Behandling af eksisterende trykskader/sår
- Kan integreres i enhver plejeseng med aftagelig madras
- Tidsbesparende for personale og frigør behandlingsressourcer
- Tunge patienter (op til 150 kg) positioneres forsigtigt, hvilket aflaster plejepersonalet
- Patienten oplever ingen søvnforstyrrelser
- Svagt løft af madrassen i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykthed, samt mindsker risikoen for shear
- Systemet har mulighed for statisk løft.



Scan koden og læs om de mange fordele ved automatisk sidekip.

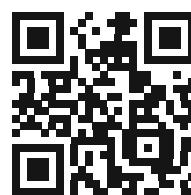

Scan koden og se hvor let Turn All® installeres i en seng.

Turn All® Systemet gør en **standard seng** til en seng med **automatisk sidekip**

Standard madras

Turn All madras



Turn All® produkt oversigt


Produkt navn	Str. i cm.	Max vægt i Kg	Produkt nr.	HMI nr.	Anvendelse
Turn All 3CT med cover med TPU bund	85 x 200	225	70128	130290	Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All® overtræk med TPU bund og 1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.
Turn All Cover T med TPU bund	85 x 200	N/A	70114	N/A	Overtræk til Turn All® løftemadrassen med TPU bund.
Turn All Pump 3C	27 x 13 x 10	N/A	76117	N/A	Pumpe til Turn All® systemet m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.

Bariatrisk

Turn All 3CT Bariatrisk med cover med TPU bund	110 x 210	400	70098	130392	Sæt med 1 Turn All® løftemadras monteret i Turn All® overtræk med TPU bund og 1 pumpe m. 3 cyclus: 30/30, 60/60, 90/90 minutter.
Turn All Cover Bariatrisk T med TPU bund	110 x 210	NA	70126	N/A	Overtræk til Turn All® løftemadrassen med TPU bund.

LEVA[®] FLEX TWIN

Trykafastende madras
med 2 skumkerner
til forebyggelse af tryksår

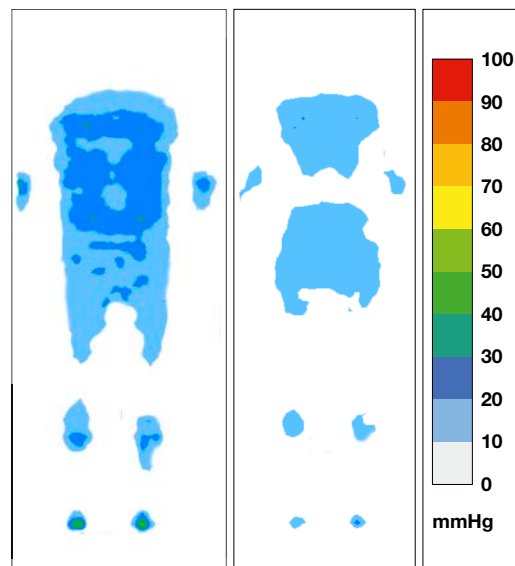

Trykmønster:
Mand 23 år, 108 kg.

Trykmønster:
Kvinde 64 år, 60 kg.

Fakta:

Størrelse: 200 x 90 x 14 cm.
For andre størrelser - kontakt Levabo.

Funktion: Som hjælpemiddel til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med sårkategori 3.

Anbefalet brugervægt: op til 150 kg.
Hvis madrassen anvendes sammen med Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.

Kerner: HR PUR Skum.
Vægtfylde: 50+50 Kg/m³
Hårdhed kPa: HR52120 – 3,0
Hårdhed kPa: HR52145 – 3,8

Efterlever:
Öko-TEX Standard 100,
Produktklasse I, certifikat Nr. I 308026.

Brand: California TB 117-2013 sec. 3

Betræk: Medicinsk Bi-elastisk PU.

Rengøring af betræk: tørres af med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler. Maskinvask max 95 °C, tørretumbling ved lav varme.

Garanti: 2 år



Leva Flex madrassen er opbygget af 2 separate højkvalitets skumkerner hver især svøbt i tricot, hvilket gør det muligt for kernerne at glide på hinanden for at reducere shear hos borgeren. Glideevnen har også en gavnlig effekt på trykfordelingen ved elevering af sengens hovedgærde eller fodende.

Skumkerne er zoneopskårede for optimal trykfordeling af kroppens trykpunkter, opskæringen giver også optimal fleksibilitet ved elevering af plejesengen samt ved anvendelse sammen med Levabo Turn All automatisk vendesystem.

Zoneopskæringen er ens i hoved og fodende, hvilket gør det muligt at dreje madrassen for længere levetid.

Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem og hjemmeplegen.

Betrækket er et vandtæt, men åndbart, firevejs strækbart hygiejnisk betræk, det hygiejniske betræk er åndbart (dampgennemtrængeligt), hvilket bidrager til at reducere risikoen for hudmaceration.


Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider som gør det nemt at adskille madrassen for vask af betrækket. Betrækket er forsynet med fire håndtag for nem håndtering.

Produkt nr.: 70156



LEVA[®] FLEX BASIS

Trykafastende madras
med 1 skumkerne
til forebyggelse af tryksår

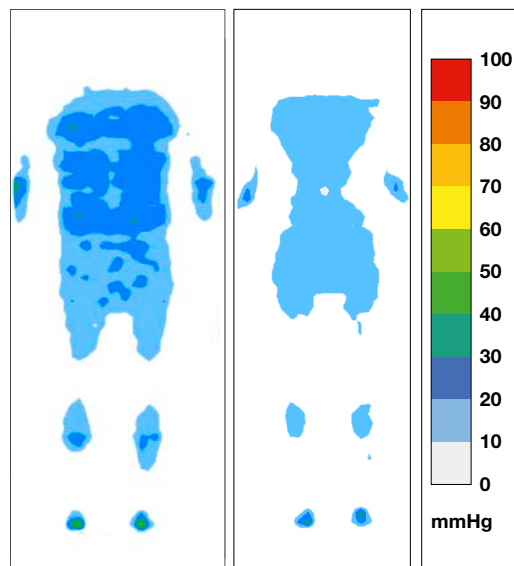

Trykmønster:
Mand 23 år, 108 kg.

Trykmønster:
Kvinde 64 år, 60 kg.

Fakta:

Størrelser: 200 x 90 x 14 cm.
200 x 88 x 14 cm.
200 x 85 x 14 cm.
165 x 70 x 10 cm.

Funktion: Som hjælpemiddel til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med sårkategori 2.

Anbefalet brugervægt: op til 150 kg.
Hvis madrassen anvendes sammen med Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.

Kerner: HR PUR Skum.
Vægtfylde: 50+50 Kg/m³
Hårdhed kPa: HR52145 – 3,8

Efterlever:
Öko-TEX Standard 100,
Produktklasse I, certifikat Nr. I 308026.

Brand: California TB 117-2013 sec. 3

Betræk: Medicinsk Bi-elastisk PU.

Rengøring af betræk: tørres af med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler. Maskinvask max 95 °C, tørretumbling ved lav varme.

Garanti: 2 år



Leva Flex madrassen er opbygget af 1 højkvalitets skumkerne.

Skumkernen er zoneopskåret for optimal trykfordeling af kroppens trykpunkter, opskæringen giver også optimal flexibilitet ved elevering af plejesengen samt ved anvendelse sammen med Levabo Turn All automatisk vendesystem.

Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem og hjemmeplejen.

Betrækket er et vandtæt, men åndbart, firevejs strækbart hygiejnisk betræk, det hygiejniske betræk er åndbart (dampgennemtrængeligt), hvilket bidrager til at reducere risikoen for hudmaceration.

Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider som gør det nemt at adskille madrassen for vask af betrækket. Betrækket er forsynet med fire håndtag for nem håndtering.

Produkt nr. 200 x 90: 70164
Produkt nr. 200 x 88: 70162
Produkt nr. 200 x 85: 70163
Produkt nr. 165 x 70: 70157



Husk de udsatte områder

Tryksår er et område på huden, hvor huden eller det underliggende væv er beskadiget.

Ved immobilitet og svage patienter kan tryksår opstå indenfor 10 – 15 minutter, hvorfor en hurtig og forebyggende indsats er vigtig. **De fleste tryksår kan forebygges!**

Tryksår kan opstå alle steder på kroppen, men særligt udsat er de steder på kroppen, hvor knoglefremspring øger trykket mod underlaget. Det er derfor vigtigt at fokusere på aflastning af disse udsatte områder i forebyggelsen af tryksår.

Specielt ældre mennesker og sengeliggende patienter er i særlig risiko for at udvikle tryksår.

Lammelser, dårlig ernæringstilstand og sygdomme som diabetes og åreforkalkning øger også risikoen for tryksår. I højrisiko er dem, der ikke selv er i stand til at ændre, eller bede om at få ændret stilling.


Det er derfor vigtigt i forebyggelsen af tryksår, at pårørende eller personalet hyppigt vender og aflaster patienter i den liggende og siddende stilling. Samtidig er det vigtigt at undgå friktion mod underlaget da det kan resultere i shear (løsnet hud). Behovet for aflastning og vending er individuelt, men det hyppigst brugte interval for vending er 1½ - 2 timer*.

Der er forskellige kategorier af tryksår, og selvom det ikke er et åbent sår, kaldes det også for tryksår (eller trykskader). Tryksår kaldes også i almindelig tale for "liggesår" eller "siddesår", og i fagsprog "decubitus".

Shear/Skridkræfter

Skridkræfter er specielt farlige for væv, der i forvejen er trykudsat, fordi der med relativt beskeden sideværts påvirkning af vævet, sker en vridkraft af karrene, som derved aflukkes.

Typisk ses skridkræfter ved forkert siddestilling, eller når patienten glider ned i sengen ved løft af hovedgærdet.

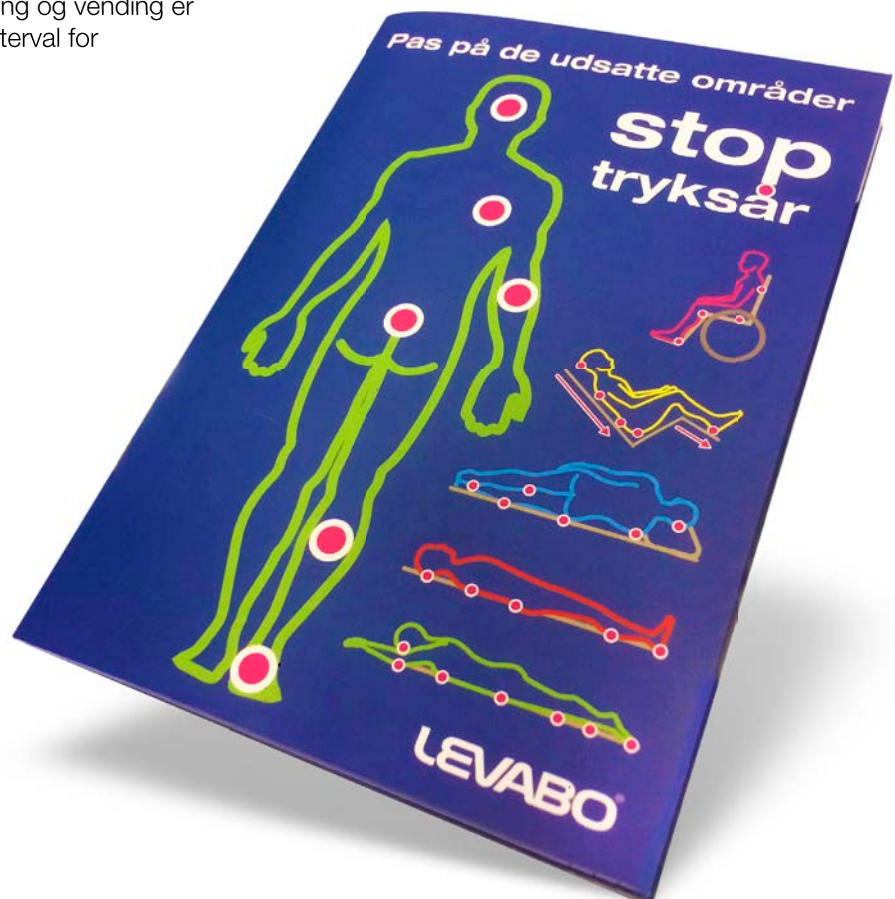

*Kilde: EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panels) 2009a/b. Prevention and Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel.

Vælg den rigtige pude

Lejring Rygleje

1 All Up Head <i>side 6</i>	5 Heel Up Max <i>side 2</i> Heel Up FIX Medium <i>side 2</i> Heel Up FIX Long <i>side 2</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i> All Up Foot sole <i>side 8</i>
2 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i> Turn All <i>side 10</i> All On Overlay madras <i>side 12</i>	Lejring af arme i rygleje: All up Multi Small <i>side 6</i> All up Multi Large <i>side 6</i> All up Multi Wedge <i>side 8</i> All up Elbow & Heel <i>side 7</i>
3 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i> Turn All <i>side 10</i> All On Overlay madras <i>side 12</i>	Lejring af ben over hjertehøjde i rygleje: All Up Multi Max <i>Side 6</i>
4 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>	
5 Heel Up Short <i>side 2</i> Heel Up Medium <i>side 2</i> Heel Up Long <i>side 2</i>	



Baghoved, skulderblade, rygsøjle, albuer, korsben, balder, hæle, fodsåle.

Lejring Sideleje

1 All Up Head <i>side 6</i>	5 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> Heel Up Short <i>side 3</i>
2 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>	Lejring i 30° sideleje: All Up Wedge 30° <i>side 8</i>
3 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>	
4 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i>	
5 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>	



Øre, kæbe, albue, hoftekam, hofte, knæ, ankel, malleoler.

Lejring Bugleje

1 All Up Head <i>side 6</i> All up Head Intubate- DUO White <i>Side 8</i>	5 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>
2 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>	6 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>
3 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Wing <i>Side 6</i> All Up Belly <i>side 8</i>	7 All Up Multi Small <i>side 6</i> All Up Multi Medium <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>
4 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Wing <i>Side 6</i>	Intubering i bugleje Prone Kit <i>side 8</i> Covid 19 relief kit <i>side 8</i>



Pande, hage, bryst, hofte, knæ, skinneben, tæer.

Lejring Siddende / Shear

1 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Multi Large <i>side 6</i>	4 Seat All Seat <i>side 4</i> Seat All Seat Large <i>side 4</i> Seat All Seat Max <i>side 4</i> All Up Multi Small <i>side 6</i>
2 Seat All Seat <i>side 4</i> Seat All Seat Large <i>side 4</i> Seat All Seat Max <i>side 4</i> Seat All Tailbone <i>side 4</i> Seat All Donut <i>side 4</i> Seat All Twin <i>side 4</i> Seat All Flexi Seat <i>side 4</i>	5 Heel Up Short <i>side 3</i> All Up Elbow & Heel <i>side 7</i> All Up Multi Small <i>side 6</i>
3 All Up Armrest <i>side 6</i> All Up Elbow <i>side 6</i> All Up Elbow Medium <i>side 6</i> All Up Elbow & Heel <i>side 7</i> All Up Lap <i>side 7</i> All Up Lap Max <i>side 7</i>	6 All Up Universal <i>side 6</i> Heel Up <i>side 3</i> All Up Multi Large <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>
	7-8-9 All Up Universal <i>side 6</i> All Up Universal Long <i>side 6</i> All Up Wing <i>side 6</i>
	10 All Up Head <i>side 6</i> All Up Multi Small <i>side 6</i>



Baghoved, skulderblade, albue, hoftekam, hofte, haleben, siddekogler, knæ, ankel, hæle.

Levabo Akut Kit



Vores produkter gør en forskel.

De innovative lejringsprodukter fra Levabo® er udviklet i samarbejde med ledende sårplejere og bliver produceret i Danmark. Produkterne har en lang række fordele i forhold til konventionelle lejringsprodukter.

Ved anvendelse af Levabo®'s lejringsprodukter, har man den fornødne lejringspude ved hånden, til effektiv tryksårforebyggelse. Produkterne er én-patient oppustelige lejringspuder, som efter brug bortskaffes. Produkterne fylder meget lidt, også på depotet og er et let transportabelt sortiment i Levabo®'s Akut Taske som er udviklet til formålet.

Disse fordele kommer i særdeleshed til udtryk i hjemmeplejen. Som hjemmeplejer har man med Levabo®'s produkter mulighed for at starte en effektiv tryksårforebyggende indsats tidligere, billigere og nemmere, end ved anvendelse af konventionelle lejringsprodukter. Allerede ved mistanke om risiko for tryksår, kan hjemmeplejeren øjeblikkeligt lejre optimalt, og dermed undgå unødige lidelser for borgeren. Dette sparer sundhedsvæsenet for efterfølgende betydelige udgifter til behandling af tryksår.

Produkterne er multifunktionelle og kan med fordel anvendes i de fleste lejringsituationer. Én-patient brug sikrer høj hygiejne.

Navn	Str. i cm.	Vare nr.
Akut kit taske	40 x 31 x 15	76006

Levabo Luft pumper

Navn	Vare nr.		Om pumpen
Manuel pumpe	76004		Manuel pumpe til hurtig oppumpning af Levabo® produkter.
Pumpe 240V	76002		Støjsvag elektrisk pumpe til hurtig oppumpning af Levabo® produkter.
Batteri pumpe	76001		Støjsvag genopladelig batteri pumpe til hurtig oppumpning af Levabo® produkter. ekstra batteri medfølger.

www.levabo.dk
www.facebook.com/LevaboAps

Gratis Plakat og Lomme Guide – Betal kun fragt


Stop Tryksår, husk de udsatte områder. Det er en fin reminder at have hængende i områder hvor det er vigtigt ikke at glemme de steder på kroppen der skal passes på i forhold til udvikling af tryksår.

Det er nyttigt i en travl hverdag.

Vi har lavet den i friske farver og et moderne "kunstnerisk" udtryk så den er pæn at have hængende, den tiltrækker øjnene og videregiver det gode budskab.


Plakaten er trykt i offsettryk og måler 50 x 70 cm.

Lomme guiden indeholder en god og overskuelig oversigt over alle de udsatte områder i rygleje, bugleje, sideleje og siddende stilling.

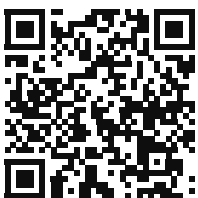

Scan koden og bestil sættet

Eller gå til:
www.levabo.dk/vare/gratis-plakat-og-lomme-guide

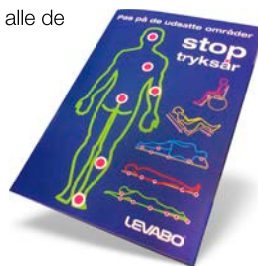

stop tryksår
 Pas på de udsatte områder

Starten på et tryksår kan opstå indenfor et meget kort tidsinterval, **15 - 20 Minutter!**

Tryksår opstår på de udsatte områder på kroppen, hvor trykret er kun beskyttet af et tyndt lag hud. Med Levabo®'s lejrings- og patient produkt sortiment, er det muligt at foretage en hurtig og effektiv lejrings af patienten, inden der opstår skade på de udsatte områder.

www.levabo.dk

KATALOG 2022 DK-2022.06.07.V5



Konformitets erklæring (CE)

Virksomheden Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, erklærer, at produkterne er designet og fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og lovmæssige krav.

Produkt

Produkterne er medicinske produkter i overensstemmelse med: EU Regulativ MDR (EU) 2017/745, Medicinsk udstyr - klasse 1. Kontrolleret af Lægemedelstyrelsen 21/1 2021.

Produktion

EN ISO 9001: 2015 QMC
 EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC



Levabo ApS
 Sverigesvej 20A
 8660 Skanderborg
 Tel.: +45 31 70 40 25
 Fax: +45 86 10 00 28
 Mail: info@levabo.dk
www.levabo.dk