

Zitzi Seabass G2



Nyt Design

Seabass G2 følger Anatomic Sitts øvrige G2-opdateringer for kørestolsstel med ny matsort farve og ny siddeplade. Beslag til fodstøtter og kørebøjle er nu de samme. Det nye G2-design er 1-2 kg lettere end sin forgænger.

Med tyngdepunktet på rette sted.

Seabass G2 kørestolsstellet optimale tyngdepunktsforhold kan opnås uanset siddesystem.

Sædedybden kan meget enkelt justeres og rammen har mange drivhjulspositioner for bedst mulige balance kan opnåes.

Seabass G2 kan udstyres med et stort antal forskellige hjul alt afhængig af behov og ønskemål.

Universal

Seabass G2 er udviklet til at passe til de fleste siddesystemer på markedet.

Hjul

For at kunne imødekomme flest mulige mål tilbyder vi 5 forskellige størrelser på drivhjul. Vælg mellem 12", 16", 20", 22" og 24" hjul.

Vi tilbyder nu flere af størrelserne som standard i en sort non-mark udgave. Samtlige drivhjul har quick-release funktion og tilbydes som luftfyldte eller massive. Vælg E-drive og kørselv eller kørselv med motor.

Crashtestet og godkendt!

Seabass G2 er crashtestet og godkendt efter standard ISO 7176-19 for 135 kg og Hi-testet efter ISO 10542.

Seabass G2 fakta

Størrelser	3 stk	Totalbredde	58-68 cm*
Belastningsvægt	max 135 kg	Totallængde	69-77 cm*
Tiltvinkel	0 til 35°/-7 til 28°	Sædehøjde	41/46 cm
Drivhjul	12", 16", 20", 22" och 24"	Vægt	19-20 kg

*Afhængig af valg af hjul

Vinkeljusterbar kørebøjle

Unik design til bekvem håndtering

Vårdarstyrd broms

Dobbelt låsbare bremse-
håndtag til drivhjulenes
tromlebremser.

Tiltregulator

Kørestolsstellets tiltfunk-
tion styres enkelt med
regulatoren på kørebøjlen.

Armlæn

Udsvingbare armlæn med
mange justeringsmuligheder
og flade eller skålformede
armlænsplader.

Transportbeslag

Godkendt til transport

Plan sædeplade

Færdige spor til en enkel
montering af adaptersystem

Forskellige hjul

For at møde forskel-
lige behov. Udrustet
med quick-release
for enkelt at frigøre
og genmontere
drivhjul

Y-ramme

For at undgå pladsproblem
mellem fodstøtte og hjul



E-drive drivhjulspakke

Et fleksibelt sæt til
forflytning

Tippepedal

Letter kørsel over
forhindringer.

Svinghjul

Kan fås i forskellige
størrelser og
udformninger samt
kan monteres med
retningsholder.

Flexibel fodstøtte


Flere forskellige fodstøtter
med hel eller delt fodplade og
mange justeringsmuligheder
samt tilbehør som lægstøtte,
fodkasse, polstring, fodrem
mm.

Anti-tipstøtte

Mindsker risikoen for
at tippe bagud.



Eksempler på tilbehør til Zitzi Seabass G2

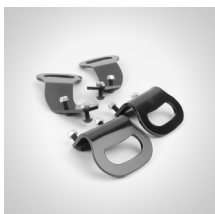

Transportbeslag




Anti-tipstøtte



Tippepedal



Armlæn

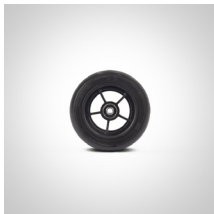

Svinghjul 6"



Svinghjul 7"



Drivhjul 12", 16"




Drivhjul 20", 22", 24"




E-drive 16"



Stænkskærme
16"/20"/22"/24"

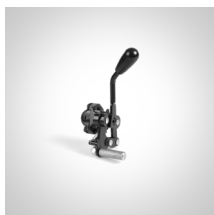

Parkeringsbremse

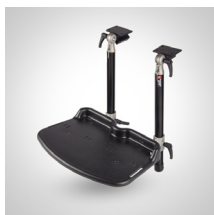

Hel fodstøtte



Delt fodstøtte



Lægstøtte



Adaptersystem
Universal

For yderligere information se www.anatomic sitt.dk

Siddesystemer, som passer til Seabass G2



Delfi Pro
str. 4



Sharky Pro



Anatomic
formstøbt sæde



2022-04-21

Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomic sitt.dk

FØLG OS PÅ:

