

TransferAid

Vandret patientforflytning gøres nemt



TransferAid

Ensartet vandret forflytning

Hvad kan TransferAid


TransferAid er et unikt hjælpemiddel, der optimere arbejdsmiljøet i forbindelse med en vandret patientforflytning.

TransferAid sikrer et optimalt arbejdsmiljø, ved at skåne personalet for hårde belastninger omkring hænder, ryg og knæ. Samtidig giver den en mere rolig og værdig forflytning for patienten idet behovet for personalekontakt reduceres.

Det unikke design gør det muligt at udføre en ensartet og sikker patientforflytning med et væsentligt reduceret antal personale. TransferAid effektiviserer den daglige forflytning og belastning reduceres.


TransferAid

- Reducerer belastninger.
- Nem at anvende og indstille.
- Ensartet vandrette forflytninger.
- Fremstillet i holdbare materialer.
- Ergonomisk arbejdsstilling for personalet.
- Effektiviserer processen.

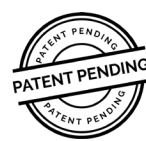


Linker til produktsiden
på vores hjemmeside


1. AllConnect fæstnes på lagnet ved skulder og hofte.

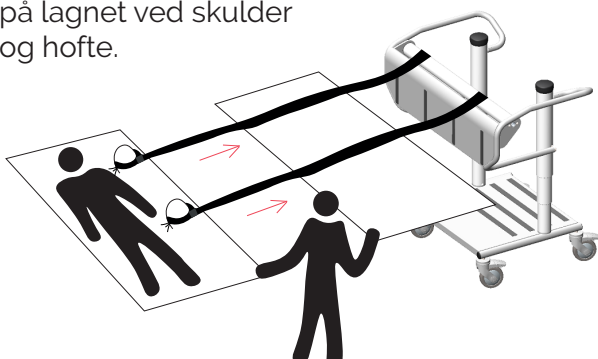


2. Leje og TransferAid justeres til samme højde og rykkes tæt sammen.

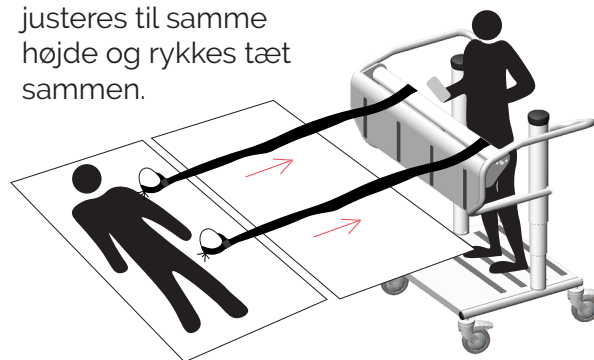

3. Patienten forflyttes nu vandret via TransferAid, AllConnect.

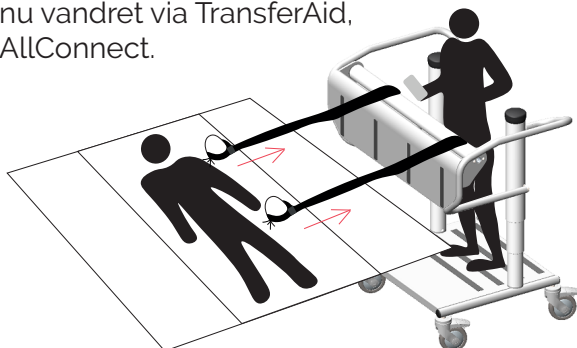

4. Patienten er nu sikkert forflyttet fra et leje til et andet leje.

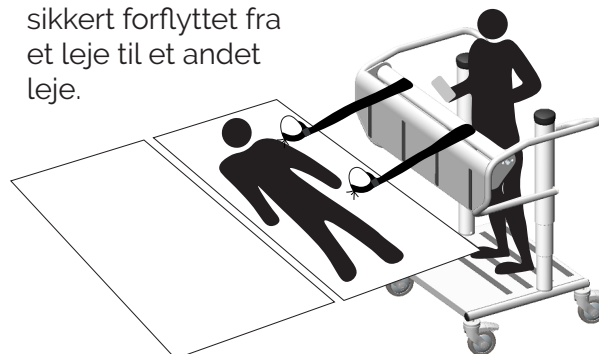

Tekniske specifikationer

Produkt	Varenr.: / HMI-nr.:	Højde	Dybde	Bredde / Længde	Egenvægt	Max patientvægt	Vandtæthed
Transferaid	100560 / 146260	64 - 104 cm	51,8 cm	87,6 cm	32 kg	200 kg	IPX6
AllConnect	100588 / -	-	-	1,7 meter	275 gram	-	-