

QUICKIE[®]
Live without limits.



QS 7^x

/ KOMPAKT SAMMENFOLDNING.

QS
SERIEN



QUICKIE QS7 X

REDEFINERET OG OPTIMERET SAMMENFOLDNING

"Lev uden grænser" – det er det, QUICKIE står for. QUICKIE Xenon² var et gennembrud, der omdefinerede, hvad en foldbar kørestol kunne være. Den satte en ny standard for letvægtsdesign og mobilitet og hjalp brugerne med at overvinde hverdagens udfordringer som f.eks. klodsede kørestole, kompliceret sammenfoldning og tunge løft.

I dag bygger vi videre på den arv med **QUICKIE QS7 X**. Og tager det endnu et skridt videre.

**SUPERKOMPAKT SAMMENFOLDNING.
ULTRALET I VÆGT. ENESTÅENDE OG STABILE
KØREEGENSKABER. MODERNE DESIGN.**

Hver eneste detalje i denne førsteklasses foldbare letvægtskørestol er blevet redesignet for at give dig én ting: Mere frihed med mindre anstrengelse.




Scan QR-koden og afprøv
vores nye QS7 X Visualizer.



TRANSPORT

NEM SAMMENFOLDNING MED INDBYGGET STABILITET

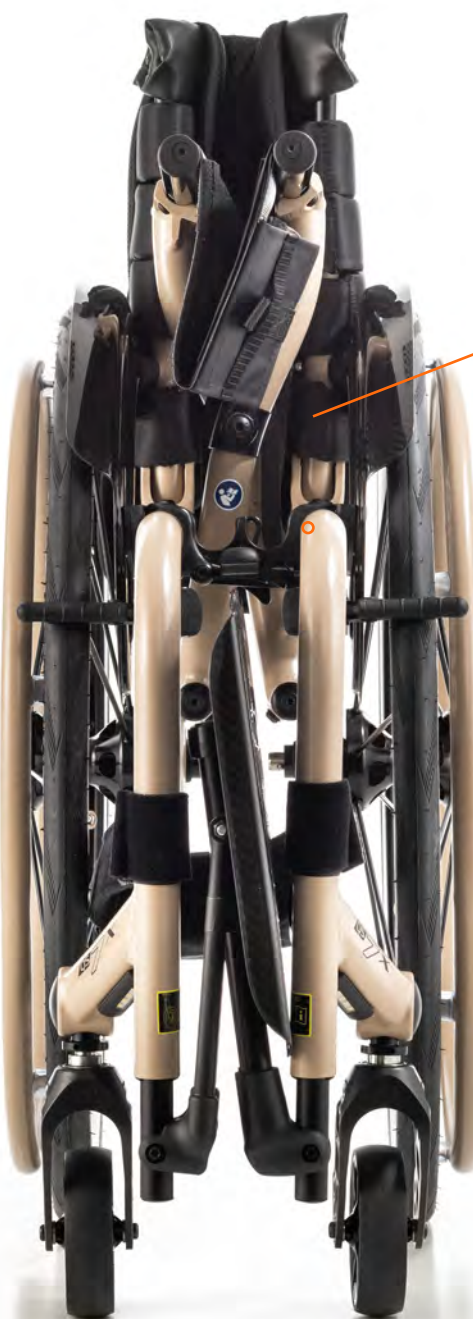

QS7 X er udstyret med vores innovative **FreeFold™**-teknologi, der sikrer en jævn og ubesværet sammenfoldning. Den optimerede kinetik garanterer en kontrolleret og flydende bevægelse, der gør håndteringen enkel og praktisk.

QS7 X opretholder en ensartet hjulvinkel, når den foldes sammen – og **forbliver stabil og opretstående**. Dette gør håndtering og transport nemmere, især ved hyppig sammenfoldning, så du kan placere den ved siden af dig og holde hænderne fri – for eksempel efter forflytning til din bil og før du lægger den på passagersædet.

FOLD-N-LOCK er standardudstyr på QS7 X og sikrer, at kørestolen forbliver sikkert sammenfoldet. Med et enkelt klik forbliver den kompakt, uden at man behøver at holde den lukket under løft eller opbevaring.





OP TIL 45 % MINDRE END EN STANDARD SAMMENFOLDNING

Den passer nemt ind på trange steder. Takket være sin ekstremt lave vægt gør QS7 X transporten hurtigere, nemmere og mere ubesværet end nogensinde før.



PASSER IND, HVOR DE FLESTE ANDRE IKKE GØR

Vi var pionerer inden for dette område. Nu sætter vi nye standarder: Den nye Front Fold-mekanisme på QUICKIE QS7 X folder forrammen, Svinghjulslinket, gaflen og svinghjulet sammen i én hurtig bevægelse, hvilket reducerer transportstørrelsen markant.*

* Fås kun til FF-rammen.





LET I VÆGT

FRA 6,7 KG TRANSPORTVÆGT

Hvordan bygger man en klar-til-brug foldbare kørestol, der kun vejer 6,7 kg, og alligevel sikrer enestående stabilitet? Det starter med avancerede materialer og den tekniske ekspertise, der kendetegner QUICKIE.

Forskellen mærker man med det samme. Som **den letteste foldbare aluminiumsramme fra QUICKIE** kræver hver eneste løft, forflytning og justering mindre kræfter.

TRANSPORTBESKYTTELSE

Ekstra beskyttelse på den udsatte akselbeslag og rygrør hjælper med at forhindre skader, når kørestolen transporteres eller opbevares uden hjul.



MATERIALER I RUMFARTSKVALITET

Rammen er fremstillet af aluminium i 7000-serien og byder på enestående styrke kombineret med en utrolig lav vægt. I forhold til 6000-serien, der anvendes i mange kørestole, muliggør den tyndere og lettere rør uden at gå på kompromis med holdbarheden og stabiliteten.

ØGET STABILITET OG RAMMESTIVHED

Et forbedret rammedesign – herunder tværstiver, akselstang og svinghjulsophæng – øger stivheden med 56 % sammenlignet med Xenon². En større del af din energi går direkte til fremadrettet bevægelse.

OPTIMERET RØR-DESIGN

Det patenterede rør-design fordeler belastningen effektivt og reducerer belastningspunkter, hvilket begrænser bøjning under pres. Den ovale form minimerer materialebrug, sænker vægten og forhindrer klemmen i at dreje.

Resultatet er en præcis, responsiv og yderst effektiv køreoplevelse.

PRÆCISIONSSTYRING

Det tredobbelt justerbare hjulsystem gør det muligt at finjustere vinkel, styring og højde for præcis kontrol og stabil kørsel. Mindre behov for korrektion. Mindre træthed.



KONFIGURERBARHED

FORDI ALLE KROPPE ER FORSKELLIGE

En kørestol fungerer bedst, når rammen passer til din krop og dine bevægelser. Den rigtige konfiguration forbedrer kropsholdningen og fremdriftseffektiviteten.

Derfor tilbyder QS7 X-serien **20 forskellige rammekonfigurationer** – flere end tilsvarende foldbare kørestole – samtidig med at den er let og stabil.

- **5 rammeversioner** Fast Forramme, Hybrid, Swing Away samt Front Fold og Pro-versionen
- **Flere rammevinkler**, der understøtter korrekt positionering, stabilitet og tyngdepunkt
- **2 forskellige rammeindsatser**, der hjælper med benpositionering og reducerer bredden fortil
- **Justerbar ryglænsvinkel** for en ergonomisk siddestilling (tilkøb)
- **Justerbar sædehøjde bagtil** for at optimere fremdrift og mindske belastningen
- **Justering af tyngdepunktet** for præcis og fleksibel positionering

Den **NYDESIGNEDE TVÆRSTIVER** passer perfekt ind under sædet og er næsten usynlig. Dette skaber et rent, minimalistisk udtryk med en åben ramme, som man normalt kun ville forvente af en kørestol med fast ramme.





SKRÆDDERSYET HJULGEOMETRI

Forholdet mellem sving- og drivhjul er afgørende for effektiviteten. Derfor er hver opsætning tilpasset din rammevinkel og indsats for at sikre en mere jævn køreoplevelse og effektiv fremdrift.



QS7 X - MINIMALISTEN

Vores letteste justér- og foldbare kørestol i aluminium. Elegant, minimalistisk design. Den åbne, faste forramme gør det nemmere at komme ind og ud af bilen. Fuldstændig justérbar, så den passer til dine personlige præferencer.



QS7 X HYBRID - DEN STÆRKE

Den forstærkede, faste forramme sikrer enestående stabilitet og kan bære brugere på op til 140 kg. Takket være sin styrke er den ideel til brug sammen med hjælpemotorer, mens de kraftigt vinklede rør gør det muligt at skifte fra bil til kørestol uden hjælp.



QS7 X-SERIEN

EN SERIE AF HIGH-PERFORMING FOLDBARE KØRESTOLE

Der findes en QS7 X, der passer lige til dig. Uanset hvilken af de fire funktionsrige modeller du vælger, byder QS7 X-serien på en sofistikering og elegance, der sikrer, at du altid skiller dig ud.

QS7 X MED FRONT FOLD - DEN MINDSTE

Designet til at passe perfekt og diskret ind i forrammens konstruktion.

QS7 X SA – ALLROUNDEREN

Udstyret med fodstøtter, der kan svinges til siden, hvilket gør det nemmere at sætte sig ned, især fra stående stilling. Når man fjerner fodstøtterne, kan man placere kørestolen tættere på, hvilket gør forflytninger nemmere og reducerer den samlede pakkestørrelse.



QS7 X PRO – EKSPERTEN

Pro-rammen har et fast-svejset ryglæn og svejsede akselstænger, hvilket reducerer antallet af bevægelige dele, reducerer vægten med 300 g og sikrer maksimal stabilitet. Anbefales til erfarne brugere, der ikke har behov for senere justering.





SMART TILBEHØR

GØR DIN KØRESTOL TIL DIN EGEN

NYE CARBON-SIDESTØTTER

Længere, formede sidestøtter i kulfiber, der sikrer bedre positionering og beskyttelse.



LED-LYS

De integrerede LED-lys smelter perfekt sammen med QS7 X-designet. Tre lysindstillinger - stærkt, svagt og blinkende - forbedrer synligheden, så du både kan se og blive set. Kan nemt tages af til opladning.

NY LETVÆGTS-AKSEL

Den nydesignede letvægts-aksel i titanium vejer 90 g mindre end standardakslen.



NY FODSTØTTE I ALUMINIUM

Lettere, nemmere at samle og enkel at justere. Fås som hel fodplade eller delt, med nem justering af vinkel, bredde og dybde.



OMOBIC

Ny kompakt aluminiumsbremse fra Omobic med jævn og let brug, der også er velegnet til personer med nedsat håndstyrke. Det ergonomiske greb og den riflede overflade forbedrer håndteringen og stabiliteten.



SIDDESTILLING

Hvis du har særlige siddestillingsbehov, kan du nemt opgradere din QS7 X med forskellige JAY-siddepuder og rygge. Vidste du, at du også kan få din JAY J3-ryg i samme farve som rammen? Din QS7 X vil se endnu flottere ud!

 **JAY**[®]

MODERNE DESIGN

MED ET PERSONLIGT PRÆG

Med sine integrerede svinghjuls-gaffler, den »skjulte« tværstang og et minimum af synlige beslag fremstår QS7 X **elegant og moderne** fra alle vinkler.

Nu er det op til dig at sætte dit individuelle præg på den:

- 22 farver at vælge imellem til både ramme og drivring
- Farvemuligheder for kantpolstringen
- Valgmuligheder for anodiserede eller pulverlakerede drivhjuls-gaffler
- Valgmuligheder for anodiserede eller pulverlakerede hjul
- Grafik på rammen



Empulse

DE PASSER PERFEKT SAMMEN:

QS7 X er den perfekte ledsager til enhver hjælpemotor.



DESIGN DIN EGEN **QS7 X** MED VORES 3D-VISUALIZER

Vil du se, hvad QS7 X har at byde på, hvordan din QS7 X kommer til at se ud, og hvor meget den vejer? Scan QR-koden og sammensæt din drømme-QS7 X i vores nye **3D-Visualizer**.



Scan QR-koden
og lær mere.

QS7 X tilbyder et bredt udvalg af både klinisk vigtige og livsstilsrelaterede tilvalg, der imødekommer en lang række behov.

For at få et komplet overblik over alle tilgængelige konfigurationer kan du se vores **katalog over tilvalg og tilbehør** eller læse mere her:



Scan QR-koden
og lær mere.

Nu hvor du har læst alt om QUICKIE QS7 X, synes vi, at du selv skal opleve den.

Book en afprøvning dag!



built4me

Er du på udkig efter noget unikt?

Vores Built-4-Me-team kan hjælpe dig med at skabe en helt unik QS7 X, der er helt i en klasse for sig! Spørg din forhandler for mere information.

TEKNISK DATA	QS7 X
Maks. brugervægt	QS7 X FF - 110 kg, QS7 X Hybrid - 140 kg (136 kg med crash test option), QS7 X SA - 125 kg
Sædebredde	320 - 500 mm (i 20 mm intervaller)
Sædedybde	340 - 500 mm
Sædehøjde fortil	400 - 570 mm (SA) / 400 - 560 mm (FF)
Sædehøjde bagtil	370 - 500 mm
Ryglænsenhøjde	250 - 475 mm
Ryglænsvinkel	fra -15 til +13 / 75°-103°
Total bredde	SB +180/240/270 mm ved 0°, 2°, 4° camber og 25" drivhjul. Den samlede bredde kan overstige 800 mm i visse konfigurationer.
Total længde	1150 mm
Total højde	1050 mm
Maks. vendediameter	760 mm
Maks. sikker hældning ved brug af parkeringsbremser	7°
Rammeversioner	Fast Forramme, Swing Away, Hybrid, Front Fold, Pro
Rammevinkel	SA 70°/80°/90° (110°/100°/90° EU), FF 80°/88°/92° (100°/92°/88° EU)
Svinghjul	3", 4", 5", 6", 7"
Drivhjul	24", 25"
Kørestolens vægt	Swing Away: fra 10,4 kg, Fast Forramme: fra 9,3 kg
Afmonteret vægt	Swing Away: fra 7,8 kg, Fast Forramme: fra 6,7 kg
Vægten på den tungeste del	2,1 kg
Aftagelige dele	Drivhjul (ved transport)
Rammefarver	22 farver
Crash testet	Ja (godkendt til transport i et køretøj i henhold til ISO 7176-19:2022)
Transport uden bruger	Fastgør kørestolen sikkert og stabilt i køretøjet (f.eks. bil eller fly)
Tilsluttet anvendelse og miljø	Til personer, der ikke kan gå, og som har begrænset mobilitet; indendørs og udendørs. Betjening af brugeren eller en ledsager.



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70 22 43 49
E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere oplysninger om de fulde specifikationer, tilvalg og tilbehør henvises til vores order form. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål.



Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.