




Next Level

En ny generation af toilethjælpemidler,
som skaber muligheder

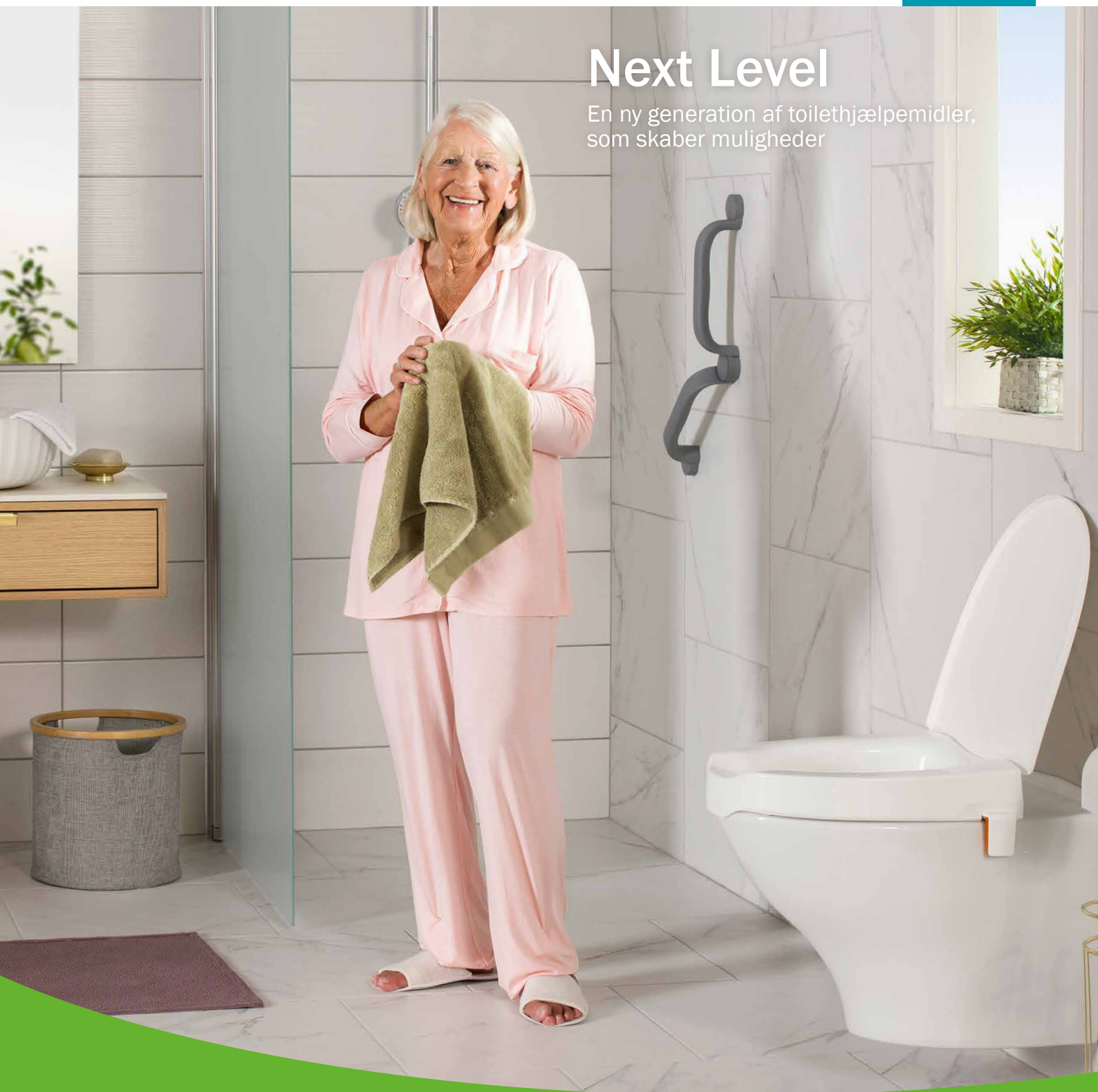

Etac My-Loo

Løstmonteret toiletforhøjer
med kantstop

 **etac**[®]



Etac My-Loo

Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop

I samarbejde med erfarne industrielle designere har vi udviklet den nye toiletforhøjer med kantstop – Etac My-Loo. Med sine bløde, svungne linjer og fremragende ergonomi har toiletforhøjeren ekstra komfort og et design, som passer perfekt i det moderne badeværelse.

Designet til funktion og komfort

Etac My-Loo er udviklet til at falde i med badeværelsesmiljøet og har et design, som giver optimal komfort og tilgængelighed. De bløde linjer og den store åbning gør My-Loo velegnet til de fleste brugere. Fås i to højder, med eller uden låg.

Nem at holde ren og frisk

My-Loo toiletforhøjer med kantstop består af få dele i holdbare materialer. Den er nem at tørre af med en blød klud. Hvis der er behov for separat rengøring, er det nemt at fjerne toiletforhøjeren og lige så nemt at sætte den tilbage igen.

Sikker og hurtig installation

Det tager kun nogle få sekunder at installere Etac My-Loo. Den fastgøres med to unikke kantstop, som er lette at tilpasse forskellige former for toiletter. Kantstoppenes ekstra store friktionsoverflader og fleksible materiale sikrer god fastgørelse til porcelænet.

Placer toiletforhøjeren på toilettet, og skub kanstoppene på plads. Klik, og installationen er færdig.



Etac My-Loo toiletforhøjer med kantstop

	HMI-nr.	Varenr.
6 cm	109592	80301520
10 cm	109594	80301521
6 cm med låg	109595	80301522
10 cm med låg	109596	80301523

Vægt

6 cm: 0,8 kg	10 cm: 1,1 kg
6 cm med låg: 1,2 kg	10 cm med låg: 1,4 kg

Max. brugervægt

190 kg

Materiale

Polypropylen og TPE

Design

Myra Industriell Design AB

myra

Vedligehold



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i vaske/desinfektionsmaskine ved 85°C i tre minutter.

Egenskaber



Enkel at holde ren og frisk

De glatte overflader er nemme at rengøre med en blød klud. Hvis der er behov for separat rengøring, er det nemt at fjerne toiletforhøjerens og lige så nemt at sætte den tilbage.



Designet til funktion og komfort

Toiletforhøjerens bløde former giver tryk støtte og stor komfort. Ekstra stor åbning og stor udskæring letter tilgængeligheden i forbindelse med personlig hygiejne.



Sikker, hurtig installation

Letmonterede kantstop med mange indstillingsmuligheder og store friktionsflader i en konstruktion helt uden skruer. Det gør, at My-Loo altid sidder sikkert og er nem at montere uanset toiletporcelæn.








Varianter

My-Loo toiletforhøjer med kantstop fås i to forskellige højder, 6 og 10 cm, med eller uden låg.



Mål

Ydre, bredde x dybde	36 cm x 40 cm
Åbning, bredde x dybde	23 cm x 36 cm
Sædehøjde	6 cm, 10 cm
Afstand mellem kantstop	29 cm - 38,5 cm

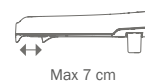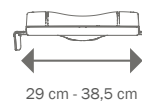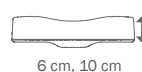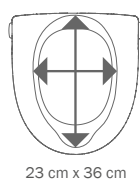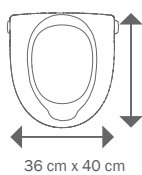



Version 1 - 2018 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Next Level

En ny generation af toilethjælpemidler, som skaber muligheder!

My-Loo toiletforhøjer med kantstop er den første i en helt ny generation af smarte produkter fra Etac. Ved at stille ekstremt høje krav til alt fra sikkerhed, komfort og fleksibilitet til rengøring og enkel montering kan vi præsentere en produktserie, som tilbyder helt nye og bedre løsninger.

Med denne nye produktserie flytter vi toilethjælpemidler op på et helt nyt niveau. At design driver udvikling har altid været vores ledende princip, og vi er overbeviste om, at Etac My-Loo med kantstop vil hjælpe brugere og behandlere med at skabe nye muligheder.

For seneste nyheder og opdateret produktinformation – se www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk – www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Skaber muligheder