


DK

# LEVA FLEX BASIS



## Trykaflastende madras med 1 skumkerne til forebyggelse af tryksår

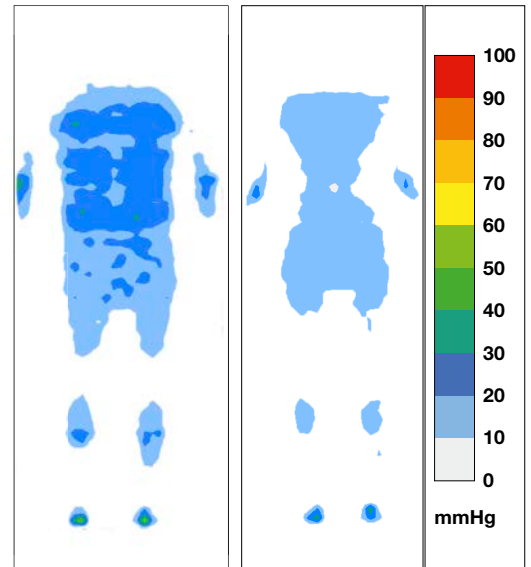

Trykmønster:  
Mand 23 år, 108 kg.

Trykmønster:  
Kvinde 64 år, 60 kg.

## Fakta:

**Størrelser:** 200 x 90 x 14 cm.  
200 x 88 x 14 cm.  
200 x 85 x 14 cm.

**Funktion:** Som hjælpemiddel til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med sårkategori 3.

**Anbefalet brugervægt:** op til 150 kg.  
Hvis madrassen anvendes sammen med Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.

**Kerner:** HR PUR Skum.  
Vægtfylde: 50 Kg/m<sup>3</sup>  
Hårdhed kPa: HR52120 – 3,0

**Efterlever:**  
Öko-TEX Standard 100,  
Produktklasse I, certifikat Nr. I 308026.

**Brand:** California TB 117-2013 sec. 3

**Betræk:** Medicinsk Bi-elastisk PU.

**Rengøring af betræk:** tørres af med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler.  
Maskinvask max 95 °C, tørretumbling.

**Garanti:** 2 år



Leva Flex madrassen er opbygget af 1 højkvalitets skumkerne.

Skumkernen er zoneopskåret for optimal trykfordeling af kroppens trykpunkter, opskæringen giver også optimal flexibilitet ved elevring af plejesengen samt ved anvendelse sammen med Levabo Turn All automatisk vendesystem.

Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem og hjemmeplejen.

Betrækket er et vandtæt, men åndbart, firevejs strækbart hygiejnisk betræk, det hygiejniske betræk er åndbart (dampgennemtrængeligt), hvilket bidrager til at reducere risikoen for hudmaceration.

Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider som gør det nemt at adskille madrassen for vask af betrækket. Betrækket er forsynet med fire håndtag for nem håndtering.

**Produkt nr. 200 x 90: 70164**  
**Produkt nr. 200 x 88: 70162**  
**Produkt nr. 200 x 85: 70163**

**LEVABO**  
medical



Levabo ApS  
Sverigesvej 20A  
8660 Skanderborg  
Tel.: +45 31 70 40 25  
Fax: +45 86 10 00 28  
Mail: info@levabo.dk  
www.levabo.dk