



R82<sup>®</sup>

# Wombat Living

Funktionel og højdejusterbar



# R82 Wombat Living

Wombat Living er en funktionel aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Den er perfekt til daglige aktiviteter som læsning og læring i skolen, leg med vennerne og at hjælpe med daglige gøremål derhjemme. Gulv til bord-justeringen gør den til en alsidig aktivitetsstol, og de tre størrelser kan ændres i takt med brugerens vækst, hvilket gør den til en stol, der kan bruges af det samme barn i flere år.

## Når design møder funktion

Gennem løbende udvikling og tilbagemeldinger fra kunder og terapeuter har Wombat Living alle de egenskaber og funktioner, en funktionel aktivitetsstol kræver. Wombat Living er en cool aktivitetsstol til både børn og teenagere. Et frisk look med moderne farver gør den velegnet til brug i ethvert indendørs miljø. Med det højdejusterbare stel går sædet helt ned til 29 cm over gulvniveau, og den forreste hældning gør det lettere med den stående forflytning, og sikrer at alle unødvendige og gentagne løft undgås.

Den justerbare rammehøjde giver også mulighed for øget aktivitet og deltagelse i dagligdagen, så som at spille bold med vennerne tæt på gulvet og spise måltider med familien ved middagsbordet. Wombat Living har et minimalistisk udseende, en diskret ramme og unikke stoffarver - og den passer ind overalt. Den fås i 3 størrelser og kan konfigureres til at imødekomme forskellige behov for støtte gennem forskellige puder og en bred vifte af tilbehør.



Det gennemtænkte design integrerer den vinkeljusterbare skubbebøjle med stolen. Brug skubbebøjlen til at hjælpe med at indstille højde- og vinkeljusteringen, og juster den op langs stolens ryg, når den ikke er i brug. Skubbehåndtag og skubbebøjle til montering på bagsiden af stolen fås som tilbehør.

Wombat Living er udstyret med enten fire 75 mm, 100 mm eller 125 mm hjul, hvilket gør stolen meget nem at manøvrere. Alle hjul er udstyret med bremses for at sikre en stabil forflytning ind og ud af stolen. Et centralt håndbetjent eller fodbetjent bremsesystem kan tilføjes til 100 mm hjul for nem og hurtig håndtering.

# Egenskaber

## Den rigtige støtte

Wombat Living er en aktivitetsstol med individuel tilpasning, så fokus kan være på de daglige aktiviteter som læsning og læring i skolen, leg med vennerne og at hjælpe med i de daglige gøremål derhjemme.

## Behagelig siddestilling

Standardhynderne giver god siddekomfort, mens de konturerede hynder kombinerer komfort med fremragende støtte til både sæde og ryg.

## Læn dig fremad

Med Wombat Living kan du læne dig fremad med op til -10° hældning foran. Ved at ændre sædets vinkel til den fremadgående vippeposition opfordres barnet til at flytte sin vægt fremad.

## Indbygget vækst

Wombat Living er en aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Afhængigt af brugerens funktionsniveau kan stolen designes med standardfunktioner, der passer til de specifikke behov.

## Vær uafhængig

Wombat Living har en lav indgangshøjde, mulighed for at ændre den forreste hældning og bremses på alle hjul, hvilket gør det nemt for brugeren at foretage en stabil og sikker forflytning.

## Mix og match

For at imødekomme forskellige behov fås hynderne i forskellige størrelser og former.

## Højdejustering

Wombat Living tilbyder tre forskellige måder at udføre højdejustering på. Via pedalen, monteret på rammen (gasfjeder) og via udløserhåndtaget, der er monteret på skubbebøjlen (gasfjeder). Begge kan aktiveres af plejepersonalet. Endelig kan en elektrisk enhed aktiveres af både plejer og bruger.

## Lav indgangshøjde

Wombat Living kan justeres fra en sædehøjde på 29 cm til 70 cm over gulvhøjde, afhængigt af størrelse og konfiguration.



# Bland og match!

Wombat Living er en aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Afhængigt af brugerens funktionsniveau kan stolen designes med standardfunktioner, der passer til de specifikke behov. For nogle brugere er en stol med færre tilbehørsdele og enkle standardfunktioner passende. Andre kan have behov for en stol med mere tilbehør og tekniske funktioner, som en elektrisk enhed til højdejustering.

## Betræk og farver

Betrækket fås i tre farver og er åndbart og vandafvisende for ekstra komfort. Både sæde- og rygbetrækkene behandles for at afvise tør jord og uforudsigelig spild og stænk. Enhver væske, der spildes, kan tørres af, og tør jord kan let børstes af. Nu kan du leve, arbejde eller lege med mindre bekymring. Et vaskbart inkontinenssædebetræk fås som tilbehør.

Petroleum



Rød



Grå



Grå kontureret



## Det handler ikke kun om at sidde

Hvis du sætter lige så stor pris på god siddekomfort, som vi gør, er Wombat Living stolen noget for dig! Hynderne fås i forskellige størrelser og former, så alle behov med hensyn til kropsholdning tilgodeses. Hynderne giver god siddekomfort og fås også som konturerede hynder, der kombinerer komfort med fremragende støtte for både sæde og ryg. Hvis ekstra støtte ønskes, kan der suppleres med vores tilbehør. Når man sidder, handler det om at sidde med den rette støtte til deltagelse i aktiviteter og man skal sidde godt. Derfor er Wombat Living dit næste valg.

En god siddestilling skal:

- Fremme brugen af overkroppen til aktiviteter som håndskrift, spise og drikke
- Fremme brugen af kommunikationshjælpemidler og barnets taleevne
- Fremme evnen til at lege og socialisere med jævnaldrende
- Reducere behovet for hjælp



## Sådan måles brugeren

Dette er en simpel guide til at sikre, at stolen er korrekt konfigureret til brugeren. For at opnå de korrekte mål er det vigtigt, at brugeren ligger på et fast underlag med hofter, knæ og ankler bøjet 90 grader.

Wombat Living mål		1 Gas & el	2 Gas & el	3 Gas & el
	Sæddebredde	300 mm	370 mm	420 mm
	Sædedybde	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
	Ryghøjde	280-340 mm	310-380 mm	390-475 mm
	Ryghøjde (høj ryg)	360-430 mm	395-460 mm	460-550 mm
	Sædehøjde*	230-610 mm	230-610 mm	330-630 mm
	Max. brugervægt	45 kg	45 kg	70 kg
	Rygvinkel	0° - 28°	0° - 28°	0° - 33°
	Sædevinkel	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 22°
	Stellængde	650 mm	650 mm	650 mm
	Stelbredde	550 mm	550 mm	550 mm
	Vægt	18 kg	18,5 kg	23,5 kg

\*Målt med 75 mm forhjul. Se flere mål på vores hjemmeside.

	Varenr.	HMI-nr.
Wombat Living med gas str. 1 (100 mm hjul, m CB, skubbebøjle, antracitgråt stel)	31950123121-00	137547
Wombat Living med el str. 1 (100 mm hjul m. CB, skubbebøjle, antracitgråt stel)**	31950123421-00	140306
Wombat Living med gas str. 2 (100 mm hjul m. CB, skubbebøjle, antracitgråt stel)	31950223121-00	136561
Wombat Living med el str. 2 (100 mm hjul m. CB, skubbebøjle, antracitgråt stel)	31950223421-00	136552
Wombat Living med gas str. 3 (100 mm hjul m. CB, skubbebøjle, sort stel)**	31950303121-00	140303
Wombat Living med el str. 3 (100 mm hjul m. CB, skubbebøjle, sort stel)	31950303421-00	136555

\*\*Denne model lagerføres ikke, hvorfor der må påregnes op til 4 ugers leveringstid.



# R82 Wombat-familien

Vi har to forskellige aktivitetsstole i Wombat-familien, så det er vigtigt at vælge den rigtige til dig. Vi har listet de vigtigste punkter op til hver aktivitetsstol, så du kan træffe et rigtigt valg, når du vælger, hvilken aktivitetsstol der passer til dig.



## Wombat Solo

Wombat Solo er udviklet for at sikre optimal brugerafhængighed. Med enkelthed i tankerne, er den designet for at gøre det muligt for at passe ind i mange miljøer, så brugeren kan føle sig fuldt inkluderet.

- Justering af gasfjederhøjde
- Lav indgangshøjde med 12 cm bevægelsesområde i hver af de 6 kolonnepositioner
- Aktiveringshåndtag under sædet, pedaler på rammen samt håndtag på skubbebøjlen til højdejustering og hældning af sædet
- 90° drejning af sædet aktiveres af et håndtag under sædet



## Wombat Living

Wombat Living er en aktivitetsstol, som sikrer optimale arbejdsforhold for plejepersonalet. Den ubesværede justering af sædeoverfladehøjden gør det muligt for brugeren at være aktiv under forflytninger og blive løftet op for at være i øjenhøjde med deres jævnaldrende.

- Justering af effekt, gas eller hydraulisk fjeder
- Lav indgangshøjde fra 29 cm til 70 cm over gulvhøjde, afhængigt af størrelse og konfiguration med et bevægelsesområde på 41 cm
- Aktiveringshåndtag på skubbebøjlen til højdejustering og hældning af sædet

## Tilbehør



### Hynder og betræk

Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles. Bestillingsnøgle for farvevalg: Grå: XX = 28. Rød: XX = 24  
Petroleum: XX = 25  
OBS. Petroleum og rød hynde er ikke lagervarer og længere leveringstid må derfor påregnes.

Ryghynde str. 1 .....	31955031-2XX
Ryghynde str. 2 .....	31955032-2XX
Ryghynde str. 3 .....	31955033-2XX
Sædehynde str. 1 .....	31955021-2XX
Sædehynde str. 2 .....	31955022-2XX
Sædehynde str. 3 .....	31955023-2XX
Betræk ryghynde str. 1 .....	31955611-2XX
Betræk ryghynde str. 2 .....	31955612-2XX
Betræk ryghynde str. 3 .....	31955613-2XX
Betræk sædehynde str.1.....	31955621-2XX
Betræk sædehynde str.2.....	31955622-2XX
Betræk sædehynde str.3.....	31955623-2XX



### Ryghynder, inkontinens

Hynde med vaskbart betræk til inkontinente brugere. Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles.

Standard ryghynde, inkontinens:	
Str. 1 .....	31955031-223
Str. 2 .....	31955032-223
Str. 3 .....	31955033-223
Contour ryghynde, inkontinens:	
Str. 1 .....	31955031-237
Str. 2 .....	31955032-237
Str. 3 .....	31955033-237
Inkontinensbetræk til standard ryghynde	
Str. 1 .....	31955611-223
Str. 2 .....	31955612-223
Str. 3 .....	31955613-223
Inkontinensbetræk til contour ryghynde	
Str. 1 .....	31955611-237
Str. 2 .....	31955612-237
Str. 3 .....	31955613-237



### Contour hynder og betræk

Contour hynderne fås kun i farven grå. Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles. For ekstra betræk til sædehynden, vælg ovenfor.

Contour ryghynde str. 1 .....	31955031-238
Contour ryghynde str. 2 .....	31955032-238
Contour ryghynde str. 3 .....	31955033-238
Contour sædehynde str. 1.....	31955021-238
Contour sædehynde str. 2.....	31955022-238
Contour sædehynde str. 3.....	31955023-238
Betræk Contour ryghynde str.1.....	31955611-238
Betræk Contour ryghynde str.2 .....	31955612-238
Betræk Contour ryghynde str.3 .....	31955613-238



### Høj ryg (ombygningkit)

Giver mulighed for en højere ryg, samt forudsætning for at montere Bækkenstøtter. Høj ryg kræver ikke anden type hynder.

Til Wombat str. 1.....	3195560-1
Til Wombat str. 2.....	3195561-1



### Sædehynder, inkontinens

Hynde med vaskbart betræk til inkontinente brugere. Alle hynder leveres med betræk. Ekstra betræk kan bestilles.


Sædehynde, inkontinens:	
Str. 1 .....	31955021-223
Str. 2 .....	31955022-223
Str. 3 .....	31955023-223
Contour sædehynde, inkontinens:	
Str. 1 .....	31955021-237
Str. 2 .....	31955022-237
Str. 3 .....	31955023-237
Inkontinensbetræk til sædehynde	
Str. 1 .....	31955621-282
Str. 2 .....	31955622-282
Str. 3 .....	31955623-282



### Løftehåndtag, sæt

For at opnå optimal arbejdsposition. Fås i enten opklappelig eller fast udgave.

Opklappelige løftehåndtag.....	3195145
--------------------------------	---------

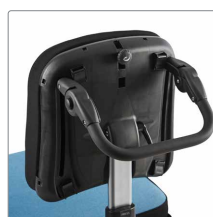


### Skubbebøjle

For at opnå optimal arbejdsposition. Fås til Wombat str. 3.

Skubbebøjle til str. 3.....	3195147
-----------------------------	---------


## Tilbehør

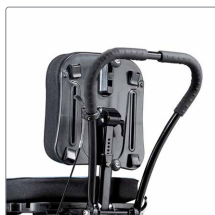

### Skubbebøjle, vinkeljusterbar

Brug også skubbebøjlen, som hjælp ved justering af højde og vinkel. Monteret som standard.

Str. 1 + 2 ..... 3195148-1  
Str. 3 ..... 3195148-3

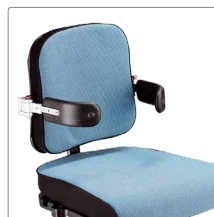

### Sidestøtter, svingbare

Sikrer præcis positionering af truncus. For yderligere information henvises til afsnittet om siddestøtter under Barn/Junior på vores hjemmeside.



### Hovedstøtte


Find den rigtige hovedstøtte i vores store udvalg, for at korrigere hovedets stilling. For yderligere information henvises til afsnittet om hovedstøtter under Barn/Junior på vores hjemmeside.



### Rygforlænger

For ekstra støtte af den nedre del af ryggen. Til Wombat str. 3.  
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 3 (6 x 27 cm) ..... 3195140-60

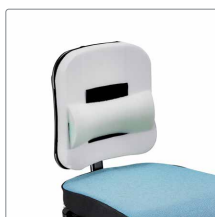

### Ryggkile

For ekstra rygstøtte.  
Tykkelse i midten: 1 cm.  
Tykkelse i enderne: 2 cm.  
Mål angivet (Længde x Bredde).

Str. 1 (24 x 9 cm) ..... 31955030-1  
Str. 2 (28 x 11 cm) ..... 31955030-2  
Str. 3 (35 x 11 cm) ..... 31955030-3



### Bækkenstøtte, flad

For stabilisering af bækkenet. Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.


Str. 1+2 ..... 3195140-61  
Str. 3 ..... 3195140-63



### Sidestøtter, faste (sæt)

For ekstra støtte og sikkerhed. Kun til Wombat Living 2 str. 1+2)  
Mål angivet (Højde x Dybde).

One size (15 x 11 cm) ..... 3195121

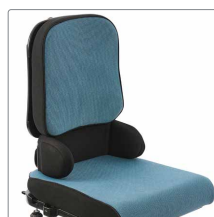

### Bækkenstøtte med sider

Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.

Str. 1 ..... 3195140-64  
Str. 2 ..... 3195140-65  
Str. 3 ..... 3195140-66



### Faste sidestøtter, inkontinens

For ekstra støtte og sikkerhed. Kun til Wombat Living str. 1+2  
Dybde: 11 cm.

Faste sidestøtter, inkontinens ..... 3195121-23  
Inkontinensbetræk ..... 3195121-623




### Hoftestøtter, sæt

Betræk til hoftestøtter fås separat.  
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 1+2 (8 x 19 cm) ..... 3195110-1  
Str. 3 (10 x 25 cm) ..... 3195111-1  
Plade for mindre SB ..... 3195110-SM  
Betræk str. 1+2 ..... 3195110-60  
Betræk str. 3 ..... 3195111-60



## Tilbehør

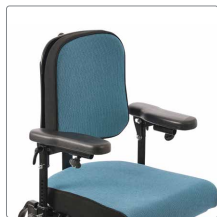

### Armlæn

Giver støtte til armene.  
Mål angivet (Højde x Bredde x Længde).


Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm)..... 3195112-1  
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm).....3195113-1  
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm) med dobbelt  
armstøttestang..... 3195114  
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm) med dobbelt  
armstøttestang..... 3195115



### Abduktionsklods

Forhindrer brugeren i at glide ned af stolen,  
samt holder benene adskilt.  
Mål angivet (Højde x Bredde x Dybde).

Str. 1 (9 x 9 x 9 cm).....3195130-1  
Str. 2 (9 x 9 x 12 cm) ..... 3195130-2  
Str. 3 (9 x 9 x 15 cm) ..... 3195130-3  
Str. 4 (9 x 9 x 18 cm) ..... 3195130-4

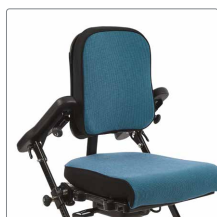

### Armlæn, Swing away

Sving armlæne væk for at lette forflytning  
til/fra stolen og gør det muligt at anvende  
stolen tæt på et bord, uden at armlæne  
er i vejen. Et kit gør det muligt at montere  
swing-away led på eksisterende armlæn.w

Kort ..... 3195112-1S  
Langt..... 3195113-1S  
Ombygningskit ..... 3195112-SW



### Abduktionsklods, knæ

Kan suppleres med betræk med polstring.

One size ..... 3195230-10  
Betræk ..... 3195430-10260



### x:panda armlæn

Armlæne passer bedst på Wombat str.  
1+2, men kan også benyttes på str. 3. Skal  
monteres med armlænsbeslag 3195112-xp.

Str. 1 uden betræk ..... 318910615-1  
Str. 1 med sort aftørbart betræk..... 31905013-70  
Str. 1 med sort betræk ..... 31905013-80



### Abduktionsklods, inkontinens

Kan suppleres med betræk med polstring.

Abduktionsklods, inkontinens ..... 3195230-23  
Betræk ..... 3195430-10123



### Armlænsbeslag


Til montering af x:panda armlæn.

Armlænsbeslag ..... 3195112-xp



### Veste & seler

Veste og seler sikrer god støtte og korrekt  
positionering. For yderligere information,  
henvises til afsnittet om veste og seler  
under Barn/Junior på vores hjemmeside.

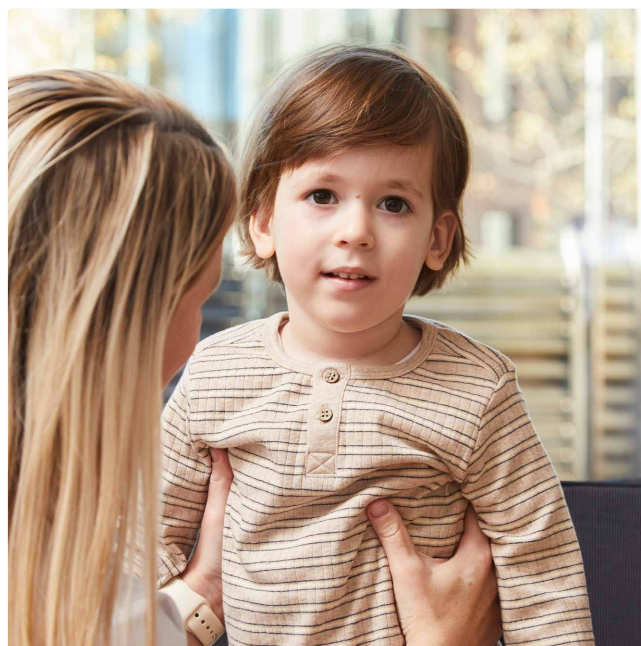


## Tilbehør



### Bord type 4, uden kant

Tonet plast. Giver støtte til armene.  
Monteres med 2 stænger. Mål angivet  
(Bredde x Dybde).

Til str. 1+2 (60 x 34 cm) ..... 3195125

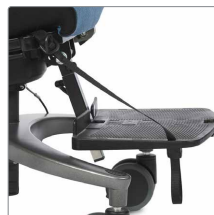

### Universalstrop

Så bruger eller hjælper kan trække i strop-  
pen og klappe fodpladen op.

Universalstrop..... 3195145-STRAP



### Bord type 5, uden kant

Tonet plast. Giver støtte til armene.  
Monteres med 2 stænger. Mål angivet  
(Bredde x Dybde).

Til str. 3 (60 x 46 cm) ..... 3195126



### Stang til fodplade

Det korte monteringsrør gør, at fodpladen  
kan komme længere op under stolen. Ekskl.  
stang til fodplade. Monteret som standard  
på Wombat Living 2.

Str. 1 + 2: 20 cm (L) ..... 3182927  
Str. 3: 28 cm (L) ..... 3182787



### Bord type 8, med kant

Ydermål: 44 x 34 cm (BxD). Kan benyttes på  
str. 1+2.

Bord type 8, med kant til str. 1+2 ..... 318976350



### Fodkassekit til hel fodplade

Hjørnerne boltes fast på den eksisterende  
fodplade, og polstret monteres i kassen.  
Hjørnerne kan bruges på forskellige fodplade-  
r og måler 15 cm i både dybde og højde.  
Polstret er unikt for hver størrelse fodplade,  
så det passer til den enkelte fodplades  
bredde. Muligheden for at lave en fodkasse  
kan bruges til både eksisterende og nye  
fodplader.

Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring:

- Til Wombat fodplade str. 1 ..... 3195145-1BOX  
- Til Wombat fodplade str. 2 ..... 3195145-2BOX  
- Til Wombat fodplade str. 3 ..... 3195145-3BOX  
Fodpladepolster:

- Til Wombat fodplade str. 1 ..... 3195145-1PAD  
- Til Wombat fodplade str. 2 ..... 3195145-2PAD  
- Til Wombat fodplade str. 3 ..... 3195145-3PAD  
Polster til stang, one size (12 cm) ... 3195145-150  
Ankelsele til fodkasse, one size ..... 3195145-20



### Fodplade med Standard indfæstningsrør

Det korte monteringsrør gør, at fodpladen  
kan komme længere op under stolen.  
Monteret som standard på Wombat Living  
2 str. 3.

Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ..... 3195145-2  
Str. 3: 41 x 24 cm (BxD) ..... 3195145-3  
Str. 4: 48 x 24 cm (BxD) ..... 3195145-4



### Fodplade med kort indfæstningsrør

Det korte monteringsrør gør, at fodpladen  
kan komme længere op under stolen. Ekskl.  
stang til fodplade. Monteret som standard  
på Wombat Living 2 str. 1+2.

Str. 1: 31 x 19 cm (BxD) ..... 3195145-1  
Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ..... 3185145-2



### EI-kit

Til ændring af Wombat Living hæve-/sænke-  
funktion fra gasfjeder til en udgave med el.

Str. 1+2 ..... 3195551  
Str. 3 ..... 3195551-3

## Tilbehør



### Hjul med retningsstabilisator

Kun 100 mm hjul.

100 mm hjul, retningsstabilisator..... 3189592-KIT



### Fodbetjent centralbremse kit

Monteres på de bagerste hjul. Til 100 mm hjul.

Fodbetjent centralbremse kit  
til str. 1.....31890012-1  
Fodbetjent centralbremse kit  
til str. 2+3 .....31890012-2



### 125 mm hjul

125 mm hjul..... 31890018



### Håndbetjent centralbremse kit

Håndbetjent centralbremsekit  
til str. 1+2+3.....31890011-3




### Tipsikring

Tipsikring til 75 og 100 mm hjul ..... 31890007  
Tipsikring til 125 mm hjul..... 31890007-1



### Lås for højdejustering

Lås for højdejustering til str. 1+2..... 31890024

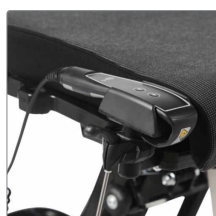

### Beslag til håndbetjening

Monteres foran på sædet. Håndbetjeningen klikkes let på plads vha. en magnet.

Beslag til håndbetjening.....3195541



### Trædepedal

Hjælper med at hæve forenden op, når man skal have flyttet stolen over en dørtærskel el. lign.

Trædepedal ..... 31890025



### Fix-lock på plade til sæde

Indeholder 2 beslag med hver to fix-lock.

Fix-lock på plade til sæde..... 3195710





Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

Etac A/S

+45 79 68 58 33

[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk)

[www.etac.dk](http://www.etac.dk)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities