

rea | *Azalea* (A) & *Bellis* (B) tilbehør



Invacare® Rea komfortkørestole har en bred vifte af tilbehør, der giver brugerne mulighed for at opnå en optimal støtte og siddestilling samt større komfort. Tilbehøret kan anvendes på de fleste Rea komfortmodeller, hvilket giver terapeuterne mulighed for at finde netop den model, der passer brugeren bedst. Ved at tilbyde bedre støtte vil brugeren blive i stand til at deltage i foretrukne aktiviteter i en mere afslappet og behagelig siddestilling uden at skulle bruge unødigt energi på at bevare en hensigtsmæssig positionering.

Under tilbehøret i denne brochure finder du et A eller et B, som refererer til henholdsvis **Azalea** og **Bellis**. En del af tilbehøret er desuden kompatibelt med Invacares mellemaktive kørestole.



Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

Rygge



Rygplade (Flex2)

Giver en fast og stabil støtte kombineret med en rygpude. Rygpladen er individuelt højdejusterbar og den øverste del af pladen kan forhøje rygstøtten eller afmonteres helt. **(B)**



Justerbar stroppryg (Flex2)

Ryggen kan ved hjælp af velcrostopper formes individuelt og eventuelt også justeres i højden. Kan monteres med rygslag eller rygpude. **(B)**



Rygplade (Flex3)

Giver en fast og stabil støtte kombineret med en rygpude. Rygpladen er individuelt højde- og breddejusterbar. **(A)**



Multijusterbar stroppryg (Flex 3)

Ryggen kan ved hjælp af velcrostopper formes individuelt og også justeres i højden og bredden, eventuelt assymmetrisk. Kan monteres med rygslag eller rygpude. **(A)**



Komfort rygslag

Et blødt polstret rygslag, der automatisk formes efter stroppryggenes facon og brugerens kropskonturer. **(A) (B)**



Laguna rygpude

Laguna rygpuden giver med dens formede sider i skum brugeren en afslappet og komfortabel støtte. **(A) (B)**



Mistral² rygpude

Mistral² rygpuden giver med sine ekstra store og stabile sidestøtter brugeren en optimal siddestilling med god støtte og samtidig en stor frihedsgrad for bevægelse af armene. **(A) (B)**



Passad² rygpude

Passad² rygpude giver stabilitet og komfort og er især velegnet til brugere med stort behov for støtte ved skuldre og bækken. **(A) (B)**



Rygpude høj

Den høje rygpude er egentlig samme pude som **Passad²** rygpuden, blot 100 mm højere og designet til høje brugere. **(A) (B)**



Vicair[®] Multifunctional

En trykafastende og positionerende rygpude, der tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Rygpuden er opdelt i separate rum fyldt med **Vicair[®] Soft Cells[™]**. **(A) (B)**

Skubbehåndtag



Skubbebøjle

Højdejusterbar, ergonomisk udformet skubbebøjle, der giver et godt greb for hjælperen. **(B)**



Skubbehåndtag

Højdejusterbare skubbehåndtag monteret med en stabiliserende rygbøjle. **(A)**



Skubbehåndtag

Højdejusterbare skubbehåndtag monteret med en stabiliserende rygbøjle. **(B)**

Sæde- og rygtilt



Hjælperbetjent sædekip- og rygtilt

Ryggen og hele sædeenheden tiltes vha. gaspatron, når udløserhåndtaget aktiveres. Sædekip kan låses i ønsket vinkel vha. låsepal. (Er standard ved levering) **(A) (B)**



Elektrisk sæde- og rygtilt

Ryggen og hele sædeenheden tiltes elektrisk. Kan benyttes af såvel bruger som hjælper. Kan låses i ønsket vinkel på selvbetjeningen. **(A) (B)**

Sæde og sædepuder



Glidesæde

Kan lette positioneringen af brugeren, hvis vedkommende ikke er placeret helt tilbage på sædet. Udløses vha. lille greb på højre side. **(A)**



Floshape sædepude

Konturformet 100 mm standardpude i latexskum skåret i lave profiler. Pudens form følger kroppens former, og giver derved en god trykafledning. Leveres med både plys og dartex betræk. **(A) (B)**



Inkontinensbetræk

Det løse inkontinensbetræk passer til standardpuderne. Kan vaskes ved 60°. **(A) (B)**



Vicair® Multifunctional

En trykafledende og positionerende sædepude, der tilpasses individuelt til den enkelte bruger. **(A) (B)**

Benstøtter og fodplader



Vinkeljusterbare benstøtter
med justerbare (alt. faste) fodplader. Længdekompenserende ved vinkling af benstøtten. **(A) (B)**



80° benstøtter
Benstøtter med justerbare (alt. faste) fodplader og med sving ind/sving ud funktion, der let aktiveres vha. håndtagets låsemekanisme. Kan benyttes af såvel bruger som hjælper. **(A) (B)**



90° benstøtte
Kan anvendes til kørestole med små forhjul. **(A) (B)**



Centralbenstøtte
Benstøtten er højde- og vinkeljusterbar og giver mulighed for en helt individuel ben- og fodpositionering. **(A) (B)**



Amputationsbenstøtte
Giver brugeren perfekt støtte, er højde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving ind/sving ud funktion. **(A) (B)**



Gipsbenstøtte
Stabil 90° gipsbenstøtte med justerbare bløde lægplader og fodstøtte. **(A) (B)**

Fodplader



Vinkelstilbare fodplader
Fodpladerne kan indstilles i dybde, højde og vinkel. Her vist med hælrem, som er standard på komfortstole. **(A) (B)**



Fodpladeforlænger
Fodpladeforlænger giver mulighed for bedre støtte i dybden. **(A) (B)**



Hel fodplade
Den hele fodplade kan svinges op til siden eller tages helt af sammen med den ene benstøtte. Fodpladen kan vinkel- og dybdereguleres. **(A) (B)**



Faste fodplader
Faste fodplader, der kan forblive oppe i opklappet tilstand. **(A) (B)**

Armlæn



Aftagelige armlæn

Komfortable og højdejusterbare armlæn opadvinklet bagtil for ekstra støtte, når kørestolen er tilet bagud. **(A) (B)**



Armlæn med brede armlænsputer

Højdejusterbare og aftagelige armlæn med lange armlænsputer. Puderne er afrundede fortil for bedre støtte i forbindelse med forflytning. **(A) (B)**



Armlæn med ekstra polster

Blødt armlæn polstret ud i ét foroven og indvendig. **(A) (B)**



Hemiplegiarmlæn

Højde-, dybde- og vinkeljusterbare for at give optimal komfort for brugeren. **(A) (B)**



"Nice" flip-up armlæn

Højdejusterbare, aftagelige flip-up armlæn med brede eller smalle armlænsputer. Bredejusterbare ± 10 mm i hver side. **(B)**



Betræk til tøjbekytter

Skjuler tøjbekytteren. Dartex polstring og det bløde fyld giver øget komfort. **(A) (B)**



Indlægspude til tøjbekytter

20 mm tyk pude, der reducerer sædebredden. Monteres på den øverste del af tøjbekytteren således, at den ikke kommer i vejen for sædepudden. **(A) (B)**

Sæde- og rygoptioner



Abduktionskile

Blød, oval abduktionskile til placering mellem lårene. Dybdejusterbar og aftagelig. **(A) (B)**



Nakkestøtte

Har samme monteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for at give god støtte til nakke og nederste del af hovedet. **(A) (B)**



Hovedstøtte sideværts justerbar

Med vinkeljusterbare "vinger" på siderne. Hovedstøtten er dybde-, vinkel-, højde- og sideværts justerbar og kan dermed indstilles individuelt til den enkelte bruger. **(A) (B)**



Vaskbart overtræk

For lettere vedligeholdelse af nakke- og hovedstøtte kan anskaffes et aftageligt og vaskbart overtræk af Dartex. **(A) (B)**

Sæde- og rygoptioner



Hovedstøtte med hagestyr

Har samme monteringsbeslag som standard hovedstøtten. Dog giver udformningen af selve hovedstøttepuden mulighed for optimal støtte til den mere passive bruger. **(A) (B)**



Overgangsdække

Dækker for et eventuelt mellemrum mellem rygplade og sæde. **(A)**



Kiler

Faste positioneringskiler til at give let støtte under sædepude eller bag rygpude. **(A) (B)**



Fast kropsstøtte

Kropsstøtten er bredde og dybdejusterbar samt aftagelig. **(A) (B)**



Kropsstøtte multijusterbar

Er med sine mange indstillingsmuligheder let at forme til den enkelte bruger. Passer til alle typer rygge og rygpuder. **(A) (B)**



Kropsstøtte svingaway

Kropsstøtte med svingaway beslag fåes både med fast støttede pude og med en mere komfortabel, multijusterbar pude. **(A) (B)**



Kropsstøtte med forlængerarm

Giver en 50 mm højere placering af kropsstøtten end standard kropsstøtte. Specielt velegnet til høje brugere. **(A) (B)**



Selevest

Elastisk vest i str. small. Placeres over sternum og gerne i kombination med hoftese. **(Azalea Minor)**



Monteringsbeslag for sele

Monteres sammen med nakkestøtte eller hovedstøtte. Sele/vest kan monteres korrekt over skulderhøjde. Se iøvrigt Invacares sele/vbælte brochure. **(A)**

Forhjulsophæng og forhjul



Quick release

Forhjulet kan let afmonteres ved at trykke på Quick release, hvilket gør *Rea Bellis* mindre ved transport. **(B)**



Chassisforlænger

Flytter forhjul 50 mm fremad for øget stabilitet. **(A)**



Forhjul


Fås i størrelserne 5" – 8" og i bløde, massive og luftfyldte dæktyper. **(A) (B)**



Drivringe

Fås i følgende materialer: Aluminium og plast som standard. Rustfri stål, skum eller Black Grip som special ordre. **(A) (B)**

Sikkerhed

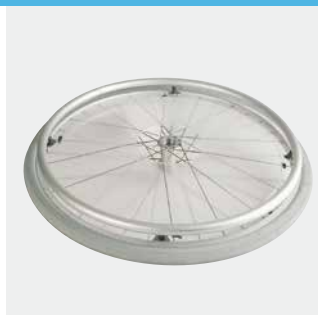


Egerbeskyttere

Monteres for at beskytte brugerens fingre. Fås i "Frosted". **(A) (B)**



Enhåndsbremse

Kan monteres i højre/venstre side. Når bremsen aktiveres, bremses stolen på begge hjul. **(B)**

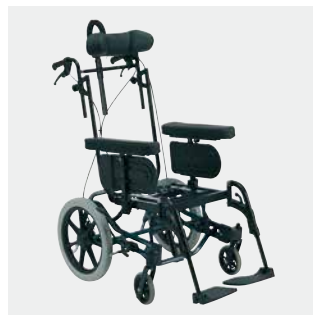

Tromlebremser til 16"/22"/24" drivhjul

Sikrer hjælperen fuld kontrol af kørestolens bremses. **(A) (B)**



Hoftesele

Holder brugeren tilbage i sædet på kørestolen. **(A) (B)**



Reflekser

Gør stolen synlig i mørke. **(A) (B)**



Armlæn med autolock

For at blive godkendt på TÜV er autolock standard på armlæne. Autolock fastholder armlænet i korrekt position. **(A) (B)**

Øvrige muligheder



Bord

Det aftagelige bord er gennemsigtigt og med bløde polstringer ved albuerne. Justerbart i dybden. **(A) (B)**



Fingerskruer

Erstatter skruer på benstøtte og armlæn. **(A) (B)**



Stokkeholder

Med plads til to stokke. **(A) (B)**



Bremseforlænger

Forlænger greb monteres på bremsen for at give en længere kraftarm og lette selve bremsefunktionen. **(A) (B)**

alber Hjælpemotorer



Alber e-motion®

Diskret hjælpemotor styret vha. drivringene. Giver brugeren terapeutiske fordele og samtidig langt større frihed til at komme rundt. **(A) (B)**



Alber e-fix®

Konverterer en manuel kørestol til en letvægts el-kørestole. e-fix demonteres let og kan medtages i eks. bagagerum. **(A) (B)**



Alber viamobil®

Gør køreturen lettere og mere skånsom for hjælperen og giver overskud til længere og mere behagelige ture for brugeren. **(A) (B)**

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2013 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Rea tilbehør - DK - 04/2013

For yderligere information om kompatibilitet henvises til Rea's hjemmeside eller kompatibilitetskataloget.



Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International. Rea Azalea er designet med DSS (Dual stability system), hvilket vha. glidende balancepunkt øger stabiliteten og sikkerheden, når stolen er kippet eller ryggen er tiltet bagover.



Yes, you can.®