



## Altid klar til brug.

Liko™ skinneoplading giver medhjælperen frihed. Liftenheden oplades konstant langs hele skinnerne. Med Likos skinneoplading er det ikke længere nødvendigt at dobbelttjekke batteriets status, eller køre liften hen til en opladestation. Med skinneoplading er loftliften altid fuldt opladet og klar til brug.

Det unikke Liko™ skinneopladingssystem er patentanmeldt, og kan monteres på alle Liko™ standard skinner, - nye såvel som allerede monterede skinner.

Det er også en æstetisk ideel løsning, eftersom der ikke er synlige ledninger og liften ikke behøver at stå tæt på en stikkontakt, hvilket igen giver fuld frihed til at montere skinnerne.




### Fordele ved Liko™ skinneoplading

- Altid klar til brug
- Tidsbesparende, er altid tilgængelig
- Batteriet er altid fuldt opladet
- Længere batterilevetid
- Æstetisk løsning – ingen synlige ledninger
- Passer til nye og allerede monterede skinner
- Kan oplade liften via skinnerne i hele rummet
- Giver mulighed for at montere skinner i hele rummet



### Fuld opladning.

Liften er altid forbundet til strømforsyningen via skinnens opladersystem. I tilfælde af strømsvigt, kan liften fortsat køre på strøm fra batteriet.

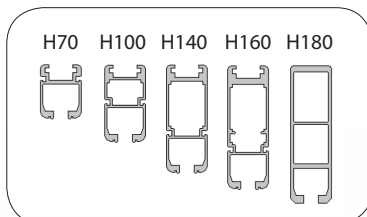

### Passer til alle Liko™-skinner.

Glem alt om særligt monterede og dyre skinner. Likos skinneoplading kan monteres på både Likos enkelt- og runddækkende skinnesystemer samt på nye og allerede monterede systemer.

### Sikker under alle forhold.

Normeret til IP-klasse X4 og med korrosionsbeskyttelse, kan skinneopladingen monteres i alle rum, herunder badeværelser.

### Kompatibilitet.

For at få optimal glæde af Liko™ skinneoplading, skal systemet være udstyret med en IRC-kørevogn og en kompatibel liftenhed.



IP-klasse:	X4
Elektricitet:	Forbundet til tilslutningsnettet
Elektricitet, isoleret IRC-skinne:	24 volt
Materiale, IRC-skinne:	Korrosionsbeskyttelse Cu/Ni-legering
Varenummer og montering	
For yderligere oplysninger om skinnemontering og liftenhedens kompatibilitet, kontakt venligst den lokale repræsentant.	



Skinneoplading er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det medicintekniske direktiv om klasse 1 produkter (MDD 93/42/EEC). Skinneoplading opfylder kravene iht. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 og CAN/CSA C22.2 No.601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001

Hill-Rom design og Hill-Rom logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Hill-Rom Services Inc.  
Liko design og Liko er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko R&D AB.

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France \_\_\_\_\_ +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom \_\_\_\_\_ +44 (0)1530 411000  
 Deutschland \_\_\_\_\_ +49 (0)211 16450-0  
 Nederland \_\_\_\_\_ +31 (0)347 32 35 32  
 Italia \_\_\_\_\_ + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 38

Österreich \_\_\_\_\_ +43 (0)2243 28550  
 Ireland \_\_\_\_\_ +353 (0)1 413 6005  
 Iberia \_\_\_\_\_ +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries \_\_\_\_\_ +46 (0)920 47 47 11  
 Eksport \_\_\_\_\_ Kontakt den lokale  
 Hill-Rom repræsentant via webstedet [www.liko.com](http://www.liko.com).  
 com eller ring på telefon \_\_\_\_\_ +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom forbeholder sig retten til at foretage ændringer af design, specifikationer og modeller uden forudgående varsel. Den eneste garanti, Hill-Rom stiller, er den udtrykkelige skriftlige garanti, der er gældende ved salg eller leje af vores produkter.  
 © 2011 Hill-Rom SARL, ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES