



LIFTKAR^{PT}

Elektrisk Persontransporter

Driftssikker | Alsidig | Genial

SANO



SANO – førende indenfor trappekørselsteknologien

Ingen andre tilbyder de muligheder, ydelse og brugervenlighed som er kendetegnet ved Sano teknologien. Sano er stiftet i 1990 af Jochum Bierma, og har nu 20 ansatte med mange års erfaring i design og produktion af trappesækkevogne.

Nye mobile løsninger

Sano gennemarbejder alle detaljer inden et nyt produkt bliver frigivet til salg. Liftkar PT forlod tegnebordet for over 2 års siden og den har lige siden været igennem afprøvninger og mange tests så hver funktion er blevet helt perfekt. Sano startede serie produktion af Liftkar PT i september 2004. Alle dele er lavet og samlet hos Sano, så derfor kan vi tilbyde den aller bedste kvalitet.

Forhandler

Dansk Niels Bo ApS har de sidste 10 år været den danske forhandler af Sano s el-trappesækkevogne. Så vi har mange års erfaring i vejledning samt salg af disse produkter. Liftkar PT er sidste produkt i en række af mange unikke produkter. Så nu kan vi klare alle krav som kørestolsbrugere, mennesker med gang problemer og professionelle transportører har. (PT står for person transport)

Geniale – Liftkar fordele

Ingen anden trappesækkevogn står helt stille ved nedad kørsel som Liftkar PT gør. Den bevæger sig ikke før hjulet på løftemotor når næste nedre trin. Det giver både passager og kører en mere sikker kørsel på trapperne.





Stort program af el-trappevogne til dine behov Liftkar PT til din service

Brug for ekstra bevægelsesfrihed i huset og haven? PT S/Outdoor giver gangbesværede nye muligheder. Denne model med blødt polstret sæde giver dig mulighed for at opleve dine omgivelser på en helt ny måde, fordi du nu kan bevæge dig både op og ned ad trapper.

Den Professionelle

Er du persontransportør og leder efter en robust trappemaskine i høj kvalitet til svære opgaver? PT Universal kan tage mange forskellige slags kørestole og er lavet med henblik på taxikørsel som transportere invalide i deres egen kørestol. PT Fold tilbyder de samme muligheder som PT S, men har et vaskbart letvægtssæde.

Tilkoblings trappemaskine

PT Plus leveres med en sammenklappelig letvægts kørestol. Med PT Adapt kan du tilpasse trappemaskine til din egen kørestol.

TRANSPORTERS



PT S



PT Outdoor

PROFESSIONALS



PT Uni



PT Fold

ADD-ON



PT Plus/Adapt

Liftnar PT Teknologi

Liftnar fordele

TO OP/NED KONTAKTER

Der er to op/ned kontakter, en på hver side af håndtaget.

Ideal til både venstre og højre hånds brugere.



Liftnar fordele

ERGONOMISK HÅNDTAG

Håndtaget er designet til både højre og venstre hånds brugere, og er meget let at indstille i den rette højde. Brug tværstangen som støtte og til at holde maskinen med. Gummi belægningen giver optimal greb.



Liftnar fordele

NIVEAU VISER

Den integrerede niveau viser hjælper med at holde balancen under kørselen.

Rød = Stop (kan ikke køre)
Grøn = Ok



↗ **160 kg**



Liftkar fordele

NEMT STYRESYSTEM

Alle funktioner er indenfor rækkevidde: tænd/sluk, hastighed, skift fra enkelt trin til vedvarende kørsel kan vælges mens man kører med Liftkar PT på trapperne.



Liftkar fordele

LETVÆGTSMODUL OPBYGGET DESIGN

Alle Liftkar PT kan nemt skilles ad i 3 dele. Hele maskinen er let at bære, samt at stille væk eller tage med sig.



Liftkar fordele

SIKKER BREMSE SYSTEM

Robust automatisk trin bremse hjul stopper Liftkar PT sikkert på trin-kanten. Det slidstærke bremsesystem indvendig i hovedhjulet sikre en omgående bremsning.





Liftkar PT S 130/160



Ideel rundt i huset

Liftkar PT S er den mest kompakte model til meget stejle trapper og vindeltrapper. Der er to modeller PT S og PT Outdoor, 160 samt 130. (Designet til at transportere personer der vejer op til hhv. 160kg og 130kg).

Lad Liftkar PT tage det hårde arbejde

Den der betjener Liftkar PT en har altid en afslappende stilling og en ret ryg. Der er ingen belastning på arme eller ryg, fordi trappemaskinen er i balance under kørselen. Operatøren har en hånd på tværstangen og en ved op/ned kontakten.

Tag din Liftkar PT med dig

Håndtag, batteri og løftemotor samles med en stang. Både PT S og PT Outdoor kan hurtig og nemt skilles ad i 3 lette dele. Så kan trappemaskinen lægges i bagagerummet på bilen og tages med overalt. På den måde kan du nu komme rundt i byen og besøge venner og familie.



Nu kan du!

Liftkar PT Outdoor 120/150



Den fuldt integrerede mobile løsning

Brug for bevægelsesfrihed i huset og haven? PT-S/Outdoor giver gangbesværede nye muligheder. Denne model med blødt polstret sæde giver dig mulighed for at opleve dine omgivelser på en helt ny måde, fordi du nu kan bevæge dig både op og ned ad trapper.

Tog, fly eller biler

Ideel til både privat og professionel brug, Liftkar PT Outdoor er smal nok til køre i togets gange samt mellem stolerækkerne i flyet. Løft armlænet og tag plads.

Stærk design for ekstra stabilitet

PT Outdoor har større hjul og bredere hjulvidde som giver ekstra stabilitet udenfor. Nu kan du køre ned ad trapper og bakker udenfor uden problemer.

Ruller ikke fra dig

Liftkar PT's bremse aktiverer den stærke bremse inden i de store hjul. Ved af hælde trappemaskinen lidt bagover forøges bremsningen, så der er ingen fare for, at trappemaskinen ruller fra dig på bakker eller ramper.

Trappemaskinen for de travle professionelle Liftkar PT Uni 130/160



Liftkar PT Uni – den alsidige professionelle


Liftkar PT Universal er en rul på og af vogn til mange forskelligartede manuelle kørestole. Den er nem at håndtere, bak op på platformen, fastgør ryglænet og begynd at køre på trapperne.

Model udvalg

PT Universal fås i to modeller: 130 og 160 og er udtryk for deres bæreevne i kg for kørestol plus passager.

Dens alsidighed

PT Universal kan bruges til stort set alle slags kørestole – ligegyldig hvilket mærke. Nakkestøtten glider nemt op og ned så den kan tilpasses til enhver bruger.

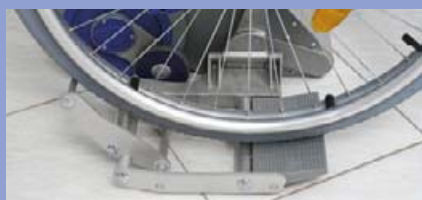

SPAR TID PÅ TRAPPERNE

Man skal ikke tage hjulene af kørestolen. Bare bak op på platformen.

SIKKER OG SUND

Det integrerede beslag, fastholder sikkert kørestolen under kørselen.

FOLDES FOR AT SPARE PLADS

Platformen på PT Uni klappes op for at spare plads. Bare stil din letvægt trappevogn i bilen under transport mellem jobs, intet skal afmonteres.





Professionel trappemaskine til patient transport Liftkar PT Fold 130/160

Altid undervejs

Dette er modellen til den hurtige patient transport udrykning. Men dens 200 mm hjul og sæde på kun 297 mm er PT-Fold også ideel til meget stejle trapper og smalle vindeltrapper.

Brugervenlig

Alle integrerede funktioner på Liftkar PT trappevogne er nemme at bruge. Det vigtigste er at lære at finde balancen under kørselen. Dette hjælper den integrerede niveau viser med. Nye chauffører kan lære dette meget hurtigt.

Vaskbart sæde

Det vaskbare sædeovertræk kan tørres rent eller også udskiftes helt ved hjælp af en enkelt lynlås.

Kompakt

Når den ikke bruges kan den klappes helt sammen! Hvilket er meget pladsbesparende.

Din optimale partner på landevejen

Liftkar PT-Fold er let og kan nemt sættes i enhver bil. Og med det mobile ladeapparat kan du lade mellem jobs, så din Liftkar PT altid er klar når du er.





Oplev mobil frihed:

Liftkar PT Plus 115 tilkoblings trappemaskine

Kobles på din egen kørestol

Er du klar til at køre med denne letvægts manuelle kørestol, som allerede er monteret med adapt beslaget til tilkobling af trappemaskinen.



TRIN 1

Kør Liftkar PT ind under kørestolen og fastgør den med to stifter.



Liftkar PT Adapt 130/160

Ingen grund til at skifte kørestol

Hvis du vil bruge den nye Liftkar PT på din egen kørestol kan Sano værkstedet montere den med den nødvendige adapter.

Med overalt

Når PT Plus kørestolen er sammenklappet og Liftkar PT er adskilt i tre dele kan de ligge i bilens bagagerum.

Nu kan du komme rundt

På modellerne Plus og Adapt skal man ikke fjerne trappemaskinen. Bare løft Liftkar PT fra jorden så kørestolen kan køre som normalt med trappemaskinen monteret bagpå.



TRIN 2

Løft kørestolen ved hjælp af Liftkar PT.



TRIN 3

Fjern hjulene på kørestolen.




TRIN 4

Placer hjulene i holderne på kørestolen.

Liftkar tilbehør

Original Liftkar tilbehør for din Liftkar PT Trappemaskine

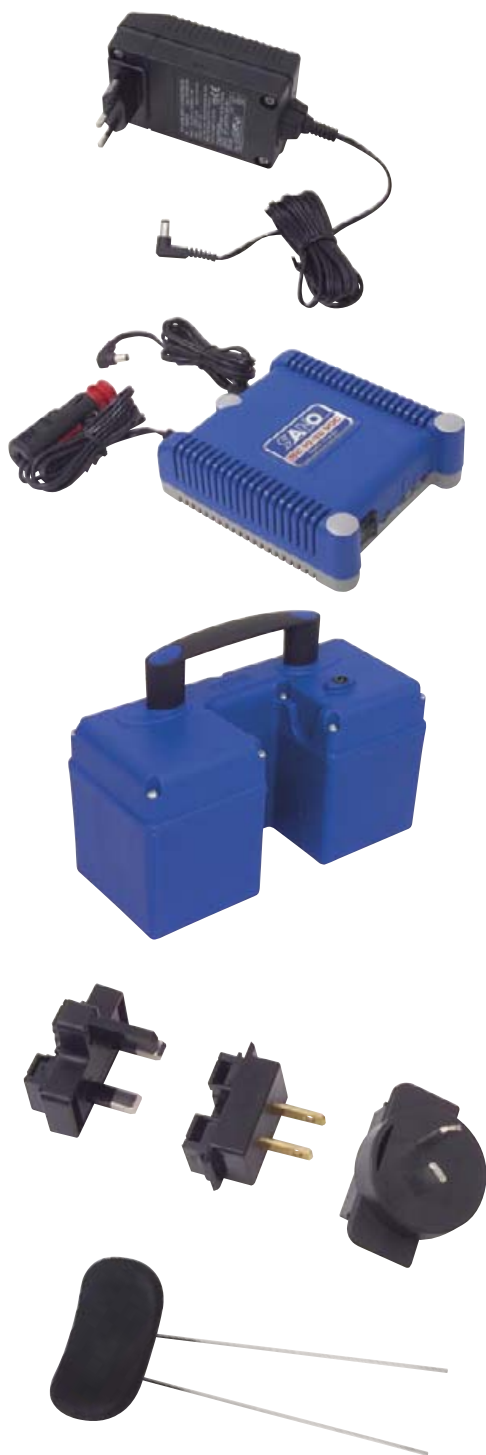

Oplader

Ekstra oplader BC-PT Det kan være smart med to opladere hvis man lader ofte to steder.

Nr. **045 141**

Pris **660.-**

Biloplader

Biloplader BC-10-30 VDC-PT Oplad dit batteri undervejs, passer i cigaret tænder

Nr. **945 120**

Pris **1.200.-**

Batteri

Ekstra Batteri for dem der bruger Liftkar PT trappemaskinen hele tiden. Vægt: 4,3 kg, kapacitet: 5,2 Ah, Volt 24 VDC Vedligeholdelses fri (Godkendt af DOT og IATA for luft transport)

Nr. **004 150**

Pris **1.898.-**

Adapter

UK adapter

Nr. **045 142**

USA adapter

Nr. **045 143**

AUS adapter

Nr. **045 144**







Nakkestøtte

Nakkestøtte skydes ned i PT håndtag på alle Liftkar PT modeller.

Nr. **945 191**

Pris **360.-**

Liftkar PT tekniske data

| | PT S | PT Outdoor | PT Uni | PT Fold | PT Plus | PT Adapt |
|---|--|--|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| Bæreevne og varenr. for en komplet trappe- maskine med batteri og oplader med EU stik | PT S 130: 130 kg Nr. 045 703 Pris kr. 33.000,- PT S 160: 160 kg Nr. 045 704 Pris kr. 35.625,- (passager vægt) | PT Outdoor 120: 120 kg Nr. 045 705 Pris kr. 33.675,- PT Outdoor 150: 150 kg Nr. 045 706 Pris kr. 36.300,- (passager vægt) | PT Uni 130: 130 kg Nr. 045 707 Pris kr. 34.800,- PT Uni 160: 160 kg Nr. 045 708 Pris kr. 37.425,- (passager vægt + kørestol) | PT Fold 130: 130 kg Nr. 045 711 Pris kr. 33.450,- PT Fold 160: 160 kg Nr. 045 712 Pris kr. 36.075,- (passager vægt) | PT Plus 115: 115 kg Nr. 045 709 Pris kr. 37.350,- (passager vægt) | PT Adapt 130: 130 kg Nr. 045 701 Pris kr. 36.075,- PT Adapt 160: 160 kg Nr. 045 702 Pris kr. 38.700,- (passager vægt + kørestol) |
| Total vægt | 30.5 kg | 34.3 kg | 27.6 kg | 28 kg | 23.5 kg | 24.7 kg |
| Vægt af den største del (Løftemotor med sæde) | 18.5 kg | 22.3 kg | 16.7 kg | - | 14 kg (Løftemotor) | 15.2 kg (Løftemotor) |
| Total højde | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Total bredde | 505 mm (incl. Armleåen) | 505 mm (incl. Armleåen) | 760 mm (platform nede) | 430 mm (sæde) | 430 mm (uden kørestol) | 482 mm (uden kørestol) |
| Total dybde | 675 mm (600 mm når den er klappet sammen) | 675 mm (600 mm når den er klappet sammen) | 395 mm (platform oppe) | 660 mm (405 mm når sæde er klappet op) | 385 mm (uden kørestol) | 385 mm (uden kørestol) |
| Plads der kræves på træppeafsatse | 0.8 x 0.9 m | 0.8 x 0.9 m | 1.1 x 0.9 m | 0.8 x 0.9 m | 0.9 x 0.9 m | 0.9 x 0.9 m |

TEKNISKE DATA FOR ALLE MODELLER

Hastighed: der kan vælges 3 hastigheder
I = 10 trin pr. min, II = 14 trin pr. min.
III = 18 trin pr. min.

- **Max trin højde:** 205 - 230 mm (efter hvilken vinkel der er på trappemaskinen)
- **Trin pr. opladning:** kommer an på vægten og om man kører op eller ned. Men det er mellem 300-500 trin pr. gang. Hvis den bruges hele tiden kan

man købe et ekstra batteri. Eller en biloplader så man kan lade fra job til job undervejs i bilen.

- **Batteri volt og kapacitet:** 24 VDC 5,2 Ah
- **Beskyttelse mod overladning:**
 - 1) Mekanisk overladnings beskyttelses (glidenav)
 - 2) Elektronisk overladnings beskyttelse

• **Hjælpehjul:** er også et afsmittingsfri grå hjul som også er bremsehjul. 80 mm diameter

- **Indvendig bredde af kørestol:** minimum 320 mm (PT Adapt og PT Uni)



DANMARK:

Dansk Niels Bo ApS
Vognmagervej 10
Snoghøj
7000 Fredericia

Tel.: +45 75 94 58 00
Fax: + 45 75 94 58 88
dnb@nielsbo.dk
www.liftkar.dk
www.nielsbo.dk

Hersteller / Manufacturer

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldgut 22
4040 Linz/Lichtenberg
AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7239 510 10
Fax: +43 (0)7239 510 10 14
office@sano.at

www.sano-stair-climber.com
www.sano-treppensteighilfe.com

See our homepage to find out more about Sano, download operating instructions, or view our other products.



Beratung · Entwicklung · Organisation
Dienstleistungen in der Medizintechnik

Risk analysis to DIN EN ISO 14971



MADE IN AUSTRIA



Tested to ISO 7176-23 and EN 12182

SANO