


Air Express Topmadras

Dynamisk, alternerende eller statisk
topmadrassystem

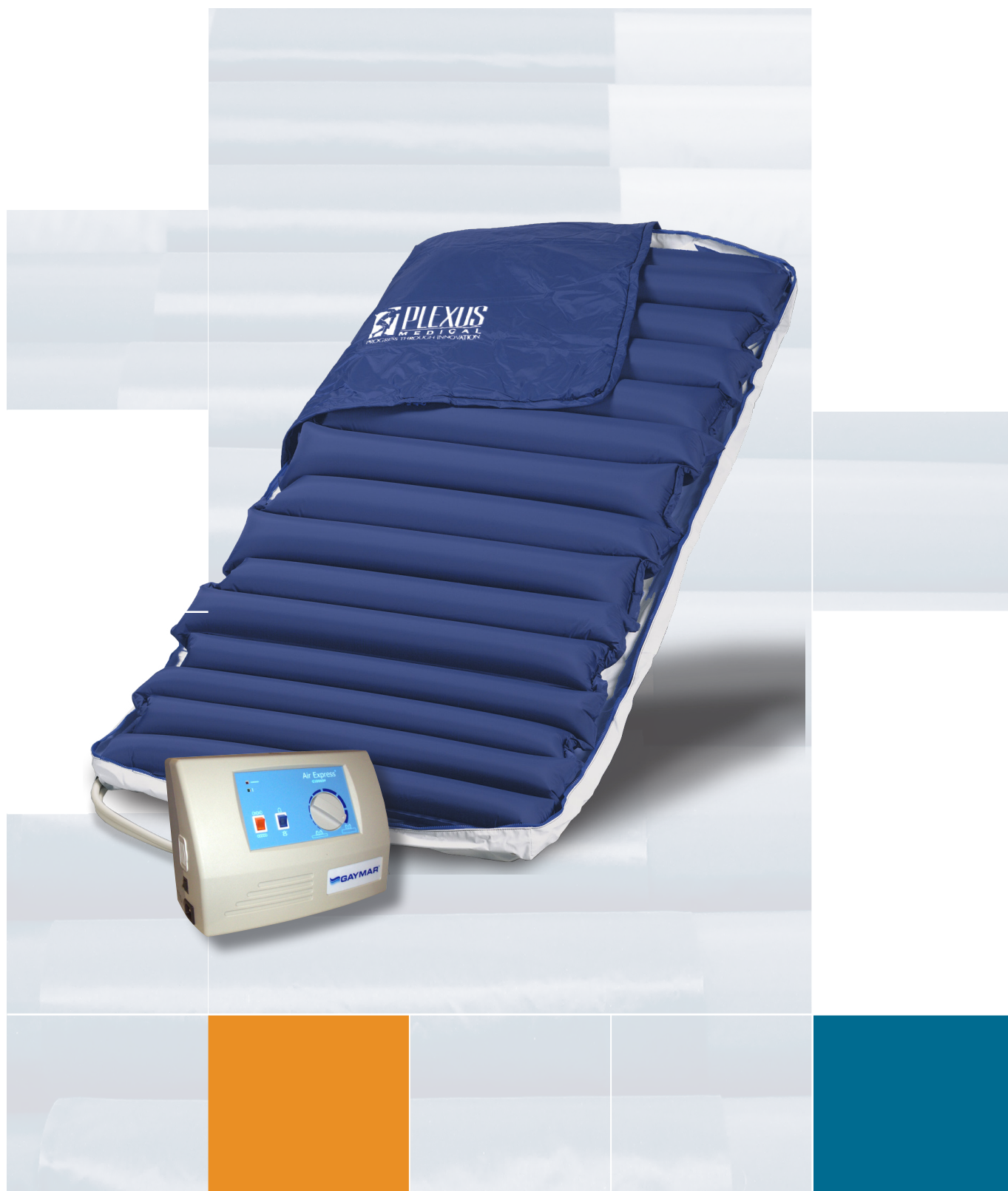

Version 2010. Der tages forbehold for
ændringer og trykfejl.

Topmadras

- Topmadrassen anvendes ovenpå standardmadrassen.
- Madrassen er opbygget af 16 sammenhængende anatomisk udformede luftceller, som sikrer optimal trykfordeling og maksimal stabilitet ved forflytning.
- Luftcellerne er af tynd, smidig og stærk nylonfolie.
- I bunden af madrassen er placeret propper til hurtig tømning af madrassen ved f.eks. hjertestop.

Betræk

- På madrassen er monteret et ventilerende, vandskyende, åndbart, oversize betræk med bakteriestatiske egenskaber.
- Det 2 lags quiltede betræk hindrer friktion og shear i forbindelse med forflytninger.
- Betrækkets 'Easy-Slide' effekt sikrer let forflytning af brugeren.

Plexus Air Express kontrolenhed/pumpe

- Brugervægt 40-228 kg.
- Logisk og brugervenligt display.
- Trykket i madrassen indstilles manuelt ud fra brugerens vægt, 'håndtest' og individuelle behov.
- Dynamisk eller statisk funktion.
- Alternering med 5 minutters rolig cyklus.
- Madrassen fyldes med luft på 20 minutter.
- Slangere med 'Quick Release' for hurtig tømning ved hjertestop (CPR) og i forbindelse med forflytninger.
- Ved strømudfald kobles luftslangerne og madrassen kan derefter holde luft.
- Indstillinger genoprettes efter strømudfald.
- Alarm ved strømsvigt.

Rengøring

- Luftblæren tømmes og afmonteres. Rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Topbetrækket maskinvaskes ved 80° C.
- Bunden rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.

Tekniske data

El 230 V / 50 Hz, 0,5 A

Ledningslængde 4,5 m

Maks. brugervægt 40-228 kg

	Vare nr.	HMI nr.	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Garanti
Plexus Air Express topmadras	80-10205	40689	85 cm	203 cm	9-15 cm	6,8 kg	2 år
Plexus Air Express pumpe	80-10278	48539	31,0	15,0	23,0	2,4	2