

Længst muligt i eget hjem

- hjælpemidler, der giver trivslen og arbejdsmiljøet et løft



WINNCARE

N o r d i c

Hjælpemidler til forflytning, soveværelse og badeværelse

Tlf.: +45 7027 3720 • E-mail: info@winnocare.dk • www.winnocare.dk
Winnocare Nordic ApS • Tårnborgevej 12C • DK-4220 Korsør





Forflytning

Elk.....4

Camel.....5

Raiser.....6

Soveværelse

Leglifter.....7

Handy.....8-9

Sit-u-Up.....8-9

Badeværelse

Badepude.....10

Surfer Bather...11



Nem at folde
sammen og
transportere

Vejer kun
3,6 kg



Elk

Nem at bruge

- Elk pustes nemt op ved hjælp af en kompressor, som styres med en overskuelig håndbetjening
- Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
- Kan betjenes af én plejer

Sikker forflytning

- Meget robust og stabil
- Det ideelle hjælpemiddel til afhjælpning efter faldulykker
- Max brugervægt helt op til 450 kg


Nem at vedligeholde

- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt, og Elk kan derfor anvendes såvel ude som inde

Forbedrer trivslen

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne person
- Mindsker risikoen for belastning af plejen
- Kan benyttes selv under trange pladsvilkår, hvor traditionelle løftehjælpemidler ikke kan komme ind

Max brugervægt	Max. højde	Sædedybde	Bredde	Total vægt	Antal løft pr. opladning	Motor
450 kg	56 cm	50 cm	57 cm	3,6 kg	9	Airflo 24

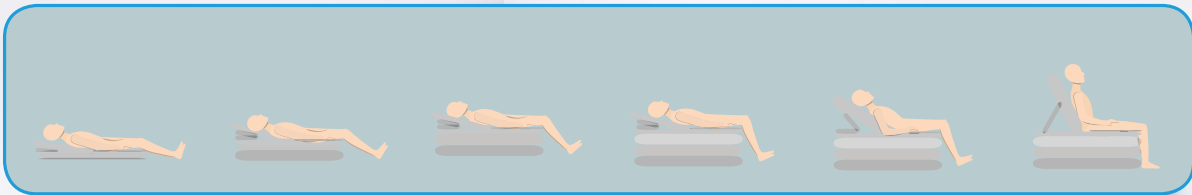

Ryglænet giver
ekstra støtte
under forflytning

Ekstra tryghed
for brugeren



Camel

Nem at bruge

- Pustes nemt op ved hjælp af en kompressor, som styres med en overskuelig håndbetjening
- Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
- Kan betjenes af én plejer

Sikker forflytning

- Ryglænet giver ekstra støtte og dermed ekstra tryghed for brugeren
- Høj stabilitet og god støtte
- Max brugervægt helt op til 320 kg

Nem at vedligeholde

- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt, og Camel kan derfor anvendes såvel ude som inde

Forbedrer trivslen

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne person
- Mindsker risikoen for belastning af plejen
- Anbefales til brugere med kognitiv svækkelse

Max brugervægt	Max. højde	Sæde-dybde	Total længde	Bredde	Total vægt	Længde, ryglæn	Antal løft pr. opladning	Motor
320 kg	56 cm	47 cm	112 cm	70 cm	6,5 kg	81 cm	4	Airflo 24



Perfekt i bilen
eller i lænestolen

Bliv mere
selvhjulpen



Raiser Løftepude

Nem at bruge

- Raiser passer i alle lænestole og kan nemt flyttes fra stol til stol
- Meget let (1,5 kg) og nem at have med sig
- Kræver ingen installation
- Helt op til 25 løft pr. opladning

Sikker forflytning

- Med et tryk på knappen hæver og sænker det brugervenlige håndsæt puden
- Det ideelle hjælpemiddel til at være mere selvhjulpen
- Max brugervægt helt op til 190 kg

Nem at vedligeholde

- Anti-mikrobielt materiale, der er nemt at vedligeholde
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt

Forbedrer trivslen

- Egner sig til mange forskellige situationer, bl.a. som hjælp til at komme ud af sengen eller bilen
- Mindsker risikoen for belastning af plejen

Max brugervægt	Max. højde	Længde	Bredde	Vægt (luftceller)	Vægt (motor)	Antal løft pr. opladning	Motor
190 kg	23 cm	43 cm	43 cm	1,5 kg	2,8 cm	25	Airflo 12



Elektrisk løft af ben fra gulv til seng

Bliv mere selvhjulpnen

Leglifter

Nem at bruge

- Passer til stort set alle typer senge, herunder plejesenge med 4-delt indstillelig liggeflade
- Aktiveres og oppustes nemt ved hjælp af håndbetjeningen, som styrer kompressoren
- En ikke-permanent løsning, der er nem at på- og afmontere under madrassen

Sikker forflytning

- Benene løftes nemt fra gulvet til sengen eller omvendt ved hjælp af luft
- Ideel til borgere med nedsat muskelkraft
- Max brugervægt helt op til 135 kg

Nem at vedligeholde

- Tørres nemt over dagligt med en svamp med vand og lidt vaskemiddel (sørg for, at puden er helt tør, inden den tages i brug igen)
- Betrækkes kan maskinvaskes
- Mulighed for at købe ekstra betræk
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt

Forbedrer trivlsen

- Brugeren kan selv komme i seng og bestemmer derfor selv sin sengetid
- Giver brugeren en mere værdig dagligdag
- Mindsker risikoen for belastning af plejen

Max brugervægt	Længde	Bredde	Total vægt	Antal løft pr. opladning	Motor
135 kg	124 cm	57 cm	1,5 kg	16	Airflo 12

Sit-u-Up & Handy



Nem at bruge i både enkelt- og dobbeltseng

Placeres oven på madrassen



Sit-u-Up



Handy

Nem at bruge

- Placeres oven på madrassen (fastgøres til sengen under madrassen)
- Kan benyttes på alle størrelser senge
- Pustes nemt op med et tryk på knappen
- Vejer ikke meget og er nem at have med sig

Sikker forflytning

- Ryglænet er ideelt til brugeren, som har brug for ekstra støtte
- Stabil og kompakt
- Lufttrykket kan justeres, så man nemt kan vælge den mest behagelige position
- Pudeholder med anti-skrid

Nem at vedligeholde

- Tørres nemt over dagligt med en svamp med vand og lidt vaskemiddel (sørg for, at puden er helt tør, inden den tages i brug igen)
- Betrækket kan maskinvaskes
- Mulighed for at købe ekstra betræk
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt


Forbedrer trivlsen

- Brugeren kan løftes liggende både på siden eller på ryggen
- Placeres oven på madrassen og generer ikke brugerens samlevere i dobbeltsengen
- Nem at have med på ferien
- Mindsker risikoen for belastning af plejen





	Handy	Sit-u-Up
Max brugervægt	135 kg	150 kg
Længde	80 cm	75 cm
Bredde	61 cm	70 cm
Vægt	2 kg	4,8 kg
Rygstøtte længde	73 cm	73 cm
Rygstøtte vinkel	Flad til 55°	Flad til 65°
Antal løft pr. opladning	20	20
Motor	Airflo 12	Airflo 12

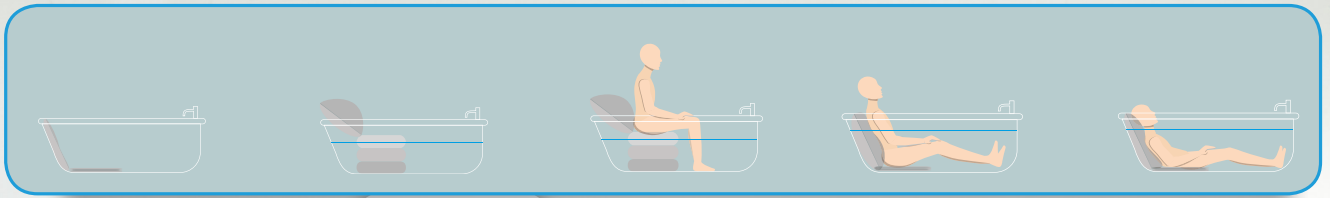

**Når det er svært
at komme i og op
af badekarret**

Brug den hjemme
eller på ferien



Badepude

Nem at bruge

- Sættes nemt i badekarret på få sekunder
- Bevarer luften i ryglænet for større komfort
- Tilpasser sig til badekarrets form og størrelse
- Kan fjernes fra badekarret, når den ikke anvendes

Sikker at bruge

- Brugeren sænkes kun ned i badekarret, hvis der er nok batteri til, at han eller hun kan hæves op igen
- Vandtæt håndbetjening (IP67)
- Ingen elektriske kabler, når den er i brug
- Fungerer på batterifunktion.


Nem at vedligeholde

- Kan nemt fjernes fra badekarret og er nem at rengøre efter brug
- Vaskes med rent vand efter brug og tørres i oppustet tilstand
- Kompakt og nem at opbevare
- Riverseal® materialet er ekstra holdbart og stærkt

Forbedrer trivslen

- Ideél til personer, som har problemer med at komme i og op af badekarret
- Al luften lukkes ud af puden, så brugeren kan sidde helt nede i badekarret og nyde vandets terapeutiske egenskaber
- Nem at have med på ferien

Max brugervægt	Max højde	Bredde	Vægt	Rygstøtte længde	Sædedybde	Antal løft pr. opladning	Motor
150 kg	40 cm	58 cm	2 kg	33 cm	44 cm	8	Airflo 12

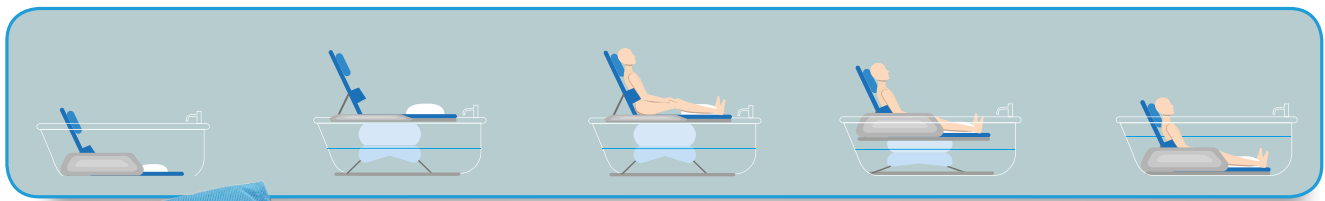

Når sikkerheden
og hygiejnen skal
være i top

Badelift til børn

Surfer Bather

Nem at bruge

- Installeres nemt i badekarret ved hjælp af sugekopper
- Hæves og sænkes nemt ved et tryk på knappen
- Indstilleligt sæde og ryglæn

Sikker at bruge

- Barnet sidder sikkert i sædet, mens det føres ned i eller op af badekarret
- Fås med sideskiner og benstropper for ekstra sikkerhed
- Vandtæt håndbetjening (IP67)


Nem at vedligeholde

- Kan nemt fjernes fra badekarret og er nem at rengøre efter brug
- Vaskes med rent vand efter brug og tørres i oppustet tilstand

Forbedrer trivlsen

- Når sikkerheden er i top, kan både barn og forældre nyde badetid mere
- Sænker barnet helt ned i badekarret, så han eller hun kan nyde vandets terapeutiske egenskaber

Max brugervægt	Max brugerhøjde	Højde	Længde	Bredde	Sædedybde	Vægt	Rygstøtte længde	Rygstøtte vinkel	Antal løft pr. opladning	Motor
50 kg	135 cm	48 cm	112 cm	37-67,5 cm	62 cm	8,7 kg	56 cm	Flad til 70°	20	Airflo 12

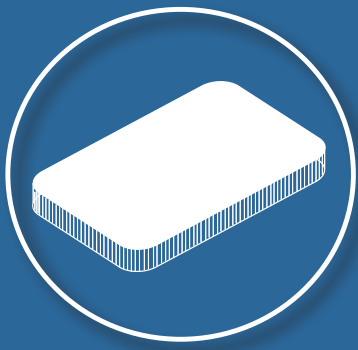

Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du vil høre mere om WinnCare Nordics løsninger inden for forflytning, hygiejne, senge, madrasser og puder, så kontakt os endelig. Vi kigger gerne forbi til en snak om dine behov og de muligheder, som vores produkter giver dig.

Tlf.: +45 70273720

E-mail: info@winncare.dk

www.winncare.dk

WinnCare Nordic ApS

Tårnbjergvej 12C

DK - 4220 Korsør

WINCARE
N o r d i c