

Softform Premier MaxiGlide



Udviklet til at reducere
shear og friktion



Invacare **Softform Premier MaxiGlide's** patenterede "Glide" system bevirker, at madrassen følger liggefladens indstillinger. Når liggefladen indstilles ved eksempelvis elevation af såvel hoved- som benende øges selve længden på sengens liggeflade. Idet madrassen er opdelt i to lag, vil det nederste lag forblive og den øverste del vil følge brugeren. Dette gør madrassen yderst komfortabel, samtidig med at shear og friktion minimeres betydeligt. Madrassen er trykmålt på HMI med særdeles gode resultater. Desuden findes klinisk dokumentation.



Tryksårsforebyggelse

Softform Premier MaxiGlide er en 2-delt madras bestående af en ydre skal og indeni en skumkerne opskåret i forskellige profiler, der er individuelt fleksible. Dette bevirker, at overfladespændinger, shear og friktion reduceres, samtidig med at brugeren synker ned i materialet, hvorved trykket fordeles over en større flade.

Betræk strækbart i flere retninger

Madrasmadrækket er strækbart i flere retninger og tilpasser sig skumkernens formbare overflade og tillader derved brugeren at synke ned i materialet.

Udnytter sengens indstillingsmuligheder optimalt

Madrassens profilerede skum gør det muligt til fulde at udnytte sengens indstillingsmuligheder, letter korrekt positionering af brugeren og således også arbejdet for plejepersonalet.

Egenskaber



Inkontinensbetræk

Betrækket er strækbart i flere retninger, fremstillet af vandavisende polyurethane og har svejsede samlinger og afdækning ved lynlås.



Bund/skal i fast polyurethan (PU)


Den hårde PU-skal beskytter den bløde profilerede skumkerne mod beskadigelse fra sengens liggeflade og forlænger således madrassens levetid.



Modulopbygget


Madrassen er modulopbygget, hvilket muliggør effektiv trykaflastning samtidig med en høj holdbarhed.

Egenskaber

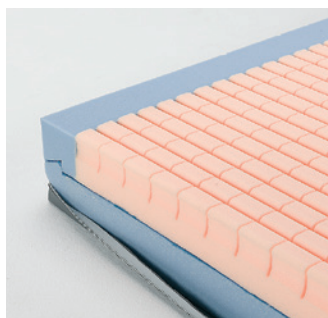


Profilleret overflade

Overfladen minimerer shear- og friktionskræfter.

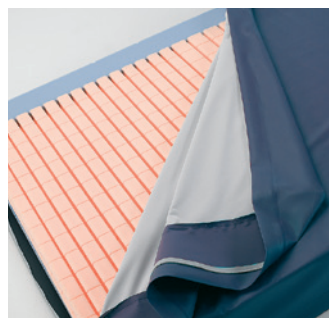

Aftageligt betræk

Letter eftersyn af madrassen og letter rengøring.

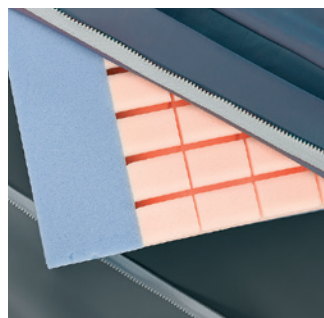

Brandtest

Såvel betræk som skum er brandtestet.










Patenteret design

“Glide” systemet er en patenteret løsning og forhandles kun hos Invacare.

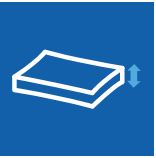

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.


	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Max. brugervægt	Rengøring	
							
Softform Premier MaxiGlide	830, 850, 880, 900 mm	2000 mm	150 mm	13 kg	247 kg	80°	

Produceret efter Europæiske standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib
Source 5

Farve

Blå

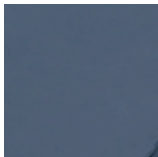

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark


Yes, you can.®

