



Den effektive køre- og bremsehjælp

Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

v-max

www.aat-online.de



Ideen bewegen mehr



I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres hjælper og få support ad ramper og andre skrå flader, med en energisk hjælpemotor.

Køre- og bremsehjælpen V-Max gør det lettere for Dem at overkomme stigninger, og udvider dermed Deres rækkevidde væsentligt. Ved kørsel nedad, bremser V-Max automatisk og sørger for en roligere kørsel.

Sådan vinder De mere mobilitet og sikkerhed. V-max'en kan monteres på næsten alle kørestole med sædebredde over 36 cm. Takket være den lave egenvægt, såvel som små dimensioner, transporterer den Dem uden problemer. V-Max hjælpen aflaster betjeningspersonen, så denne uden problemer kan skubbe kørestol og person op ad 2-delte ramper med 20% hældning.



Få mere frihed —
med V-Max bliver Deres kørestol mobil

Det ergonomiske betjeningshåndtag forenkler håndteringen af V-Max.



Intelligent teknik — styrker Deres mobilitet

Deres kørestol, bliver ved hjælp af V-Max, direkte drevet på de bageste hjul. Fordelen ved denne teknik er den konstante og meget effektive drivkraft. Derved overkommer De stigninger op til 20%.

Den maksimale vægt V-Max må drive på er: 200 kg (person, kørestol, drivværk).

Gennem V-Max opnår De tæt på ubegrænset mobilitet. Med vores ydedygtige batteri, er det muligt at komme ca. 15 km omkring, afhængig af kørestolsbrugerens vægt, kørselsoverflade og terræn. Hastigheden kan ved god fremdrift, reguleres op til 6 km/t., og helt ned til 3 km/t.

V-Max monteres på den nederste del af ryglænet på kørestolen. På den måde beholder betjeningspersonen, den gode benplads. V-Max'en har en lav egenvægt på 8,5 kg. (Batteri 8,6 kg)




Et kraftigt tandhjul griber ind i den matchende tandkrans og styrer herved driv- og bremsekraften direkte fra kørestolens baghjul.



Den forstærkede variant V-Max⁺ kan klare belastning helt op til 300 kg (standardversion op til 200 kg).



Ergonomisk design — et sikkert greb og altid ved hånden

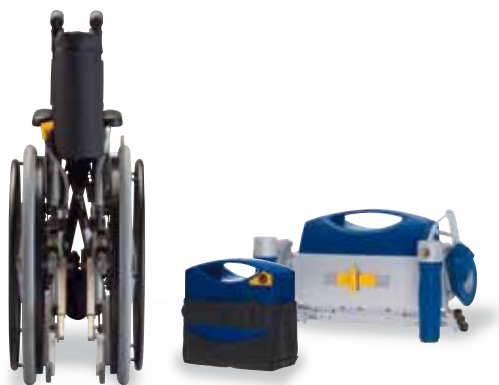

Einfache Montage und Demontage, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht machen den Transport des v-max völlig unproblematisch.

At have et fast greb i kørestolen udgør en væsentlig sikkerhedsfaktor for betjeningspersonen.

Derfor er V-Max ergonomisk formede betjeningshåndtag, monteret på kørestolens håndtag og indstillet i en speciel betjeningsvenlig position. Har De ikke brug for V-Max, er den desuden udstyret med fødder, der gør den egnet til oplagring.

At transportere V-Max er nemt og bekvemt. Den er let at afmontere, og passer sammen med Deres kørestol i stort set alle bagagerum.




Komplet og meningsfuldt udstyr — opfylder alle Deres ønsker

V-Max's leveringspakke indeholder: Drivenheden, et batteri, betjeningsgreb, en oplader, og et sæt hjul med tandkrans.

For at opfylde individuelle ønsker, kan også de afbillede produkter købes.

Tilbehør

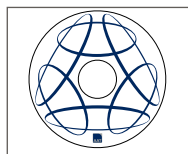

Oplagringsbeskytter



Holder



Mega-batteri



Vippestøtter



Omformer

Optimal udnyttelse af intelligens — V-Max gemmer på al vores erfaring


Vores mål hos AAT er at De gennem intelligent teknologi, bliver mere mobil og derved forhøjer Deres livskvalitet. Et godt eksempel på denne filosofi, er trappemaskinen V-Max.

Al vores viden og "know how", opnået ved mange års erfaring med udvikling af drivsystemer til kørestole og trappenhjælp, produceret til et intelligent, pålideligt og sikkert system, der tilbyder utallige fordele:

- Rækkevidde op til 15 km
- Konstant og effektiv drivkraft på bageste hjul
- Trinløse hastighedsregulering, forlæns op til 6 km/t, baglæns op til 3 km/t
- Stigning op til 20%
- Kørsel på ramper muligt
- Små dimensioner
- Lav egenvægt, og enkel montering
- Kan påsættes næsten alle manuelle kørestole med et sædebredde over 36 cm
- Kompatibel med S-Max – trappemaskinen til kørestol

v-max_dk_11_2010

Vægt-/stigningsdiagram

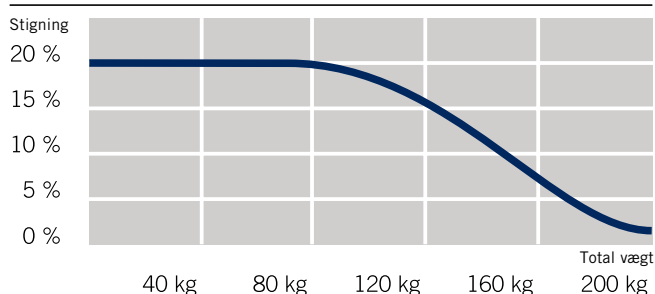

CE CE V-Max'en opfylder retningslinierne 2007/47/EG og 2006/42/EG.

Der tages forbehold for eventuelle tekniske ændringer.



Firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH er medlem af QVH og med et kvalitetssegl, der stemmer overens med afprøvningen af kvalitetsstandarden for sygetransporter. Foruden det, er AAT certificeret i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2003 + AC:2007 certificeret.

Tekniske Data

	v-max	v-max ⁺
Maksimal tilladelig totalvægt	200 kg ⁽¹⁾ (Person, kørestol, v-max)	300 kg ⁽¹⁾ (Person, kørestol, v-max ⁺)
Montering muligt på	sædebredde fra 36 cm	sædebredde fra 60 cm
Hastighed	Trinløs regulérbar	Trinløs regulérbar
Forlæns baglæns	6 km/t 3 km/t	5,5 km/t 3 km/t
Rækkevidde	op til 15 km ⁽²⁾	op til 11,5 km ⁽²⁾
Max stigning	op til 20% ⁽²⁾	op til 12% ⁽²⁾
Højde bredde dybde	24 47,5 18,5 cm	27,5 63 18,5 cm
Akkumulatorer	2 x 12V / 16 Ah	2 x 12V / 22 Ah
Jævnstrømsmotor	24V	24V
Vægt batteri	9,0 kg	15,0 kg
Vægt drivenheden	8,5 kg (uden batteri)	13,5 kg (uden batteri)

1 Vær opmærksom på kørestolsproducentens anbefaling omkring maximal vægt.
2 Rækkevidde og stigningsmuligheden er afhængig af vægten af kørestolsbrugeren, kørselsoverfladen, terræn mm.



Ideen bewegen mehr

Kinco Corporation ApS · Søren O. Sloth
Overgårdvej 4 · DK – 7500 Holstebro

Tel.: +45.96 13 29 29 · Fax: 97 43 23 99
mail@kinco.dk · www.kinco.dk