



Tilt in space

Unikt for Zitzi Snapper er stellet's tilt in space funktion, hvilket indebærer at man kan tilte sædedelen uden at skabe ustabilitet i kørestolen. Med denne funktion forskydes tyngdepunktet ikke så meget, som ved et konventionelt tilt.



Manuel eller elektrisk

Der findes to varianter til at imødekomme hæve- og sænkemekanismen. Den elektriske aktuator lader dig løfte større vægt med mindre anstrengelse. Med det manuelle alternativ anvendes en gaspatron, som er en fleksibel løsning uden behov for opladning.



Praktiske hjul

Kørestolsstellet er monteret med 100 mm hjul for enkelt at kunne rulle hen over tæppekanter, dørtrin og andre forhindringer. Desuden er hjulene udrustede med retningsholdere.




Elektrisk tiltefunktion

Snapper med elektriske funktioner kan også udstyres med el-tilt for nem betjening og mindre fysisk belastning for assistenter og forældre.

846001 **Snapper str. 1 manuel**

846002 **Snapper str. 1 elektrisk**

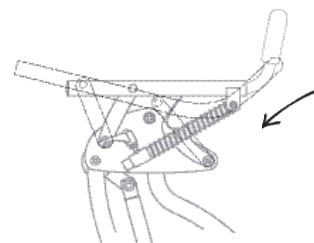

Kørehåndtag

Lille og bekvem

Tilt in space

Forbedrer vægtfordelingen.

El-tilt (valgmulighed)

For en nemmere håndtering og mindre fysisk belastning.

Retningsholder

Sammen med parkeringsbremse

Højdejustering

For enkelt at veksle mellem høj position og leg.

Rammen

Stærk konstruktion.

Hjul

100 mm hjul. Let kørende.

Snapper fakta

Unikt for Zitzi Snapper er dets tilt in space funktion, hvilket indebærer at man kan tilte sædedelen uden at forårsage ustabilitet.

Størrelser..... 1 stk.

Modeller..... 2 stk.

Belastningsvægt..... 50-75 kg

Tilt..... +3/-22°

Højdejusterbar..... Ja

Hjul, standard..... 100 mm

Sædehøjde (min)..... 46 cm*

Sædehøjde (max)..... 62 cm*

* Målene på sædehøjden afhænger af hvilket siddesystem, som påsættes kørestolsstellet.

Viengevej 4, 8240 Risskov, tlf. 8617 0174, fax 8617 0175, a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomic-sitt.com

Anatomic
-SITT-