

JAY Balance

Den perfekte balance mellem trykaflastning og stabilitet

Optimeret for trykaflastning, stabilitet og komfort

Produktegenskaber:

- Tykt, blødt konturformet skum i det øverste lag støtter under trochanter og lår. Giver ekstra beskyttelse af sædekuderne i situationer, hvor der er større tryk på forkanten af sædebrønden
- JAY Balance fåes med JAY Fluid, Cryo Fluid eller med luftindlæg
- Sædebrøndens udformning med lukket bagkant forhindrer Fluid-indlægget i at flytte sig
- Pudens underside har skråtskårede kanter, således at den passer i alle kørestole, med både hængekøje- og plansæde
- Skumbasen er beskyttet af et inderbetræk. Yderbetrækket er som standard vores mikroklimatiske, luftcirkulerende betræk. Inkontinensbetræk eller strækbart betræk kan tilkøbes

Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med høj risiko for tryksår og shear
- Passer til brugere som har behov for omslutning og nedsynkning af bækken og sædekuder
- Anvendes med fordel til brugere som er ude af stand til at forflytte sig og udføre selvstændig vægtoverføring



		Størrelser									
Dybde cm	Bredde										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											
PLA	A			B				C			

Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	8,5	Bemærk: Balance med Cryo Fluid fås kun fra 400 mm i bredde. Se ordreformular for ændringer eller specialstørrelser.	 Sædehøjde Sædebredde
Pudens vægt 40x46cm	2,4 kg fluidindlæg 3,0 kg Cryo Fluidindlæg 1,9 kg luftindlæg	Luftcirkulationsbetræk*	
Maks. brugervægt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)	Inkontinensbetræk	
Garanti	2 år	Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt
- Puderne kan bestilles på specialmål. Kontakt kundeservice for at høre mere



JAY Balance

Den perfekte balance mellem trykaflastning og stabilitet

TRYKAFLASTENDE

JAY Fluid™ eller luftindlæg

JAY Balance kan bestilles med Cryo Fluid, JAY Fluid- eller luftindlæg, som tilpasser sig brugeren og sikrer trykaflastning under fremtrædende knoglefremspring. Indlæggene kan bruges til at korrigere eller støtte op om fejlstilling af bækkenet.

Derudover køler Cryo Fluid aktivt brugerens siddende hudoverflade i op til 8 timer.



CRYO FLUID



Positioneringskiler med som standard

Med positioneringskiler - der kommer med som standard - kan bækken og lår positioneres optimalt for bedste siddestilling.

Innovativt dobbelt betræksystem

Inderbetrækket er 2-vejs strækbart i materialet Dartex. Det er vandafvisende og nemt at rengøre. Den vandtætte lynlås sikrer, at skumbasen forbliver tør.

Det luftcirkulerende yderbetræk (Mikroklimatisk) afleder fugt og varme for optimeret beskyttelse af huden. Der findes også inkontinensbetræk samt et strækbart betræk, som tillader større nedsynkning af bækkenet for mere trykaflastning. De kan alle komme i vaskemaskinen ved 60 grader. Begge betræk kan tilkøbes.



JAY Balance

Klinisk design og fordele

Sædebrønden har fået et nyt og forbedret design

Størrelsen på sædebrønden passer til bækkenets antropometriske mål, uafhængig af pudens bredde. Sædebrønden er tilpasset bækkenet og vil derfor passe optimalt til brugeren ved valg af korrekt pudebredde.

Klinisk design

Sædebrøndens udformning sikrer optimal trykfordeling og lateral stabilitet. Sædekuderne får optimal aflastning, når de synker ned i Fluid- eller luftindlægget, og trykket fordeles til trochanter og lårben via sædebrøndens PLA (Pelvic Loading Area) design til pudens stabile base.



Kliniske fordele:

- Sikrer at brugeren har tilstrækkelig trykafastende materiale under sædekuderne
- Det bløde skum bag i sædebrønden holder fluidindlægget på plads rundt om bækkenet
- Giver god lateral stabilitet, som reducerer risikoen for fejlstilling og tryksår
- Fluidstørrelsen er tilpasset pudens størrelse

Blødt skumlag

Det bløde skum foran i sædebrønden kombinerer stabilitet med ekstrem komfort.

- Den bløde skumoverdel giver komfortabel støtte til trochanter og lårben
- Det tykke, bløde skum i sædebrøndens forkant giver ekstra beskyttelse af sædekuderne og en komfortabel siddestilling

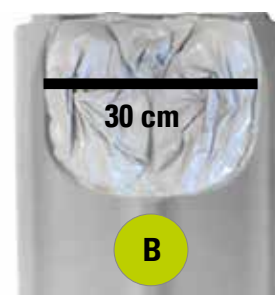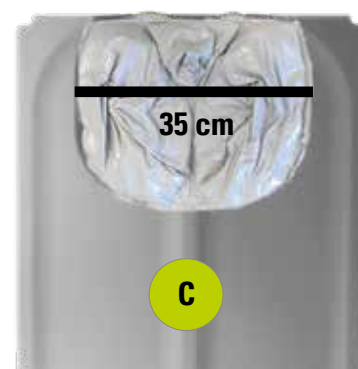

PUDER



JAY Balance

Optimal trykfordeling med forskellige indlæg og kamre

JAY Fluid™ indlæg

Fluidindlægget er rekonstrueret med udgangspunkt i ny klinisk og praktisk videnskab.

Indlægget;

- er lettere
- har forbedret trykfordeling
- giver øget stabilitet
- er letanvendelig, dvs. kræver minimal vedligeholdelse

Fluidindlægget er dynamisk og selvjusterende. Det former sig automatisk rundt om brugerens bækkenparti og bevæger sig med brugeren.



Opdeling i 3 kamre

Kamrene sikrer optimal trykaflastning ved, at fluiden automatisk tilpasser sig brugerens form og position. Fluidindlæggets øgede overflade reducerer overfladespændingen og dermed reduceres risikoen for friktion.

Standard fluidindlægget kan ved behov overfyldes, underfyldes eller fyldes asymmetrisk fra fabrikken (OBS denne service er dog en specialbestilling og dermed et tilkøb. Kontakt kundeservice for pris og levering).

Luftindlæg - 2 kamre (Air Dual)

- Luftindlægget giver mulighed for tilpasning af korrekt luftmængde i hvert kammer separat, f.eks. for at korrigere eller kompensere for et skævt bækken
- Indlægget kan tilpasses varierende behov
- JAY Balance basen giver fortsat støtte til trochanter, hvilket bidrager til en stabil siddende stilling

Tilpasning af luftmængden

Luftmængden justeres ved brug af håndpumpen. Du får let adgang til slangerne ved hjælp af ventilerne på pudens front.

Bemærk

Håndpumpe og reparationsudstyr leveres med puden.

Luftmængden bør kontrolleres dagligt. Se instruktioner i brugsanvisningen.

