



# WING BACK ILSA®

## Retter op på hverdagen

### Et unikt multijusterbart rygsystem

Wing Back ILSA (Integrated Lateral Support Adjustable) er et patentanmeldt rygsystem. Wing Back tillader trinløs justering af ryggen i løbet af få minutter.

Wing Back kan hjælpe brugere, som lider af skæv ryg, træthed og dårlig balance pga eksempelvis scoliose eller kyfose. Wing Back retter brugeren op i kørestolen og giver en sund siddestilling, som hjælper til, at brugeren kan opretholde en aktiv hverdag og klare daglige gøremål på egen hånd.


Wing Back kan også virke præventivt, så brugeren undgår en skæv siddestilling på lang sigt. Derfor kan rygsystemet med fordel monteres på kørestolen, før skævhed eller træthed indtræffer hos brugeren.

På trods af sit enkle design, er Wing Back helt unik. Intet andet rygsystem på markedet tillader samme fleksibilitet i brugerens siddeposition. Wing Back kan hurtigt justeres efter kroppens anatomi, eller hvis siddestillingen ændrer sig. Wing Back kan altid tilpasses brugerens aktuelle siddeposition ned til sidste millimeter, fordi ryggen justeres med velcrostropper.

Wing Back er designet og produceret i Danmark og kan eftermonteres på flere fastramme- og foldbare kørestole på markedet.

### Før og efter Wing Back ILSA



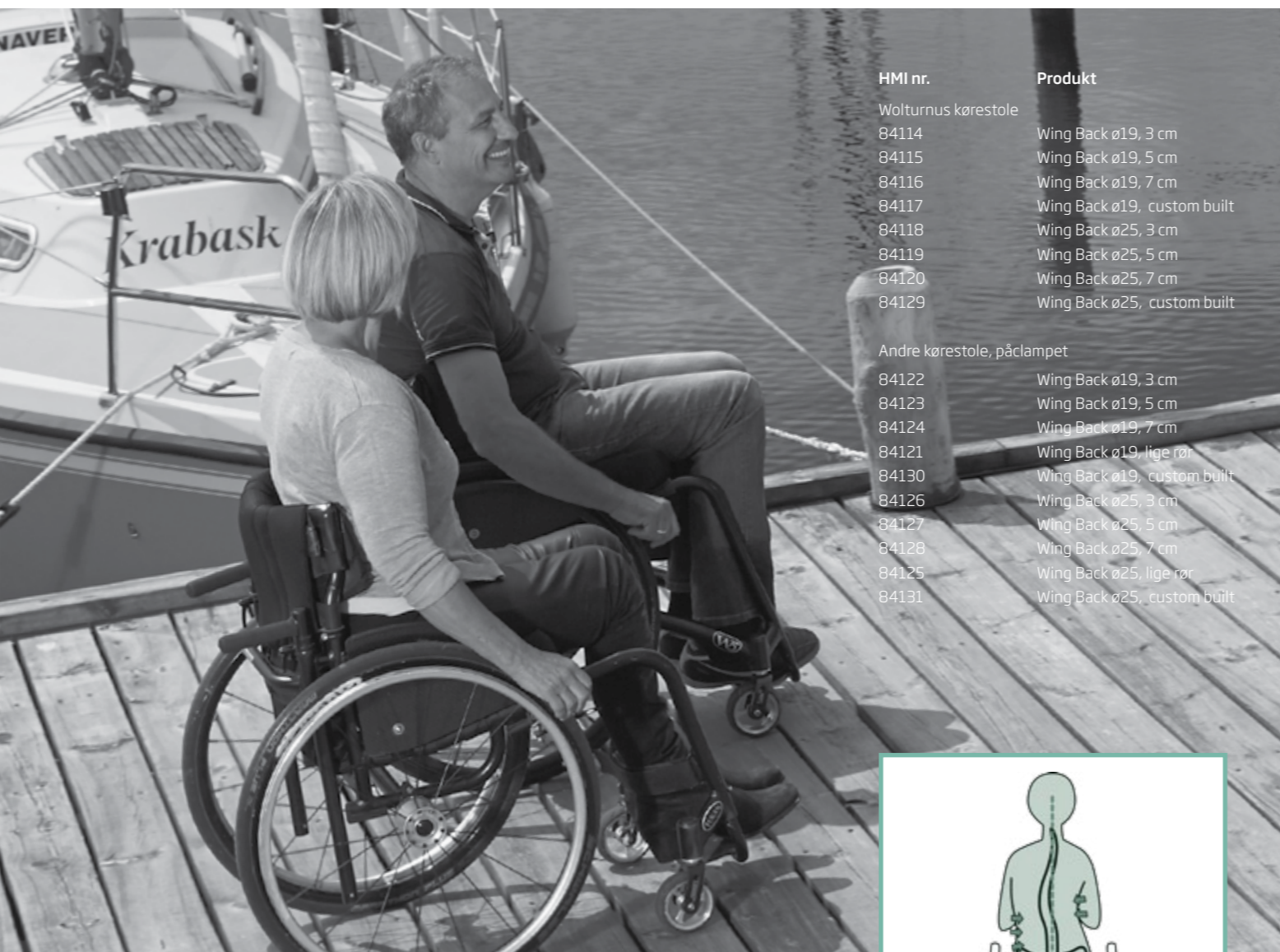

HMI nr.	Produkt
Wolturnus kørestole	
84114	Wing Back ø19, 3 cm
84115	Wing Back ø19, 5 cm
84116	Wing Back ø19, 7 cm
84117	Wing Back ø19, custom built
84118	Wing Back ø25, 3 cm
84119	Wing Back ø25, 5 cm
84120	Wing Back ø25, 7 cm
84129	Wing Back ø25, custom built
Andre kørestole, påclampet	
84122	Wing Back ø19, 3 cm
84123	Wing Back ø19, 5 cm
84124	Wing Back ø19, 7 cm
84121	Wing Back ø19, lige rør
84130	Wing Back ø19, custom built
84126	Wing Back ø25, 3 cm
84127	Wing Back ø25, 5 cm
84128	Wing Back ø25, 7 cm
84125	Wing Back ø25, lige rør
84131	Wing Back ø25, custom built



## Wing Back ILSAs egenskaber

Hjælper brugeren til symmetri og stabil siddekomfort

Optimerer støtte til ryggen

Fås med 3, 5 eller 7 cm fremspring

Kan indstilles asymmetrisk


Nem at justere i højde, bredde og dybde

Forbedrer balance og køreegenskaber

Aflaster brugeren, så kræfter kan bruges i hverdagen

Fås til fastramme-, foldbare og el-kørestole

## Sådan tager du mål

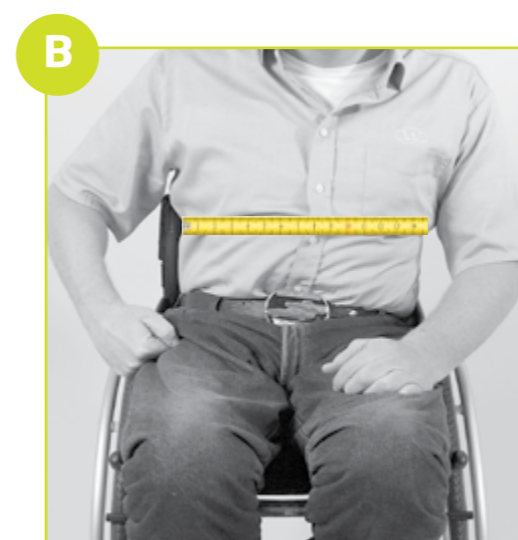


### A. Højde på rygrør

Mål fra sæderør under pude til fire cm under skulderblad eller til det ønskede støttepunkt.

**Dybde:** Mål fra rygrør til støttepunktet på brystkassen.

**B. Bredde:** Mål ryggens bredde

## Tilpasning af Wing Back

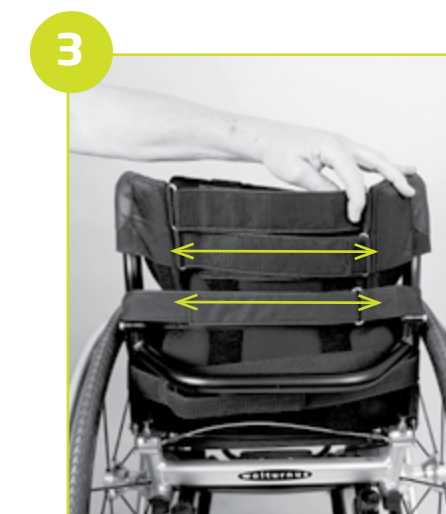

1. Juster **højden og bredden** trinløst i ét beslag med en Unbrako-nøgle

2-3. Ryggens **dybde** justeres let efter brugeren med 5 cm brede og stærke velcro-remme.

4. Trinløs asymmetrisk sideværtsjustering for tilpasning af **bredde og støttepunkter**





**WOLTURNUS**