

Leveres
nu også i en
XL version



Komfort og trykaflastning

Invacare **Heel Pro Evolution (HPE)** er en hælafaster, der tilbyder udpræget komfort og effektiv trykaflastning af hælområdet, for patienter med høj risiko for at udvikle tryksår. For patienter med trykskader på hæle, kan **HPE** være et effektivt supplement til behandlingen, idet det unikke design tilbyder fuldstændig aflastning af trykket på hælene, som det er anbefalet i NICE 2014 og Europæiske guidelines (EPUAP 2014).



Reduktion af tryk og shear på hæle

Det er meget vigtigt i den kliniske planlægning og praksis at holde fokus på at nedbringe tryk og shear kræfter på patientens hæle. Den posteriore prominens af hælen er årsag til voldsomt tryk, også når der anvendes et trykaflastende underlag (EPUAP 2014). Reduktion i frekvensen af tryksår, der involverer det udsatte hælområde, er kontinuerligt en klinisk udfordring. Dette skyldes, at det er vanskeligt at repositionere hælene og at hælområdet stort set er frit for subcutant fedt.

Baseret på Vicair® teknologi!

Invacare **HPE** er udviklet af **Vicair**, som er kendt for deres unikt designede trykaflastende puder, der ligeledes trykaflaster ved hjælp af de unikke Vicair® luftceller. **HPE** tilbyder fortrinlig redistribuering af tryk og optimal positionering. **HPE** består af et slidstærkt lavfriktionsmateriale yderst og et blødt materiale inderst. 4 luftceller, indbygget i **HPE**, former en komfortabel støvle effect rundt om foden og giver således optimal hælbeskyttelse.


Perfekt form og distribuering af tryk

HPE er let og komfortabel, og kan anvendes af patienten i alle positioner. Anvendes **HPE** i liggende og/eller siddende position i sengen, aflastes hælene optimalt. **HPE** kan anvendes forebyggende og som et effektivt supplement til behandling af eksisterende tryksår på hæle. Luftcellerne i **HPE**, tilbyder optimal komfort og en stabil positionering af foden, med henblik på at redistribuere trykket på hælområdet.

Med fokus på at reducere risikoen for trykskader som følge af shear, er **HPE** forsynet med et glat ydermateriale, der minimerer friktion mellem patienten og underlaget.

HPE reducerer endvidere smerte over en længere periode og kan bidrage til at forhindre dropfod.

Egenskaber

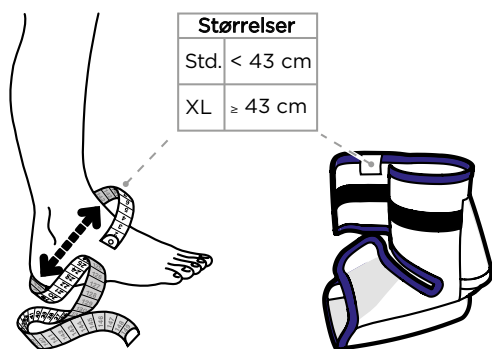




HPE leveres i 2 størrelser med henblik på at tilgodese de fleste fod- og ankel dimensioner. Borgere med en vristkontur på mere end 43 cm anbefales at anvende størrelse XL.



HPE er forsynet med en velcrolukning, der tilpasses individuelt for at opnå optimal positionering. **HPE** kan maskinvaskes uden at luftcellerne fjernes, og den kan tørres i tørretumbler ved op til 60 grader.

Tekniske data

 0,1 kg	 Rengøring: 60°	 2 størrelser: standard og XL, XL anvendes ved en vristkontur på mere end 43 cm.
---	--	--



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Heel Pro Evolution hælflaster - DK
- 08/2016



Yes, you can.®