

ORTHO LIGHT[®]

Let sædesystem til den passive bruger



SÆDESYSTEMER

MEYRA[®]
ORTOPEDIA

inter[®]
Gesellschaft für Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH

ORTHOLIGHT®

Systemet der giver en fysiologisk korrekt siddestilling

ORTHOLIGHT er konciperet til små brugere, som ikke er i stand til selvstændigt at indtage en siddeposition eller kunne holde den, og i de tilfælde, hvor brugernes bevægelser er reduceret til en minimal aktivitet. Måske fordi samspelet mellem bækkenet og rygsøjlen ikke fungerer, som det skal, pga. deformiteter i det støttende ligamentum eller pga. insufficienser i bevægeapparatet. Dette lette system er en innovativ videreudvikling af sædesystemet ORTHOLINE. ORTHOLIGHT udmærker sig ligesom forgængeren ved, at man har mulighed for at producere nøjagtig efter brugerens størrelse. Derudover skiller ORTHOLIGHT sig ud fra de andre modeller ved at have en endnu lettere konstruktion.

Specialfremstillet opret siddeposition

ORTHOLIGHT er en sædeenhed, der er produceret af aluminium og består af en sæde- og ryggenhed, som er forbundet med hinanden med et hængsel. ORTHOLIGHT forsynes med en aftagelig polstring i standardudførelse eller en individuel specialproduceret polstring. ORTHOLIGHT kan valgfrit udstyres med en manuel trinløs indstilling af ryghældningen. Ydermere er der et omfattende udvalg af ekstra udstyr, som f.eks. diverse fikseringsanordninger, polstringer, støtter til hoved, krop, bækken, arme, ben og fødder, alt efter hvilket behov, den pågældende bruger har. Passende til sædeenheden fås forskellige interCo-understel både til indendørs og udendørs brug. Vha. en trapezformet adapter kan ORTHOLIGHT hurtigt og nemt monteres på de forskellige understel.

Komfortabel polstring og samtidig let at rengøre

For patienter, hvor en standardkørestol ikke er tilstrækkelig og som pga. sygdomsbilledet er nødt til at sidde længe i en bestemt fysiologisk position, er polstringen særlig vigtig. De enkelte komponenter til polstringen er betrukket med et stofmateriale, som lader huden ånde og kan meget let tages af for at blive vasket, eller det kan udskiftes, hvis det pga. en udviklingsbetiget ændring anses for nødvendigt. De mange forskellige kombinationsmuligheder, både hvad angår den udvendige sædeenhed og de eksisterende stofkombinationer, er medvirkende til, at ORTHOLIGHT er et produkt med alsidige anvendelsesmuligheder.

Attraktivt design

I forbindelse med revisionen af modellen ORTHOLIGHT tilstræbte man udover en forbedring af de forskellige funktioner også en optimering af selve designet. Med den høje kvalitet, hvad angår materialer, lak og stoffer og de mange kombinationsmuligheder med andre understel, fremstår ORTHOLIGHT nu i et meget mere tiltalende design end de sædvanlige hjælpemidler med rehabiliteringen for øje. Vi anbefaler dig – i fællesskab med din terapeut og Meyra Ortopedia Danmark – at udvælge det passende hjælpemiddel. Vi er naturligvis også parate til at hjælpe på selve stedet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os. Vi hjælper gerne!



ORTHOLIGHT på ROOMY-understel



DYNALINE-fikseringsanordninger kan let fastgøres på sæde-/ryggenheden

Medicinske krav

ORTHOLIGHT anvendes til brugere, som har vanskeligt ved at indtage en siddeposition i fysiologisk henseende, eller når anatomiske ændringer gør det umuligt. Samspillet mellem bækken og rygsøjle fungerer ikke, som det skal - enten pga. medfødte eller erhvervede deformiteter i det støttende ligamentum (f.eks. ossøse ledstrukturer) eller pga. medfødte eller erhvervede insufficienser i bevægeapparatet, bækkenet og/eller rygsøjlen. Manglende kropsfunktioner grundet spasmer, atetose, paraplegi, plegi,

hypertoni, hypotoni, alle muskelsygdomme, f.eks. muskeldystrofi, skeletmisdannelser og tab af ekstremiteter, alle neurologiske sygdomme samt alle former for psykiske handicap. Systemet kompenserer for udpræget ukorrekte og/eller ustabile siddepositioner, så man kan sidde i fysiologisk korrekt stilling i længere tid ad gangen. I tilfælde af betydeligt reduceret eller manglende kropsstabilitet, eller hvis der foreligger en udpræget kropsdeformitet, har man mulighed for at korrigere og aflaste siddestillingen.

Udstyr

Dette system består af en selv bærende udvendig skål af aluminium og fås i fem forskellige standardstørrelser. Skålen lakeres indvendig og udvendig i en farve, som du selv kan vælge. Seriemæssig fås den udvendige skal med en fast ryghældning, men der kan tilvælges en trinløs indstilling af ryghældningen. De polstrede elementer, der er lavet af koldskum, enten i standardudførelse eller individuelt udfærdigede, fastgøres i standardskålen. Da elementerne tilpasses enkeltvis, opnås en stor tilpasningsgrad til brugeren og vækstfasen, hvilket er medvirkende til gode resultater under behandlingen. Da der anvendes svedtransporterende og hudvenlige materialer, opstår der ikke varme eller fugtighed. Et omfattende tilbehørsprogram muliggør en tilpasning i mange situationer, hvor der er brug for hjælp.

ORTHOLIGHT-valgmuligheder:

- Adapter til sædeskål
- Hovedstøtte-system
- Armlæn
- Benstøtter / fodplader
- Fikseringsanordninger

Din personlige konsulent i dit område hjælper med at finde frem til en individuel løsning under hensyntagen til de personlige behov. Vi garanterer levering af reservedele eller en ny tilpasning i mange år fremover.

Gennemprøvet sikkerhed - transport i bil

Produktkombinationen bestående af et sædesystem fra ORTHOLIGHT® og et understel fra SIMPLY LIGHT® og samtidig udstyret med en anordning til fastgørelse af kørestole i motorkøretøjer er blevet testet og godkendt jævnfør ISO 7176-19 samt ISO 10542-2. Denne produktkombination i forbindelse med en anordning til fastgørelse af kørestole i motorkøretøjer er egnet til befordring af brugeren i motorkøretøjer under den forudsætning, at motorkøretøjet er udstyret med en tilsvarende fastspændingsanordning.

Tekniske specifikationer*

	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4	Størrelse 5	Størrelse 6
Vægt uden bruger	7 kg	7,5 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg
Maksimal belastning	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg
Totalbredde udvendig uden armlæn	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm	49 cm
Indstilling af ryghældning	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Sædebredde (maks.)	26 cm	29 cm	32 cm	35 cm	38 cm	41 cm
Sædedybde	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45-50 cm
Ryghøjde	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	55 cm	60 cm

* Ret til ændringer forbeholdes

Standardfarver (lakeringer)


Kraftig blå (RAL 5005)



Standardfarve



Påtrykt mønster marmor sølv

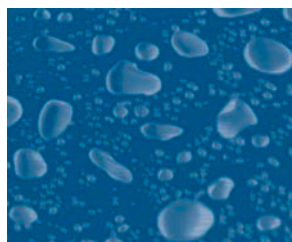

Påtrykt mønster vanddråber




Påtrykt mønster USA

Rosso traffico (RAL 3020)



Standardfarve

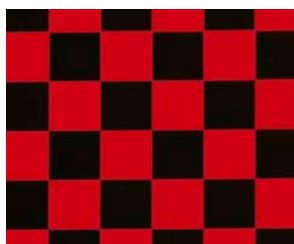

Påtrykt mønster ternet flag




Påtrykt mønster sorte diagonale linjer




Påtrykt mønster grå struktur

Nero (RAL 9005)



Standardfarve

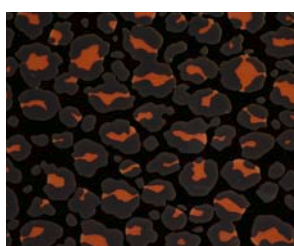

Påtrykt mønster tiger



Påtrykt mønster sølvgranulat



Påtrykt mønster marmor sølv

Bianco marmor



Standardfarve



Påtrykt mønster riflet




Påtrykt mønster karbondesign




Påtrykt mønster tiger

Stofbetræk

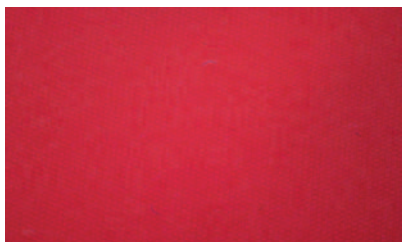

Kraftig rød

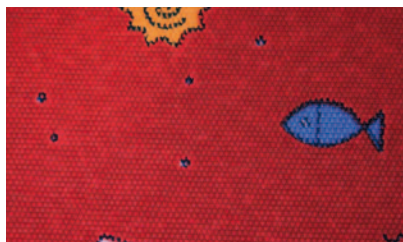

Fisk rød



Leander orange



Leander blå




Leander lilla




Små punkter grå



Pearl CS

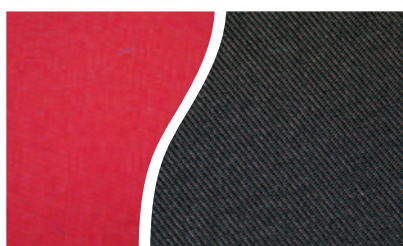


Kraftig rød/sort

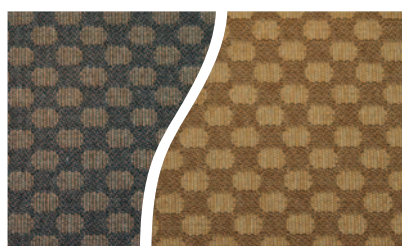

Smuk mørkebrun/smuk lysebrun



Dybblå/afstandsstykker grå

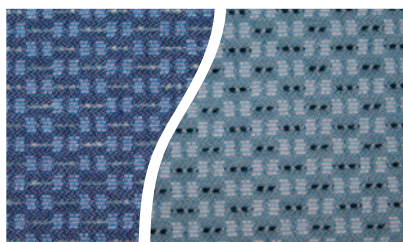

Linjer mørkeblå/linjer lyseblå



Sort/sort- og rødstribet

Denne brochure er blevet udleveret af:

MEYRA[®]
ORTOPEDIA
VI BEVÆGER MENNESKER!

Meyra Ortopedia Danmark K/S

Støberivej 1
3660 Stenløse

Tlf. 47 10 77 55
Fax. 47 10 77 53

Din kompetente partner i din nærhed



certificeret ifølge

DIN EN ISO 9001:2008
Reg.-nr. 73 100 357-1



DIN EN ISO 13485:2007
Reg.-Nr. 70 105 357-1

TÜV Hessen



**Gesellschaft für Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH**

Im Auel 50 · D-53783 Eitorf · Germany

Tel.: +49 2243 8807-0
Fax: +49 2243 8807-29

E-Mail: info@interco-reha.de
www.interco-reha.de