

## Mono Plus

# Trykaflastende skummadras med Anti-shear

Mono Plus er en trykaflastende skummadras med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den tryk-reducerende effekt. Mono Plus er anbefalet primært til tryksårforebyggelse op til høj risiko eller sårkategori 4.



### Materiale og opbygning

Mono Plus er med højelastisk koldskum og inkontinensbetræk. Mono Plus er opskåret skum på én side med forskellige nedskæringsdybder. Madrassen er opdelt i 5 zoner så det svarer til kroppens trykpunkter. Den er desuden forsynet med en bred skumkant, for at sikre en bedre stabilitet ved mobilisering ind og ud ad sengen.

### Anti-shear

Det specialdesignede multistrækbetræk har 3 shearnedsættende zoner under hæle, sacrum og skulderblade. Det beskytter mod de skader, der kan opstå med forskydning og rotation/forflytning.

### Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og

vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

### Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med håndtag, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

### Rengøring


Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

## Mono Plus

# Trykaflastende skummadras med Anti-shear

Mono Plus er en trykaflastende skummadras med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den tryk-reducerende effekt. Mono Plus er anbefalet primært til tryksårforebyggelse op til høj risiko eller sårkategori 4.

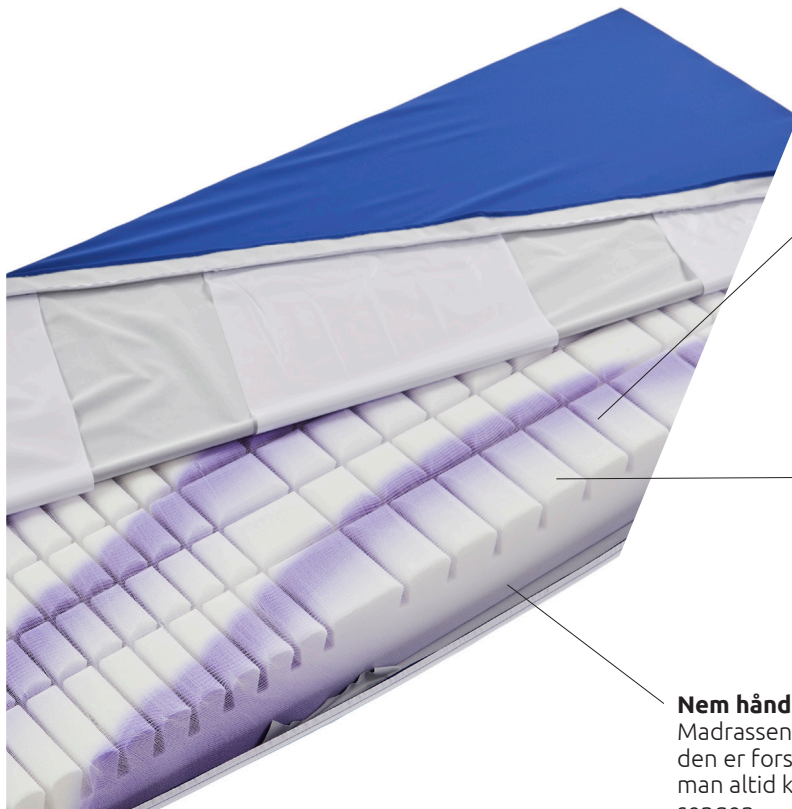

### Opbygning

Mono Plus er med højelastisk koldskum og inkontinensbetræk. Mono Plus er opskåret skum på én side med forskellige nedskæringsdybder.

### Materiale

Madrassen er lavet i brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet. Betrækket er åndbart og strækbart PU.

### Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med håndtag, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen.

## Tekniske data

Mono Plus fås i flere udgaver:

**83x200x14 cm**

HMI nr.: 119762

Varenr.: MonoP83

**85x200x14 cm**

HMI nr.: 130732

Varenr.: MonoP85

**88x200x14 cm**

HMI nr.: 119765

Varenr.: MonoP88

**Brugervægt:** 0-150 kg

**Madrasmvægt:** Ca. 10 kg, alt efter størrelse

**Vægtfylde:** 42 kg/m<sup>3</sup> = høj levetid

**Materiale:** Brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet

**Betræk:** Åndbart og strækbart PU

Patientens stilling skal ændres regelmæssigt ved brug af et venderegime, madrassen kan ikke stå alene i behandlingen.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.