

NYHED!

Etac My-Loo kan også monteres på væghængte toiletter uden gennemgående bolte



Etac My-Loo

Fast- eller løstmonteret
toiletforhøjer

 **etac**[®]

Etac My-Loo Fastmonteret toiletforhøjer

En funktionel toiletforhøjer der passer på de fleste toiletter - også væghængte toiletter, hvor det ikke er muligt at benytte gennemgående bolte! My-Loo er udviklet med fokus på høj komfort, sikkerhed og støtte, og er yderst nem at montere. Det unikke og patenterede armlæn er med til at give brugeren en god oplevelse.

Etac My-Loo skaber muligheder!

Etac My-Loo gør det muligt for brugere med reduceret mobilitet eller problemer med balancen at besøge toiletet selvstændigt og sikkert.

Det forhøjede sæde og de stabile armlæn gør det nemmere at sætte sig og rejse sig igen. De bløde linjer og den store åbning gør My-Loo velegnet til de fleste brugere. Den er designet til at passe ind i ethvert badeværelsesmiljø og samtidig give optimal komfort og tilgængelighed.

Kan top-monteres på væghængte toiletter uden gennemgående bolte!

Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer er meget velegnet til montering på væghængte toiletter. Produktet er udviklet, så det imødekommer den udvikling der er i både private boliger og plejeboliger, hvor man i større udstrækning monterer væghængte toiletter.

Ved topmontering skal der tilkøbes monterings sæt, der også indeholder støtteben. Når der benyttes støtteben, har My-Loo en max brugervægt på 200 kg.



Etac My-Loo Fastmonteret toiletforhøjer

	HMI-nr.	Varenr.
2 cm, med armlæn	126701	80301510
6 cm, med armlæn	127005	80301511
10 cm, med armlæn	127008	80301512
6 cm, uden armlæn	127011	80301513
10 cm, uden armlæn	127013	80301514

Se tilbehør på s. 5

Vægt

My-Loo med armlæn, 2 cm: 3,2 kg
 My-Loo med armlæn, 6 cm: 3,4 kg
 My-Loo med armlæn, 10 cm: 3,7 kg

Max. brugervægt

150 kg
 200 kg ved brug af tilbehøret Støtteben varenr. 80301603.

Materiale

Armlæn: Polypropylen
 Sæde/Låg: Polypropylen
 Beslag: Rustfrit stål, Polypropylen, TPE

Design

Myra Industriell Design AB

myra

Vedligehold



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i vaske/ desinfektionsmaskine ved 85°C i tre minutter.

Egenskaber



Justerbare armlæn

Ved hjælp af en unik patenteret løsning, kan armlænene nemt og hurtigt justeres i 3 højder. Armlænene slås nemt op og ned uden risiko for at klemme brugeren. De kan justeres individuelt, og det er muligt kun at anvende ét armlæn.



Enkel og praktisk montering - også på væghængte toiletter

My-Loo monteres hurtigt og nemt, og nye smarte propmøtrikker gør det muligt at fastgøre toiletsædet ovenfra. Ved topmontering skal monterings sæt, der indeholder støtteben, tilkøbes.



Rummelig og praktisk

Sædets udformning og en ekstra stor sædeåbning giver fremragende tilgængelighed. Designet tilbyder god plads omkring sædet og dermed masser af plads til alle kropsformer.



Stabilitet

My-Loo fastmonteret toiletforhøjer sidder sikkert på plads på toiletet og har max brugervægt 150 kg. For yderligere støtte og øget vægtkapacitet kan støtteben (se tilbehør s. 5) tilføjes. Hermed øges max brugervægt til 200 kg.



Sikker og komfortabel

Med stabile armlæn og det veldesignede sæde, gør My-Loo toiletbesøg sikkert og komfortabelt for brugeren. Hvis ekstra komfort ønskes, kan en blød sædepude tilkøbes (se tilbehør s. 5).



Rengøringsvenlig

De rene, glatte overflader er lette at tørre af med en blød klud. Ved særlig grundig rengøring, kan sædet og armlænene nemt fjernes fra beslagene - og lige så enkelt sættes på plads igen.

Varianter



My-Loo 2 cm med armlæn



My-Loo 6 cm med armlæn



My-Loo 10 cm med armlæn








My-Loo 6 cm



My-Loo 10 cm

Mål

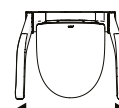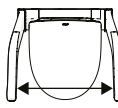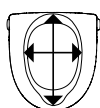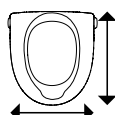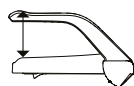

Model/Varenr.	Højde armlæn	Bredde/Længde	Indvendige mål	Højde	Bredde mellem armlæn	Total bredde
80301510	21,5/24,5/28,5 cm	36/40 cm	21,5/28,5 cm	2 cm	48 cm	57 cm
80301511	17,5/20,5/24,5 cm	36/40 cm	23/36 cm	6 cm	48 cm	57 cm
80301512	13,5/16,5/20,5 cm	36/40 cm	23/36 cm	10 cm	48 cm	57 cm
80301513	-	36/40 cm	23/36 cm	6 cm	-	-
80301514	-	36/40 cm	23/36 cm	10 cm	-	-

Ved brug af Kit til topmontering, kan My-Loo monteres på toiletter uden gennemgående bolte. Ovenstående mål skal opfyldes, samt monteringshuller skal være Ø20 mm og dybde 20-50 mm.

My-Loo 2 cm – Funktionelle toiletarmhlæn

My-Loo 2 cm er den perfekte løsning når du ønsker toiletarmhlæn, og samtidig vil undgå at bore i væggene eller gulvet. Denne løsning er monteret direkte på toiletet og fungerer som et almindeligt toiletsæde, blot monteret med armlæn. Som med de andre My-Loo varianter med hævet sæde kan armlænene indstilles til tre forskellige højder, så de passer til forskellige behov. Med sit moderne, diskrete design passer My-Loo smukt ind i de fleste badeværelsesmiljøer.



Alle Etac My-Loo leveres i en smart og håndterbar kasse med håndtag. Let og brugervenlig, både ved håndtering, montering og brug!

Tilbehør



Blødt sæde

Ergonomisk formet og dejligt blødt. Yder ekceptionel trykafastning og behagelig støtte. Materiale: Polyurethan.

Varenr. 80301604



Tværstang

En sikker støtte at holde fast i. Monteres på armlænene. 60,5 cm. Materiale: Aluminium, polyethylen.

Varenr. 80303034



Støtteben

For ekstra stabilitet. Øger max. brugervægt fra 150 kg til 200 kg. Sammenklæpelige. Materiale: Aluminium, polyamid, polypropylen, TPE, rustfrit stål.

Varenr. 80301603



Toiletpapirsholder

Monteres på armlænet. Materiale: Polyamid, rustfrit stål.

Varenr. 80301601



Opbevaringskurv

Monteres på armlænet. Materiale: Polyamid, polyester/mesh (net), rustfrit stål.

Varenr. 80301602



Kit til topmontering

Med dette kit kan My-Loo monteres på toiletter uden gennemgående bolte (med monteringshuller: Ø20 mm og dybde 20-50 mm.). OBS: De medfølgende støtteben skal monteres. Materiale: Aluminium, polyamid, Rustfrit stål, EPDM.

Varenr. 80301626



Armlæn

Sælges i par (højre + venstre). Materiale: Polypropylen.

Varenr. 80301606



Etac My-Loo Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop

I samarbejde med erfarne industrielle designere har vi udviklet den nye My-Loo toiletforhøjer med kantstop. Med sine bløde, svungne linjer og fremragende ergonomi har toiletforhøjeren ekstra komfort og et design, som passer perfekt i det moderne badeværelse.

Designet til funktion og komfort

Etac My-Loo er udviklet til at falde i med badeværelsesmiljøet og har et design, som giver optimal komfort og tilgængelighed. De bløde linjer og den store åbning gør My-Loo velegnet til de fleste brugere. Fås i to højder, med eller uden låg.

Nem at holde ren og frisk

My-Loo toiletforhøjer med kantstop består af få dele i holdbare materialer. Den er nem at tørre af med en blød klud. Hvis der er behov for ekstra grundig rengøring, er det nemt at fjerne toiletforhøjeren og lige så nemt at sætte den tilbage igen.

Sikker og hurtig montering

Det tager kun nogle få sekunder at montere Etac My-Loo. Den fastgøres med to unikke kantstop, som er lette at tilpasse forskellige typer toiletter. Kantstoppernes ekstra store friktionsoverflader og fleksible materiale sikrer god fastgørelse til porcelænet.

Placér blot toiletforhøjeren på toilettet, og skub kantstopperne på plads. Klik - og monteringen er færdig.



Etac My-Loo Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop

	HMI-nr.	Varenr.
6 cm	109592	80301520
10 cm	109594	80301521
6 cm med låg	109595	80301522
10 cm med låg	109596	80301523

Vægt

6 cm: 0,8 kg	10 cm: 1,1 kg
6 cm med låg: 1,2 kg	10 cm med låg: 1,4 kg

Max. brugervægt

190 kg

Materiale

Polypropylen og TPE

Design

Myra Industriell Design AB

Vedligehold



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i vaske/desinfektionsmaskine ved 85°C i tre minutter.

Egenskaber



Enkel at holde ren og frisk

De glatte overflader er nemme at rengøre med en blød klud. Hvis der er behov for ekstra grundig rengøring, er det nemt at fjerne toiletforhøjeren og lige så nemt at sætte den tilbage.



Designet til funktion og komfort

Toiletforhøjerens bløde former giver tryk støtte og stor komfort. Ekstra stor åbning og stor udskæring letter tilgængeligheden i forbindelse med personlig hygiejne.



Sikker og hurtig montering

De brugervenlige kantstop har mange indstillingsmuligheder, store friktionsflader og konstrueret helt uden skruer. Det gør, at My-Loo altid sidder sikkert og stabilt, og er nem at montere uanset type af toilet.







Varianter

My-Loo toiletforhøjer med kantstop fås i to forskellige højder, 6 og 10 cm, med eller uden låg.



Mål

Ydre, bredde x dybde	36 cm x 40 cm
Åbning, bredde x dybde	23 cm x 36 cm
Sædehøjde	6 cm, 10 cm
Afstand mellem kantstop	29 cm - 38 cm

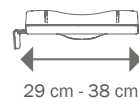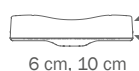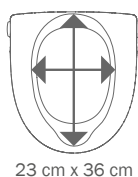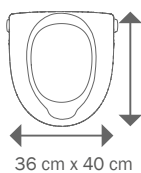



Version 1 - 2020 - Forbehold for trykfej og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities