



TOPRO

Taurus-serien

Ergonomiske gangbord til sikker og effektiv patientmobilisering

Klinisk dokumenteret til at understøtte hurtigere bedring og reducere arbejdsbelastningen



Scan QR-koden for at læse den kliniske rapport om, hvordan Taurus understøtter tidlig og effektiv mobilisering.

DK

made in Norway



TOPRO Taurus-serien

Pålidelig støtte til mobilisering og genoptræning



Taurus-serien af ergonomiske gangbord er designet til både klinisk og privat brug og giver sikker, pålidelig støtte til patienter i genoptræning – samtidig med at den reducerer arbejdsbyrden for terapeuter og plejepersonale.

Taurus E har elektrisk højdejustering, som reducerer belastningen på personalet og understøtter hurtig, selvstændig mobilisering. Taurus H er et robust, manuelt alternativ, hvis eldrift ikke er nødvendig. Begge modeller kombinerer ergonomiske albuestøtter, kompakt stabilitet og intuitiv betjening for bedre behandlingsresultater og optimerede mobiliseringsrutiner.



Jeg følte mig virkelig tryk ved at stå op igen med Taurus.

Patientfeedback fra NHS

Hvorfor vælge TOPRO Taurus?

Reducerer arbejdsbyrden for plejepersonale

- Muliggør sikre forflytninger uden lift
- Mindsker fysisk belastning ved hydraulisk eller elektrisk støtte
- Den elektriske model kan betjenes af én person
- Frigør tid for det kliniske personale

Reducerer indlæggelsestid og omkostninger

- Hurtigere mobilisering = tidligere udskrivning
- Gennemsnitligt 0,52 dage kortere hospitalsophold
- Estimeret besparelse: £156–£364 pr. patient
- Passer til ERAS*-protokoller og hospitalets KPI'er

Foretrukket af personale og patienter

- 100 % af personalet foretrak Taurus frem for andre ganghjælpemidler
- 89,5 % blev mobiliseret på operationsdagen
- 97 % kom på toilettet uden hjælp

* Enhanced Recovery After Surgery – forbedret restitution efter operation

Øger sikkerhed og selvstændighed

- Fremmer oprejt kropsholdning og balance
- Mere stabil end krykker og gangstativer
- Velegnet efter operation, stroke eller til neurologisk genoptræning
- Understøtter både assisteret og selvstændig brug
- Muliggør tidlig og sikker mobilisering – op at gå samme dag som operationen

Udviklet med fokus på personalets sikkerhed

Muskuloskeletale lidelser (MSD) er en af de førende årsager til sygefravær i det britiske sundhedsvæsen og stod for 7,8 millioner tabte arbejdsdage i 2023/24. (Kilde: Health and Safety Executive)

TOPRO Taurus E hjælper med at reducere denne risiko ved at muliggøre sikrere og mere ergonomiske mobiliseringsrutiner – især ved tunge eller immobile patienter.



Vidste du?

Med en gennemsnitlig besparelse på 3 100 kr per patient kan Taurus E tjene sig selv hjem efter behandling af blot 11 patienter – baseret på reduceret indlæggelsestid.

Kilde: BOA Clinical Audit (2024) og estimeret gennemsnitlig hospitalsomkostning på 5 950 kr per sengedag i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 2023).

Detaljer og produktspecifikationer

Taurus H – Pålidelig manuel støtte

Et praktisk valg til afdelinger, genoptræning og bade faciliteter

Giver sikker, håndbetjent støtte uden el.

- **Perfekt hvor strøm ikke er nødvendigt** – jævn hydraulisk højdejustering
- **Tilrettelagt for aktiv pleje** – giver nem og tæt adgang for terapeuter og plejepersonale
- **Stabil i alle situationer** – fodbremse på alle fire hjul og retningslås
- **Tilpasses individuelt** – ergonomiske albuestøtter og justerbare håndtag

En holdbar, kabelfri løsning til daglig patienthåndtering og tidlig mobilisering.



Til venstre Taurus H uden håndbremse, til højre Taurus E.

Taurus E – Pålidelig elektrisk støtte

Støtter patienter med minimal personalebehov

Muliggør sikre forflytninger og højdejusteringer uden hjælp – ideel til postoperativ mobilisering og tidlig genoptræning.

- **Mist aldrig opladeren** – LINAK® batterisystemet er fuldt integreret og uden løse dele (Udskifteligt batteri tilgængeligt)
- **Effektiv hverdag** – pålidelig ydeevne hele dagen på én opladning
- **Mindre ladetid, mere mobilisering** – dobbelt batterikapacitet for længere brug
- **Klar, når du er det** – hurtig opladning holder Taurus klar til kontinuerlig klinisk brug
- **Reager hurtigt** – nødstopknap til uforudsete patientreaktioner
- **Ingen bøjning** – fjernbetjening (ekstraudstyr) gør højdejusteringen ergonomisk

Designet til smidig, elektrisk højdejustering, der forbedrer arbejdsgange og patienthåndtering.

Bemærkning


ROI-beregningerne er baseret på en 12 ugers klinisk audit udført af British Orthopaedic Association (BOA) i 2024 med fokus på planlagte hofte- og knæoperationer inden for et ERAS-program. En gennemsnitlig reduktion i indlæggelsestiden på 0,52 dage blev observeret i denne specifikke britiske kontekst.

Besparselserne for Storbritannien er baseret på NHS-referencetaster. Estimer for andre lande er baseret på gennemsnitlige nationale hospitalsomkostninger per sengedag og kan variere afhængigt af region, hospital og patientgruppe. Da sundhedssystemer varierer, er resultaterne ikke direkte overførbare.

Detaljer og funktioner



Køre- og parkeringsbremse på samme greb på begge håndtag.

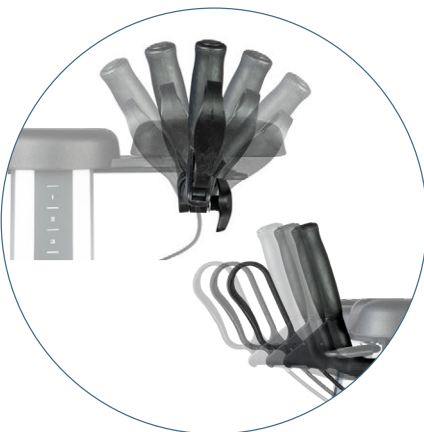

Let betjening af justerbare håndtag.



Sømløse, justerbare albuestøtter.



Integreret retningslås for svinghjul (aktiveres med foden). Fodbremse på alle hjul og modeller.



Vippekontakt til den elektriske højdejustering af Taurus E.

Brugervenlig højdejustering – skalaen gør det let at finde den rigtige position.

Modellspecifikationer

	Taurus H uden håndbremse	Taurus H	Taurus E
Køre- og parkeringsbremse på begge håndtag	✗	✓	✓
Bremserne kan betjenes uafhængigt	✗	✓	✓
Håndtag justerbare i vinkel og længde	✗	✓	✓
Parkeringsbremser (fodbremser) på alle hjul	✓	✓	✓
Justerbare albuestøtter	✓	✓	✓
Integreret retningslås på baghjul (aktiveres med fodpedal)	✗	✓	✓
Symboler på højdejusteringsknappen: – O = NED INGEN HANDLING OP	✗	✗	✓
Elektrisk højdejustering	✗	✗	✓
Hydraulisk højdejustering	✓	✓	✗
Kan anvendes i bad	✓	✓	✗
Kan give støtte ved oprejning (Vigtigt: Ikke en personløfter)	✗	✗	✓



Taurus H uden håndbremse



Taurus H



Taurus E




Tilbehør for øget komfort

Til hverdagsbrug



Bakke
Til sikker transport af mad og drikke

Art. nr. 814810

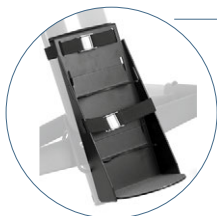

Holder til iltflaske
Sikker transport af den bærbare iltforsyning

Art. nr. 814820



Multifunktionsnet
Ekstra plads til nem opbevaring af småting (op til 2 kg)

Art. nr. 814821

For yderligere sikkerhed



Enhåndsbremse
(kan monteres på begge sider – fx efter stroke)

Art. nr. 814026



Sideunderstøtte til underarm (sæt)
For ekstra sidestabilitet

Art. nr. 814647



Transportplade
Til at flytte en ikke-mobil patient i stående position

Art. nr. 814645

Til brug på hospitaler



Infusionsstander
Til intravenøs brug under mobilisering

Art. nr. 814793



Vægophæng til oplader
Holder opladeren inden for rækkevidde og forhindrer, at den bliver væk

Art. nr. 816094



Holder til væskebeholdere
Holder væskebeholdere sikkert på plads

Art. nr. 814034



Kontrolpanel til højdejustering (Taurus E)
Ekstern kontrol til højdejustering – nem at betjene

Art. nr. 816099



Model	Taurus H	Taurus E
Type	H (hydraulisk fjeder)	E (elektrisk)
Anbefalet brugerhøjde	140–210 cm	140–210 cm
Maksimal brugervægt	150 kg	150 kg
Højde på albuestøtter (målt fra armlænet)	86.5–132 cm	88.5–138 cm
Indvendig bredde mellem albuestøtter	34–47 cm	34–47 cm
Udvendig bredde mellem albuestøtter	57–69 cm	57–69 cm
Længde på albuestøtter	34 cm	34 cm
Håndtag	Ø 3.5 cm	Ø 3.5 cm
Afstand mellem bremsegreb	74 cm	74 cm
Drejeradius	91 cm	91 cm
Bredde for/bag (indvendig)	48 cm / 57 cm	48 cm / 57 cm
Bredde for/bag (udvendig)	57 cm / 66 cm	57 cm / 66 cm
Maksimal længde (ydre mål)	78 cm	78 cm
Hjuldiameter	12.5 cm	12.5 cm
Hjulbredde	3.1 cm	3.1 cm
Produktvægt	18 kg	22 kg
Anvendelsesområde	Indendørs område	

Model	Art. nr.
Taurus H uden håndbremse (130 N hydraulisk fjeder)	814785
TOPRO Taurus H (130 N hydraulisk fjeder) inkl. justerbare håndtag, køre- og parkeringsbremse, retningslås.	814787
TOPRO Taurus E (elektrisk) inkl. justerbare håndtag, køre- og parkeringsbremse, retningslås.	815710

2 års garanti, ekskl. montering og sliddele.

Premiumprodukter fra Norge

Producent:



TOPRO Industri AS

Rambekkvægen 1

2816 Gjøvik

Norge

Tel.: (+47) 61 13 46 00

E-mail: info@topromobility.com

Web: www.topromobility.com

Distribution:



TOPRO Mobility AB

Vindkraftsvägen 6

135 70 Stockholm

Sverige

Tel.: (+46) 8 311 330

E-mail: info@topromobility.se

Web: www.topromobility.dk



Udviklet og fremstillet i Norge.

TOPRO garanterer høj kvalitet og tilbyder 2 års garanti på Taurus-modellerne (ekskl. montering og sliddele)

Kvalitetsstandarder

EN ISO 9001 – Kvalitet

EN ISO 14001 – Miljø

EN ISO 11199-3 – Ganghjælpemiddel

EN ISO 10993-5 – Biokompatibilitet

TOPRO Taurus E er TÜV-certificeret i henhold til:

EN ISO 11199-3 (standard for ganghjælpemidler og rollatorer)

IEC 60601-1 (medicinsk elektrisk udstyr – generelle sikkerhedskrav)

IEC 60601-2 (medicinsk elektrisk udstyr – specifikke sikkerhedskrav)

Leveres med 2 års garanti, som dækker fabrikationsfejl (ekskl. skader forårsaget af forkert brug eller normal slitage).

made in Norway



Forhandler