



WOLTURNUS

DYNAMISK ARMSTØTTE

MODULBASERET OG JUSTERBAR

 Bodypoint®

Justérbar albue-, underarms- og håndstøtte

Dynamisk Armstøtte

Kernen i Den Dynamiske Armstøtte har været ønsket om at udvikle en brugervenlig og anatomisk korrekt armstøtte, som i høj grad ville reducere risikoen for langvarig dysfunktion i de øvre ekstremiteter og fremme funktionel aktivitet.

Justérbar albue-, underarms- og håndstøtte

Den Dynamiske Armstøtte er markedets mest brugervenlige og anatomisk korrekte armstøtte. Den modulbaserede og justerbare armstøtte reducerer risikoen for langvarig dysfunktion i de øvre ekstremiteter og fremmer funktionel aktivitet. Den kan desuden anvendes umiddelbart efter en skade for at opnå optimale kliniske resultater.

Den giver tre støttepunkter ved albue, underarm og hånd med fokus på at forebygge kontrakturer, skuldersmerter og skuldersubluksation. De unikt formede puder fremmer desuden en funktionel og neutral position af underarm og hånd.

Drejemechanismen giver også mulighed for aktiv bevægelsesfrihed (ROM), og quick release-mekanismen gør det nemt at fjerne den fra kørestolens armlæn, så overflytninger er mere sikre og bekvemme.



Kan tilpasses personlige behov


Håndblokken og underarmspuden kan justeres, så den passer til længden på brugerens arm. Hele håndblokken kan desuden drejes indad og udad for at tilpasse sig hånden og håndleddets specifikke placering.

Den Dynamiske Armstøtte kan monteres på alle Wolturnus' kørestole, og der findes beslag til de fleste kørestole på markedet. Vælg blot monteringsklemmer, der passer til 19 mm, 22 mm eller 25 mm runde rør (3/4", 7/8" og 1") eller en mere universel adapter, der passer til forskellige flade armlæn. Herefter kan den fastgøres til de fleste højdejusterbare armlæn.

3 vitale støttepunkter

- ① Albuestøtte
- ② Underarmspude
- ③ Håndblok



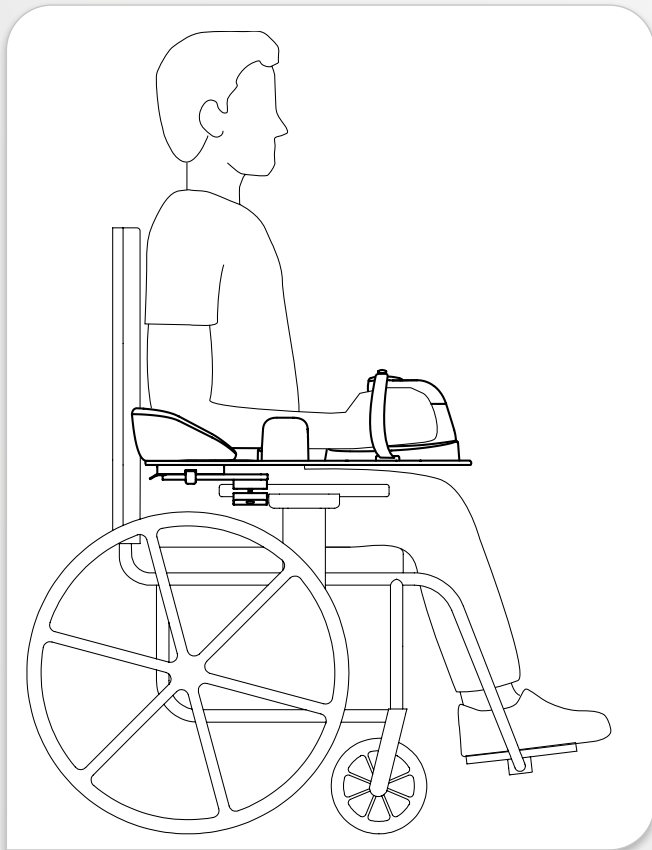

✓ OPTIMAL PLACERING AF SKULDEREN


- Den modulbaserede armstøtte kan justeres så den passer til en bred vifte af brugere.
- Den har blødt og holdbart skum, der giver en korrekt trykfordeling og forhindrer sublaxation.
- Korrekt positionering reducerer i høj grad belastningen på skuldermusklerne og giver proprioceptive input.

✓ UNDERARMSPUDE

- Underarmspudden kan justeres i både dybde og vinkel for at sikre korrekt kontakt og positionering.
- Underarmspudden kan vendes (drejes 180 grader), så den kan støtte den mediale eller laterale underarm.


✓ QUICK-RELEASE FUNKTION

- Unik hurtigudløsermekanisme
- Let at fjerne til overførsler
- Klikker fast på plads
- Styrkeafprøvet, solidt fastgørelseselement

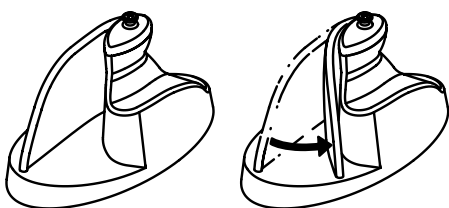

✓ UNIK FLEKSIBEL HÅNDBLOK

- Den dynamiske håndblok giver fingrene mulighed for at bøje sig, samtidig med at den tilskynder hånden at returnere til en neutral position, når muskelspændingen er løst.
- Tommelfingeren hviler behageligt på den forhøjede sektion i en naturlig hvilestilling.
- Den polstrede strop går over brugerens mellemkrops-knogleled for at holde brugerens hånd sikkert og behageligt i position.
- Justér håndledsvinklen, så den passer til klientens foretrukne position.

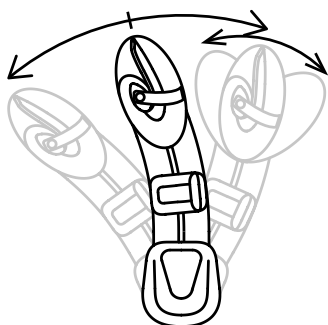

✓ DYNAMISK BEVÆGELSE

- Drejemekanismen, der er placeret under albuepudden, giver mulighed for 60° rotation og stimulerer proprioception samt øger styrke og bevægelsesomfang.
- Positionen kan også låses i trin på 5° for at finde den ideelle hvilestilling for brugeren.



WOLTURNUS

SALGSTEAM SJÆLLAND



Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 85



Christina Thornberg
Ergoterapeut
ctt@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 80



Mille Engly Honoré
Børneterapeut
mho@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 86



Marcel Schäd Jannerup
Hjælpemiddeltekniker
mja@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 84



Lars Abildtrup
Salgskonsulent
loa@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 36 30



Pernille Andersen
Fysioterapeut
pha@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 51



Cathrine Strandby
Fysioterapeut
cst@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 56



Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut
ank@wolturnus.dk
Tlf: 24 22 00 70

FIND DIN
LOKALE
KONSULENT PÅ
WOLTURNUS.DK



Niels-Christian Simonsen
Salgskonsulent
ncs@wolturnus.dk
Tlf: 31 34 82 44



Jakob Lerbech Pedersen
Hjælpemiddeltekniker
jlp@wolturnus.dk
Tlf: 30 73 62 53



Dorte Læsø
Salgschef
dla@wolturnus.dk
Tlf: 40 38 40 68

WOLTURNUS A/S

+45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe
Samsøvej 30, 8382 Hinnerup
Borupvang 3, 2750 Ballerup