

Q300R + Q300R Mini

Kompakte el-kørestole, som ikke begrænser dig
hverken ude eller inde.



Q300 R




Q300 R Mini

KOMPAKTE EL-KØRESTOLE, SOM DU KAN TAGE PÅ EVENTYR I

Du behøver ikke skære ned på dine eventyr med Q300 R og Q300 R Mini. Indendørs er de meget manøvredygtige - super smalle og smidige i de mest snævre og travle situationer. Bevæger du dig udenfor kan el-kørestolene prale af stærk trækraft, motorteknologi og køreegenskaber, der kan konkurrere med meget større el-kørestole. Det er vores drivhjulsdesign, der gør hele forskellen. En omhyggeligt testet og raffineret base, der giver den perfekte balance mellem stabilitet og størrelse. Det er også en base, der kan positionere din vægt for at maksimere vejgrebet og erobre verden udenfor. Foretrækker du indendørs smidighed frem for ydeevne? Vælg Q300 R Mini, og nyd en slankere 550 mm base og 12" drivhjul til den mest snævre drejning og manøvrering.

Uanset hvad du vælger, giver det sofistikerede SEDEO LITE siddesystem den samme klinisk støtte til de mest udfordrende situationer. El-kørestolene fås med et væld af sædemuligheder og flotte skjold- og accentfarver - Q300 R og Q300 R Mini ser og føles fantastiske, både inde- og udendørs.

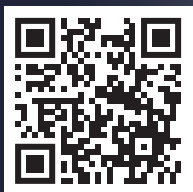

Scan QR-koden med din
telefons kamera for at se video.



ALL-ROUND YDEEVNE

KØRER ALLE BAGHJULSTRUKNE EL- KØRESTOLE ENS?

Prøvekør Q300 R eller Q300 R Mini og du vil bemærke forskellen blandt andet i form af deres vejgreb og suveræne manøvreringsevner.

Det er alt sammen takket være Q300 R og Q300 R Minis optimerede base. Ved omhyggeligt at teste og forfine hundredvis af præcisionsjusteringer af bredde, længde, hjul og sædeposition, fandt vi den mindste basegeometri uden at gå på kompromis med stabilitet eller trækraft.

Fordi Q300 R er så stabil, kan den også understøtte et bredere udvalg af tyngdepunktsjustering, så din sædeposition kan flyttes længere frem eller tilbage for bedre at balancere din vægt og øge trækraften og køreegenskaberne. Derudover får du desuden en kompakt stol, der også fungerer lige så godt indendørs som udendørs.



Q300 R



Q300 R MINI

UDENDØRS YDEEVNE


BEDRE TRÆKKRAFT OG VEJGREB.

Med en præcisionsmålt base, der er gearret til udendørs ydeevne, har Q300 R og Q300 R Mini al den trækraft og de køreegenskaber, du behøver for at håndtere en travl bymidte eller en tur i det fri på et mere ujævnt underlag.



14" DRIVHJUL

Leder du efter ren udendørs performance? 14" drivhjul giver større trækraft og stabilitet over det mest barske terræn. De vil også holde din Q300 R slank på 580 mm.

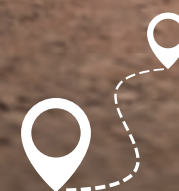

32 km

RÆKKEVIDDE

Drevet af kraftfulde 63 Ah-batterier (tilkøb) kan du køre hen, hvor du vil uden at skulle skynde dig tilbage med en rækkevidde på op til 32 km.



AFFJEDRING BAGTIL

Q300 R og Q300 R Minis baghjulsaffjedring giver responsiv dæmpning, når du kører over bakket eller ujævnt terræn, og reducerer mængden af stød og vibrationer, der passerer gennem din kørestol. Du kan derfor læne dig tilbage og nyde en behagelig og jævn køretur.

KØR LIGE MED GYRO CONTROL

Da der er færre svinghjul at dreje, når el-kørestolene drejes, kører Q300 R og Q300 R Mini naturligvis i en lige linje ved højere hastigheder og kommer hurtigere frem, uden man bliver nødt til at overstyre. Når du støder på et ujævnt terræn, vil Gyro Control (tilkøb) automatisk foretage hyppige styrekorrekationer for at fastholde din retning og bevægelse i en lige linje - en fordel, hvis du bruger specialstyringer eller har dårlig håndkoordination.



INDENDØRS MANØVREDYGTIGHED

PÅ HJEMMEBANE, BÅDE INDE- OG UDENDØRS.

Fra trange gange, travle kontorer til små hjem, passer Q300 R's smalle 580 mm base perfekt ind. Med enestående manøvreduktig og intuitivt baghjulstræk, vil du finde den utrolig nem at manøvrere.

430 mm

SÆDE TIL GULVHØJDE

Passer komfortabelt under borde, eller når du kører din kørestol ind i dit kørestolstilpassede køretøj med Q300 R's ultralave sæde-til-gulv-højde, der starter fra 430 mm (17").



1800 mm

VENDECIRKEL

1100 mm

BASELÆNGDE

Q300 R er ultrakort i længden og passer ind i de mindste rum, og du behøver ikke længere at bekymre dig om at optage for meget plads bagtil.





OPLEV DEN EKSTRA KOMPAKTE

Q300 R Mini

Leder du efter større manøvredegygtighed? Med 12" drivhjul og centermontering som standard kan Q300 R Minis ultrasmalle 550 mm base komme hen, hvor andre ikke kan. Derudover er den let nok (fra 124 kg med 50 Ah batterier) til også at være kompatibel med de fleste gulvlifte.

550 mm

BASEBREDE

1700 mm

VENDECIRKEL



1060 mm

BASELÆNGDE

KOM TÆTTERE MED DEN CENTERMONTEREDE BENSTØTTE

Med den centermonterede benstøtte kan du ikke kun komme tættere på genstande (som borde eller diske), men du får også en super snæver vendecirkel.

ELEKTRISK SIDDESYSTEM

SEDEO LITE, DET BEDSTE SÆDE I HUSET

Ved at kombinere et justerbart og konfigurerbart sæde med det bredeste udvalg af støtte- og positioneringsmuligheder er SEDEO LITE den moderate- til høje kliniske siddesystems-løsning, der er designet til at blive skræddersyet til dine skiftende behov. Alt sammen med kun ét værktøj.



INTEGRERET SÆDESKINNE

Den integrerede sædeskinne tilbyder mange monteringsmuligheder til placering af elementer, som side-, lår- og knæstøtter. Alt du skal gøre er at fastgøre og glide på plads.



UNIVERSEL NAKKESTØTTE

Kompatibel med SEDEO og WHITMYER nakkestøtter, vil dette beslag hjælpe med at imødekomme en række behov for hovedstøtte (fra grundlæggende til multipunktskontrol).



LÆNGDEKOMPENSERENDE, SWING-AWAY BENSTØTTER

Disse benstøtter kan justeres i længden for at opnå den bedste pasform, og de svinger væk for lettere sædeforflytning. Fås også i elektriske og centermonterede versioner.

SEDEO PRO FLEKSIBEL RYG

Opgrader til dette unikke ryglæn, der ubesværet kombinerer justerbar ryg- og sidestøtte med det højeste niveau af komfort.

FORMER SIG EFTER DIN RYG

I modsætning til faste rygge, former den fleksible ryg sig efter din ryg og sørger for fuldstændig kontakt, komfort og stabilitet. Da ryggen smyer sig om dig, krammer de integrerede sidestykker dine sider, hvilket får skummet til at forme sig efter dine anatomiske kurver og holder din torso stabil og justeret.



Ryggen er så fleksibel, at den også kan støtte moderate til svære kyfotiske stillinger eller spinal skoliose.



HAR DU SPECIFIKKE SIDDEKRAV?

SEDEO LITE er også kompatibel med J3 Back. Velegnet til moderat til høj positionering, tilbyder J3 Back det bredeste udvalg af størrelser, modeller og muligheder for præcist at passe og skræddersy dit sæde til dig.

ELEKTRISKE MULIGHEDER

FÅ POWER MED DIN EL-KØRESTOL

Q300 R og Q300 R Mini har ikke blot styrke som en **STOR** el-kørestol, de er også fyldt med **STORE** el-funktioner til at opfylde dine kliniske- og livsstilsbehov.



ELEKTRISK SÆDELIFT OG TILT

Nå nye højder med 300 mm sædelift og nå hverdagsgenstande, som ellers ville være uden for rækkevidde. Forflytninger er også nemmere takket være en højere siddeposition at stå fra. Plus, med 30° hældning kan du læne dig tilbage og nyde større afslapning og trykfordeling.





R-NET AVANCERET JOYSTICK

Opgrader din indbyggede teknologi med denne store, letlæselige HD-skærm og brugervenlige paddle-kontakter. Dens indbyggede Bluetooth- og I-device teknologi giver dig også mulighed for at oprette forbindelse til dine enheder, alt sammen fra din Q300 R eller Q300 R Minis komfort.



120° ELEKTRISK RYGLÆN

Har du brug for at aflaste og omfordele din vægt i løbet af dagen? Et elektrisk ryglæn giver dig mulighed for, at justere din sæde-til-ryg-vinkel på samme måde, som et sæde i en bil.



ELEKTRISKE BENSTØTTER

Hvis du har brug for ekstra benstøtte, er disse benstøtter et godt alternativ til manuelle. De hjælper dig med at hæve dine ben, blandt andet når du har brug for at reducere hævelser.





C-ME

ELEVÉR OG KØR MED C-ME

Desværre er livet ikke designet omkring højden af din kørestol. Derfor giver C-Me mulighed for, at hæve dig selv op til 300 mm og køre op til 4,5 km/t på samme tid! Nu kan du følges med dine venner i øjenhøjde og i ganghastighed. Nå højder, der før var uden for rækkevidde. Og bliv set.



AFFJEDRING, SELV NÅR DEN ER HÆVET

Med C-Me forbliver affjedringen på din kørestol aktiv, selv når du er hævet. Så du får den samme jævne og stabile tur på tværs af forskellige terræn uanset sædeniveau.



ELEVÉR DIG SELV MENS DU KØRER MED VORES ASSIGNABLE BUTTONS

Træt af komplekse joystick-bevægelser eller at skulle stoppe for at bruge din sædelift? Med vores patenterede assignable buttons, kan du tildele C-Me til en hvilken som helst knap, der derefter kan løfte eller sænke sædet med én enkel handling. Det er så nemt, at du endda kan gøre det, mens du kører.



Scan QR-koden med din telefons
kamera for at se video.

FARVE VALGMULIGHEDER

GØR INDTRYK

Behandl hver gade som en catwalk med Q300 R og Q300 R Minis 5 omhyggeligt udvalgte skjoldfarver. Du kan også komplimentere dit valg med 7 farveaccenter.

Scan QR-koden nedenfor for at finde din perfekte kombination (Tryk på farverne og se el-kørestolene i de forskellige farveudgaver).



BLUE

PURPLE

YELLOW

RED

BLACK

built4me

Vil du have noget unikt? Vores Built-4-Me team kan hjælpe dig med at skabe en virkelig skræddersyet Q300 R eller Q300 R Mini, der er noget helt særligt! Spørg din forhandler for mere information.

ACCENT FARVER



BLACK



BLUE



GREEN



ORANGE



RED



SILVER



WHITE

TEKNISK DATA

	Q300 R	Q300 R Mini
Sædebredde	385 - 520 mm	385 - 520 mm
Sædedybde	410 - 510 mm	410 - 510 mm
Sædehøjde	410 - 490 mm	410 - 490 mm
Ryghøjde	460 - 510 mm	460 - 510 mm
Underbenslængde	305 - 460 mm	305 - 460 mm
Elektrisk tilt	0 -30°	0 -30°
Total bredde	580 mm	550 mm
Total længde	Fra 1100 mm	Fra 1060 mm
Vendecirkel	1800 mm	1700 mm
Maksimal hældning	6°	6°
Maksimal kantstensklatrang	100 mm	100 mm
Maksimal rækkevidde (ISO 7176-4)	32 km	32 km
Produktvægt (med 50 Ah batterier)	124 kg	124 kg
Maksimal brugervægt	136 kg	136 kg
Drivhjul	14"	12"
Svinghjul	8" / 9"	8" / 9"
Maksimal hastighed	10 km/t	10 km/t
Batteristørrelse	50 / 55 / 63 Ah	50 / 55 / 63 Ah
Elektronik	VR2 / R-Net	VR2 / R-Net
Crash testet	Ja - godkendt til fremadvendt transport i et køretøj (ISO 7176-19). Fastgørelse: 4 stolefastspændingssteder med 2 dobbeltstroppe bagpå og 2 enkeltstroppe foran. Ingen forankring af sele tilladt. Den lette adgang og manøvreedygtighed i køretøjer afhænger af kørestolens størrelse.	
Transport uden bruger	Fastgør kørestolen sikkert i køretøjet (f.eks. bil eller fly).	
Tilsigtet anvendelse og miljø	Til personer med begrænset mobilitet, indendørs og udendørs brug. Kørestol type klasse B	

Nu hvor du har læst om QUICKIE Q300 R, hvorfor så ikke arrangere en gratis demonstration og afprøve en selv?



Scan QR-koden med din telefons kamera og bestil din gratis afprøvning i dag.

Sunrise Medical bekymrer sig om din sikkerhed. Læs venligst din brugermanual for sikker betjeningsvejledning og vedligeholdelsesvejledninger.

I overensstemmelse med vores politik om løbende produktforbedringer forbeholder Sunrise Medical sig retten til at foretage ændringer til enhver tid og uden varsel. For den seneste information, besøg venligst www.sunrisemedical.dk

Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.sunrisemedical.dk



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Tlf: +45 70 22 43 49

E-Mail: info@sunrisemedical.dk

www.sunrisemedical.dk