


Softform® Premier

Trykaflastende madras

En 2-delt højqualitetsmadras, der giver
komfort og trykaflastning med et
kastelleret øverste lag

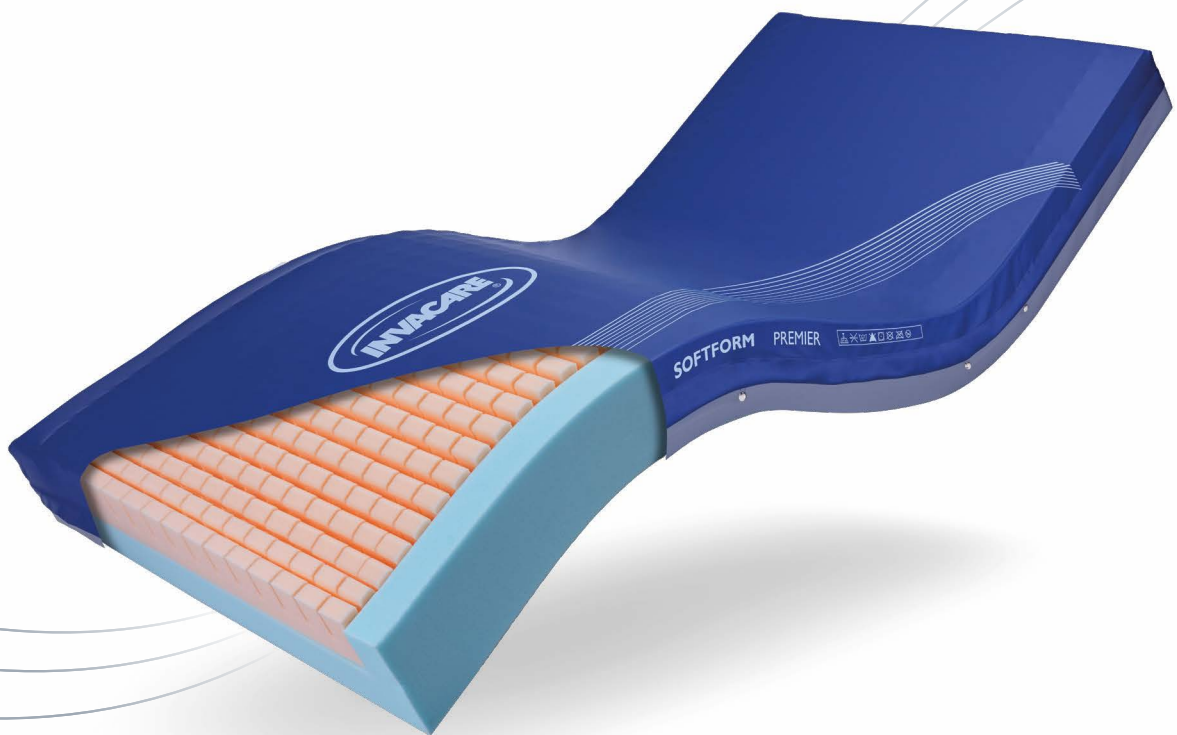

Kantstabilitet og trykaflastning

Til individuel håndtering af tryksår



Yes, you can.®

Effektiv forebyggelse af tryksår



Trykaflastning

- Skum af høj kvalitet giver en komfortabel og effektiv trykaflastende madras til patienter med høj til meget høj risiko for at udvikle tryksår.
- Opskåret skum hjælper med at fordele vægten over et større område.
- Konstruktion med løs skumkerne arbejder godt med elektrisk indstillelige plejesenge.



Reduktion af shear- og friktionskræfter

- Opskåret skum tilpasser sig bevægelser og kropspose og hjælper dermed med at reducere friktion- og shearkræfter.
- Madrassens øverste lag er opskåret i anatomiske zoner således, at cellerne er mindre i hælområdet, hvilket aflaster trykket på hælene, som er særligt udsatte for tryksår.
- Det tovejstækkelige, vandafvisende polyurethanbetræk er holdbart og hjælper med at reducere shear- og friktionskræfter.



Komfort

- Opskæringerne giver høj komfort og luftkanaler, som bidrager til et godt mikroklima.
- Robuste sider og bund giver stabilitet under forflytninger og forhindrer, at madrassen ligges igennem.
- Skjult svejset lynlås på alle fire sider reducerer risiko for væskeindtrængning og gør det nemt at afmontere betrækket til inspektion og vask.

Tekniske data ▼

For mere information om dette produkt, inklusive brugervejledning, besøg vores hjemmeside: www.invacare.dk




Bredde ▼

830 - 900 mm



Højde ▼

150 mm

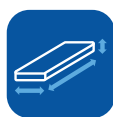

Længde ▼

2000 mm



Maks. brugervægt ▼

247 kg



Maks. rengørings-
temperatur ▼

95 °C

Fremstillet i henhold til BS 7177 (antændelseskilde 5); Skumkerne: BS 5852:1982 (antændelseskilde 5); Betræk: BS 7175 (antændelseskilde 5)

Grundlæggende sygepleje er afgørende i håndteringen af tryksår. Denne madras kan bidrage positivt til resultatet af en forebyggelsesplan, der omfatter uddannelse, klinisk vurdering og handling baseret på sårbarhed – centrale faktorer i forebyggelse af tryksår. Forskellige vurderingsskalaer kan anvendes som formelle metoder til risikovurdering og bør kombineres med en uformel vurdering (informeret sygeplejefagligt skøn) som del af en helhedsorienteret og individuel plan.

Tlf: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2606 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®