



JAY[®]

LITEPRO

FØRSTEKLASSES KLINISK SIDDESYSTEM

**JAY blev grundlagt i 1982 og revolutionerede kørestoles
siddesystemer og positioneringsmuligheder** med en meget klar
mission – at levere kliniske siddesystemer af højeste kvalitet, der
beskytter huden, understøtter kropsholdningen og forbedrer mobiliteten
gennem materialer, videnskab og innovation.

Denne mission er stadig vores drivkraft i dag. Meget aktive
kørestolsbrugere har brug for et siddesystem, der kan følge med og
styrke fremdriften – og som giver pålidelig støtte ved hver eneste
forflytning, hvert eneste skub og hver eneste udfordring.

**JAY LitePro puden lever op til denne mission med kompromisløs
ydeevne** i et ultralet, meget åndbart design med lav profil. Med en vægt
på blot 0,9 kg og en højde på 51 mm (2") kombinerer den justerbar
hudbeskyttelse, enestående stabilitet og effektiv trykfordeling – uden
kompromiser.

**JAY LitePro er designet til at give aktive brugere og atleter mulighed
for at forfølge og nå deres mål.**



Indsatsen forbliver på plads for at sikre
stabilitet ved hver bevægelse.



ULTRA LET, ULTRA LAV, OG SKABT TIL BEVÆGELSE

LET I VÆGT OG LAV PROFIL

Med en vægt på 0,9 kg og en tykkelse på kun 51 mm (2") er JAY LitePro **en af markedets letteste og tyndeste siddepuder** med justerbar trykaflastning. Til forbedret forflytning, smidighed og ydeevne.

REGULERING AF MIKROKLIMAET


Med en 45 % bedre fugtoverførsel end en traditionel luftpude holder JAY LitePro huden **tør og kølig**, hvilket resulterer i en stærkere og sundere hud.

JUSTERBAR TRYKAFLASTNING OG STABIL STØTTE

Med mere end dobbelt så stor stabilitet som en traditionel luftpude samt en høj grad af trykregulering skaber JAY LitePro en **fremragende balance mellem trykregulering og stabilitet**.

HOLDBAR OG BRUGERVENLIG

Langvarig ydeevne kombineret med **minimal vedligeholdelse** og nem rengøring, gør JAY LitePro til det perfekte valg for den aktive bruger.

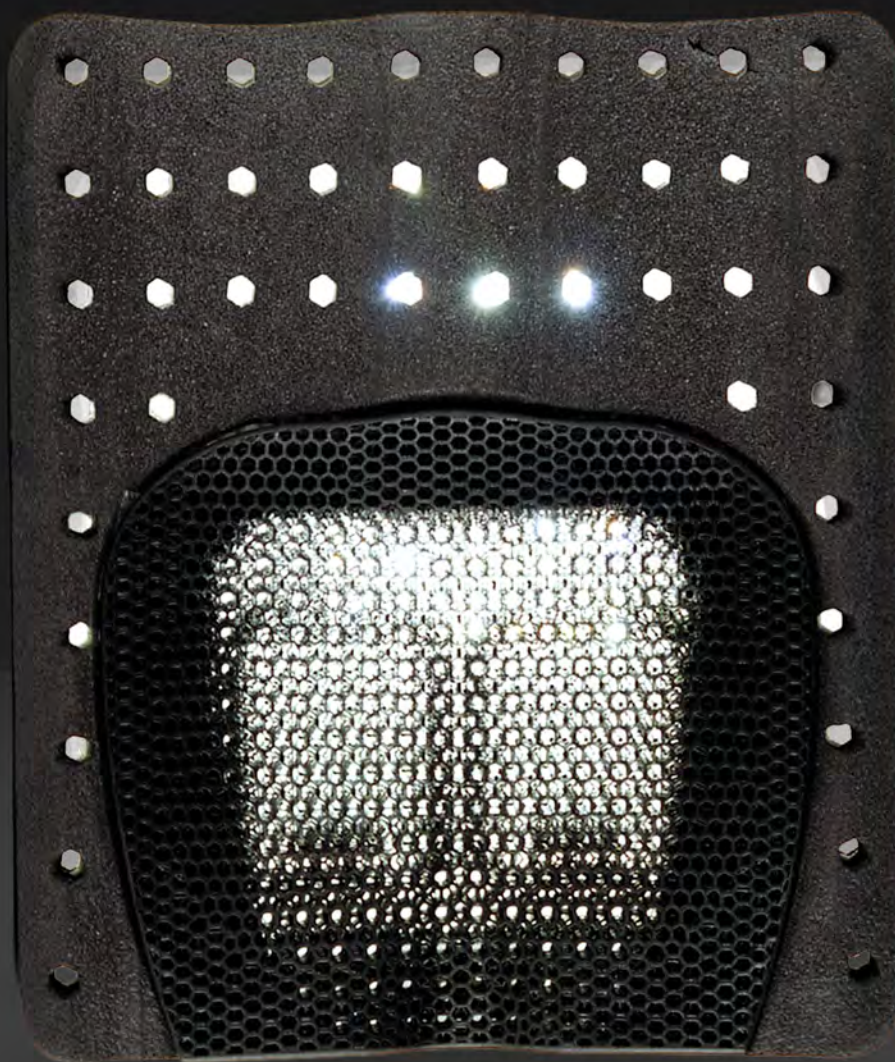

HOLDER HUDEN TØR OG KØLIG

360° ÅNDBARHED

Indlægget har en åndbar struktur, der sammen med den perforerede skumbase sikrer en kontinuerlig luftstrømning gennem hele siddepuden, hvilket er med til at holde temperaturen lavere dér, hvor det betyder mest.

Horisontale og vertikale luftkanaler integreret i den perforerede skumbase forbedrer afkølingen og fugtfordampningen og styrker luftstrømningen gennem indlægget.

Et Air-Exchange mesh-betræk yderst sikrer ekstra ventilation ved hudkontakten, hvilket hjælper med at holde brugeren køligere og tørrere – noget, der er nødvendigt for at beskytte huden.

LitePro tilbyder mere end blot trykaflastning – med en 45% bedre fugttransport end en traditionel luftpude holder den huden tør og kølig, hvilket resulterer i en stærkere og sundere hud.



JUSTERBAR TRYKAFLASTNING

DYB OMSLUTNING/NEDSÆNKNING OG HØJ TRYKAFLASTNING

En nedsækning i puden på op til 40 mm bidrager til at **omfordele trykket væk fra knogleområder med høj risiko**, hvilket fremmer en sundere og bedre beskyttet hud.


Indlægget forbliver præcis der, hvor det bør, og sikrer dermed en ensartet beskyttelse af huden, selv ved hyppige forflytninger og aktiv bevægelse i dagligdagen.

Trykreguleringsmodulerne hjælper med at **tilpasse trykaflastningen** for personer, der lider af en mild skævhed.

KOMFORT, DER TILPASSER SIG

Elastomerindlægget bøjer i flere retninger for at absorbere tryk og stød fra alle vinkler – dets fleksible struktur **tilpasser sig kroppens konturer**.

Elastomeren sikrer god støddæmpning og -absorbering, hvilket skaber en **jævn trykfordeling** og en blød, omsluttende fornemmelse, der giver varig komfort og stabilitet.

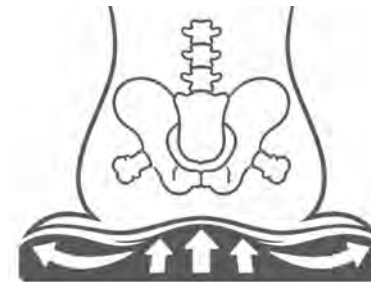

Trykreguleringsmoduler – fås i 2 densiteter

STABIL STØTTE

SMART MULTI-ZONE DESIGN

Den innovative indsats er opbygget af forskellige zoner.

Hver enkelt zone glider sømløst over i den næste og er udformet med sin egen densitetsprofil, hvilket giver støtte dér, hvor kroppen har brug for stabilitet og trykaflastning for at beskytte knoglefremspring.

De forskellige tæthedszoner bygger på antropometriske data – målinger af menneskekroppens størrelse og proportioner – for at fastlægge de optimale zonedimensioner.



Multi-densitetszoner

FANTASTISK STABILITET I EN SIDDEPUDE MED LAV PROFIL

LitePro tilbyder enestående stabilitet i en siddepude med lav profil – uden at gå på kompromis med trykaflastningen – og giver mere end dobbelt så meget stabilitet som en luftpude.

Det konturerede, flerlags skum giver postural støtte og stabilitet, mens den omsluttende indlæggspude skaber balance mellem trykaflastning og målrettet støtte.

Sammen bidrager de til en stabil positionering af bækkenet, hvilket **forbedrer fremdrift, kropsholdning og forflytninger.**



Kontureret skum i flere lag



Meget åndbar og op til 45 % mindre fugtphobning* sammenlignet med andre typer siddepuder – hvilket forbedrer brugerens mikroklima og mindsker risikoen for hudskader



Vores letteste pude på under 1 kg – let i vægt, nem at håndtere og transportere



Nem at rengøre, lav vedligeholdelse og slidstærk



Nedsækningen i puden bidrager til at omfordele trykket og mindsker dermed risikoen ved knogleområder



Kontureret skum i flere lag, der sikrer postural støtte og stabilitet



Giver fremragende stabilitet i en siddepude med lav profil

Markedets laveste profil (under 51 mm) for bedre tilgængelighed og ydeevne

* I uafhængige laborietests, hvor temperatur, fugtighed og belastning fra en person, der sad på en pude i 3 timer, blev simuleret, viste LitePro en 45 % lavere stigning i luftfugtigheden på kontaktfladen sammenlignet med en tilsvarende luftpude.



TEKNISK DATA

HCPCS KODE	E2622
MAKS. BRUGERVÆGT	150 kg)
BREDDE	EU 340 mm – 500 mm (13" – 20") US 360 mm – 500 mm (14" – 20")
DYBDE	360 mm – 500 mm (14" – 20")
PUDENS HØJDE	50.8 mm
PUDENS VÆGT	0.90 kg
BETRÆK-MATERIALER	Air Exchange-mikroklimatisk betræk med slidstærke sidebånd og skridsikkert mesh uden PVC
JAY YOUR WAY	Modifikationer er tilgængelige

Se order form, da specifikationer kan variere afhængigt af konfigurationen.

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70 22 43 49
E-mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere oplysninger om den fulde specifikation, tilvalg og tilbehør henvises der til order form. Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål.



Hvis du er synshandicappet, kan du se dette dokument i PDF-format på www.SunriseMedical.eu.